EasyGlide

SystemRoMedic™

Manual de usuario – Español









REF

5050
5020
5060
5070



SWL: 135 - 150 kg/297 - 330 lbs
SWL: 135 - 170 kg/297 - 375 lbs (5050)

handicare

Manual no: 809 Ver. 11 150303

EasyGlide

SystemRoMedic™

Español

La plancha de deslizamiento EasyGlide es un ingenioso invento. Esta plancha ayuda a trasladar a usuarios sentados desde y hacia sillas de ruedas, camas, inodoros, asientos de vehículos y otras muchas posiciones sentadas. Se adecua en particular a la hora de salvar diferencias de altura y pequeñas distancias.
Sus esquinas redondeadas y su suave superficie superior de baja fricción permiten fáciles deslizamientos y simplifican enormemente la colocación y retirada de la plancha. La doble cinta adhesiva de la cara inferior impide que la plancha resbale sobre la superficie subyacente durante los traslados.


Inspección operacional

Inspección visual

Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia. Asegúrese de que el tejido no esté desgastado o desteñido. Si hay indicios de desgaste, el producto deberá ser desechado.

Prueba de estabilidad

Pliegue con cuidado del dispositivo de asistencia para comprobar su resistencia y durabilidad.
La alfombrilla debe ser elástica y rígida al mismo tiempo. Deseche del dispositivo de asistencia si disminuyen su resistencia y durabilidad.

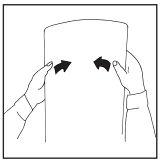



Lea siempre el manual


Lea siempre los manuales de todos los dispositivos de asistencia empleados en los traslados.
Guarde el manual en un lugar accesible a los usuarios del producto.
Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual.
Podrá descargar las ediciones más recientes de los manuales en nuestro sitio web: www.handicare.com.

Información importante


No deje al usuario desatendido durante una operación de traslado.

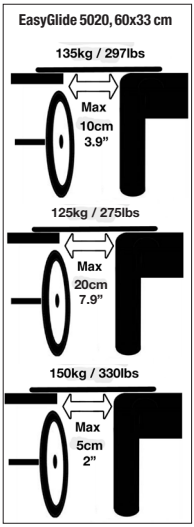

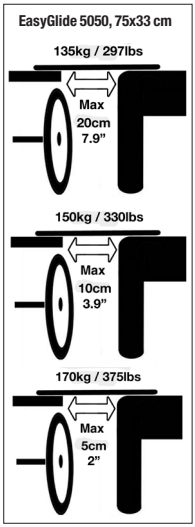

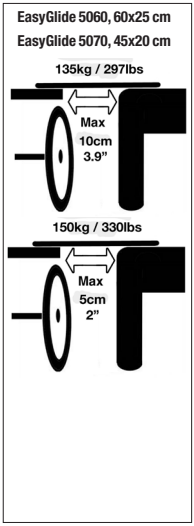


Colocación/extracción de EasyGlide

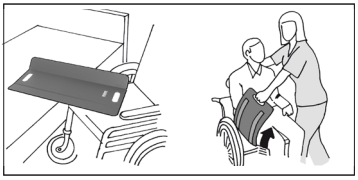

Sitúe la silla de ruedas ligeramente oblicua respecto al borde de la cama y lo más cerca posible de ella. Retire el reposabrazos más próximo a la cama, así como el apoyapiernas (de haberlo). Posicione EasyGlide a modo de puente entre la cama y la silla de ruedas. Si se trata de un EasyGlide que permita la flexión de uno de sus lados, deberá colocarse éste sobre la rueda de la silla de ruedas. Para colocar EasyGlide bajo el usuario, incline a éste un poco en el sentido contrario.

Una vez completado el desplazamiento, EasyGlide se retira doblándolo hacia arriba.

Empleo de EasyGuide

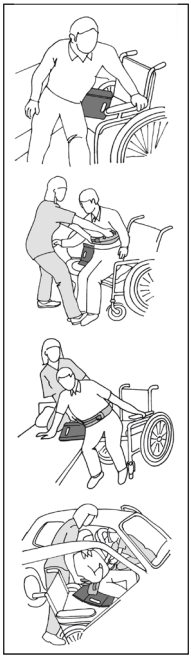

Si el usuario es activo, podrá desplazarse por sí mismo con EasyGlide. En ese caso, agarre el reposabrazos e inclínese para pasar a la silla de ruedas. Es importante no olvidar inclinarse una última vez en dirección a la cama al finalizar el desplazamiento para deslizarse en el centro y luego al fondo de la silla.

Si el usuario precisa de apoyo y ayuda durante el desplazamiento, deberá completarse EasyGlide con EasyBelt/FlexiBelt.

El asistente puede situarse tanto delante como detrás del usuario.

Consejo: Le aconsejamos que use nuestro FootStool para levantar las rodillas.

EasyGlide puede utilizarse también para el acceso y salida de un automóvil.

Material
Polietileno

Cuidado del producto
La superficie del producto se puede limpiar con agua caliente o con una solución jabonosa. Si se precisa una desinfección, se debe utilizar etanol al 70%, isopropanol al 45% o similar.

CE Clase de producto sanitario I

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso. Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

Vida útil estimada
Hasta 10 años de uso normal.

Size

Ref. no.	Size
5020	600x330 mm / 23,6 x 12,9”
5050	750 x 330 mm / 29,5 x 12,9”
5060	600 x 250 mm / 23,6 x 9,8”
5070	450 x 200 mm / 17,7 x 7,8”

MediCauce

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España
T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

handicare

Handicare AB is quality and environmentcertified in accordance with ISO 9001, ISO14001 and ISO 3485.