

HighBackSling

SystemRoMedic™

Manual - Español

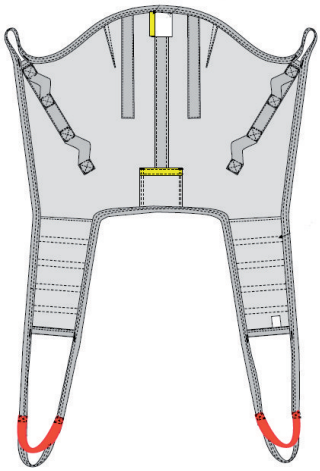

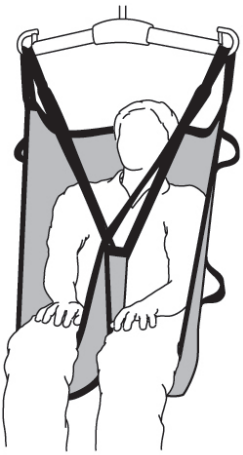

Carga Máxima: 300kg/660lbs

HighBackSling es fácil de colocar por el cuidador y ofrece al usuario una sensación de seguridad. Es un arnés con soporte de piernas separado, lo que significa que el usuario no se sienta en el arnés, sino que el soporte se efectúa desde el coxis hasta los hombros y bajo las piernas. HighBackSling está diseñado para dar soporte extra en la cabeza y para realizar elevaciones en posición tumbada y desde el suelo.

SystemRoMedic incluye una amplia variedad de arneses funcionales, cómodos y de alta calidad que pueden adaptarse a distintas elevaciones y necesidades. Los arneses están disponibles en distintos materiales y tallas desde la XXS a la XXL. Todos modelos son seguros y fáciles de usar y están diseñados para levantar usuarios de hasta 300Kg. La elección del modelo y el material depende de las necesidades del paciente y el tipo de transferencia a realizar.

Inspección Funcional

Inspección Visual y Mecánica

Compruebe regularmente el estado y la funcionalidad del arnés. Siempre chequee el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no están dañados. Compruebe que el textil no está deshilachado o desgastado. Ponga peso en el arnés para comprobar su fortaleza en enganches, asas, etc. Si hay signos de desgaste deseche el producto.

Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales de las ayudas técnicas y de transferencia.
Mantenga el manual en un lugar accesible.
No deje al paciente solo durante una transferencia.
Para asegurarse de la comodidad y seguridad en el paciente, elija la talla adecuada. Enganche primero las sujeciones de la espalda y luego las de las piernas.
El peso máximo de elevación lo determinará el peso que aguante el componente de manor peso máximo.
Comprueba siempre los pesos máximos de los dispositivos.
Contacte a su disitribuidor en caso de dudas.


handicare

Manual no: 00849 En Ver. 4 101111

Colocación del arnés en posición sentada en silla de ruedas, cama, etc.



1

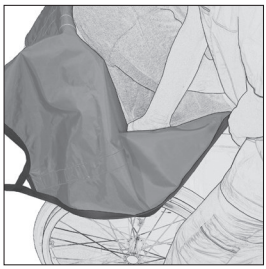

2

1. Sujete el arnés con una mano y coloque la otra mano en el bolsillo del extreme inferior del arnés. Esto le será más fácil si el paciente se inclina hacia delante o le ayudan a inclinarse ligeramente hacia delante. Pase el arnés por detrás de la espalda del paciente y hacia abajo a lo largo del respaldo de la silla o cama, hasta el coxis. La parte central del arnés debería seguir la columna del paciente.


2. Deslice el arnés hacia las caderas del paciente llevándolo hacia las esquinas posteriores del asiento de la silla de ruedas.

3. Tire de los soportes de las piernas hacia afuera y por la parte exterior del muslo. Colóquese frente al paciente y tire del extremo inferior del soporte de la pierna para que el arnés se coloque alrededor de las caderas. Una ligera presión en las rodillas del paciente evitará que este se deslice hacia delante en la silla.

4. Una vez que compruebe que las solapas de las piernas tienen la misma longitud en ambos lados colóquelos debajo de los muslos del paciente, crúcelos y cuélguelos de la percha. Comience a elevar la grúa, cuando las cintas se tensen pare y compruebe que




3

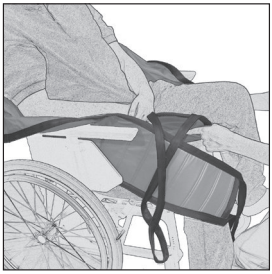


4

Retirada del arnés con el paciente sentado.

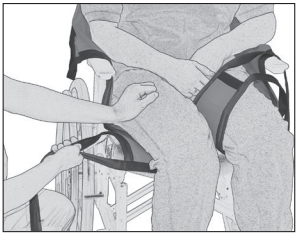

1

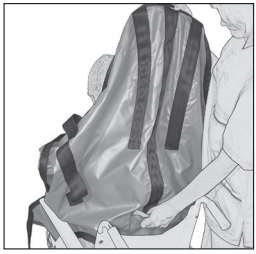


2

1. Doble las solapas de la pierna y deje que se deslice sobre sí mismo cuando tire de él desde la parte exterior del muslo del paciente.

2. Tire del arnés hacia arriba por detrás de la espalda del paciente.

COLOCACIÓN DEL ARNÉS CON EL PACIENTE ESTÁ TUMBADO

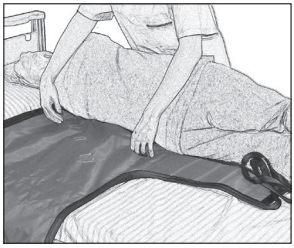


1




2

1. Gire al paciente hacia usted. Coloque el arnés con la etiqueta hacia abajo y con la parte central a lo largo de la columna del paciente. El extremo superior del arnés debería estar a la altura del hombro y el extremo inferior a la altura del coxis. Coloque el extremo del arnés todo lo que pueda por debajo del paciente y las cintas de la espalda de manera que pueda cogerlas una vez que una vez que haya girado al paciente sobre el arnés.

2. Si quiere, para reducir estos pasos, puede doblar la parte superior del arnés sobre la espalda del paciente y pasar los soportes de las piernas entre sus rodillas del paciente cuando esté girado hacia usted y después tirar de ellas hacia delante cuando el paciente esté recostado sobre el arnés.

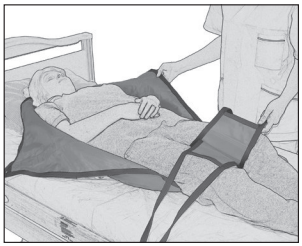

3

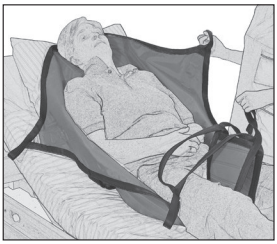


4


3. Tire de las solapas de las piernas hacia afuera y por la parte exterior del muslo. Colóquese frente al paciente y tire del extremo inferior del soporte de la pierna para que el arnés se coloque alrededor de las caderas. Una ligera presión en las rodillas del paciente evitará que este se deslice hacia delante en la silla.

4. Una vez que compruebe que las solapas de las piernas tienen la misma longitud en ambos lados colóquelos debajo de los muslos del paciente, crúcelos y cuélguelos de la percha. Comience a elevar la grúa, cuando las cintas se tensen pare y compruebe que todo funciona correctamente antes de proceder a la elevación.

RETIRADA DEL ARNÉS CON EL PACIENTE TUMBADO

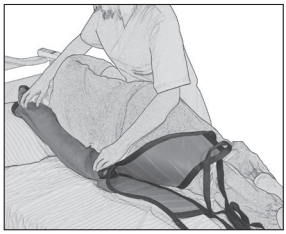

1

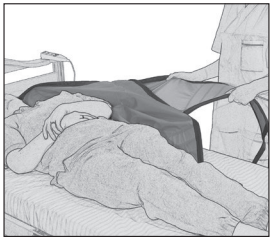


2

1. Coloque los soportes de las piernas entre las rodillas del paciente.

2. Gire al paciente hacia usted y doble el arnés por debajo del paciente de manera que éste se deslice hacia usted cuando tire de él una vez que haya girado al paciente de nuevo sobre el arnés.

COLOCACIÓN ALTERNATIVA DE LOS SOPORTES DE PIERNAS DEL ARNÉS



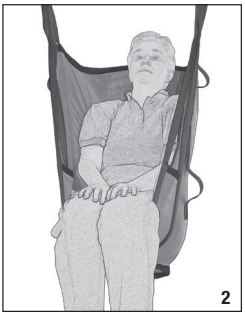



1. En la colocación normal las solapas para las piernas se cruzan antes de colgarlos de la percha.

2. Si se quiere tener un mayor acceso a la zona del perineo del paciente no cruce las solapas de las piernas, sin embargo esto podría entrañar el riesgo de que el paciente se deslizara fuera del arnés.

3. Para un fácil acceso a la zona perineal del paciente. Esta colocación puede facilitar la caída del paciente.

Material:

Poliéster: material duradero con poca fricción, permite lavados a alta temperatura.
Malla de poliéster: tejido de buena ventilación, adecuado si hay que dejar el arnés debajo del paciente. Permite lavados a alta temperatura.
Red Plastificada: Material pensado para soluciones de baño y ducha. El material puede ser desinfectado con soluciones alcoholicas.

Cuidados del Producto

Lea la etiqueta



No use abrasivos
Para alargar la vida del producto evite secar en secadora.

Información sobre Tallas

Los arneses pueden utilizarse con perchas de 2 y 4 puntos. Es imprescindible asegurarse de que el ancho de la percha es el adecuado para la talla de arnés y las capacidades del paciente.
Use arneses de uso específico para asegurar la seguridad e higiene.

Talla		XXS/Gris	XS/Naranja	S/Rojo	M/Amarillo	L/Verde	XL/Morado	XXL/Blanco
Peso rec.	lbs	22-55	44-77	66-121	110-198	176-243	243-353	287-441
Usuario	kg	10-25	20-35	30-55	50-90	80-110	110-160	130-200
Altura total	inch	30	33,5	36	37	38,5	38,5	40
Arnés	cm	77	85	91	94	98	98	102
Medida	inch	8	10	14	18	22	24,5	27,5
Asiento	cm	20	25	35	45	56	62	70

Contacte con su distribuidor local si tiene alguna duda sobre el producto y su uso. Asegúrese de tener la última versión de manual.
Las ediciones más recientes están disponibles en www.handicare.com

Handicare AB
Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200 Internet: www.handicare.com
SE-175 27 Järfälla Fax:+46 (0)8-557 62 299 E-mail: info@handicare.se
SWEDEN

handicare