Sábanas de deslizamiento ReadySlide



Medidas:

11210	195 x 70
11215	195 x 70 con asas
11230	110 x 70
11235	110 x 90
11250	70 x 70

Material:
Poliamida

Cuidado del Producto:



Lea la etiqueta del producto.
No utilice agente aclarantes.
Para prolongar la vida del producto evite secado en secadora.

Áreas de Aplicación:



Utilización


Colocación/retirada:
Para colocar el arnés lateralice al usuario en dirección contraria, coloque el ReadySheet debajo. Para retirarlo tire de la parte de abajo para evitar fricción en el usuario.



Lateralizaciones:
Coloque la sabana bajo el usuario cubriendo los puntos de fricción del tronco facilitando el posicionamiento y reduciendo la fricción



Tranferencia lateral:
Coloque la sábana bajo el usuario, posicione la otra cama o camilla y transfiéra al usuario. Nota: si existe mucha distancia entre las dos superficies utilice una tabla.

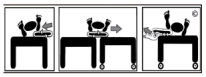

Subir más arriba al cabecero:
Coloque la sabana cubriendo los puntos de fricción del tronco, deslice al usuario hacia arriba en el lecho de la cama.



Transferencia de silla a cama:
Coloque la sábana cubriendo al usuario en posición sentada. Deslice al usuario entre las dos superficies. Si el usuario es suficientemente autónomo podrá realizar la transferencia sin ayuda.



MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13,
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

handicare