

AntiSlip

SystemRoMedic™

Manual de usuario – Español

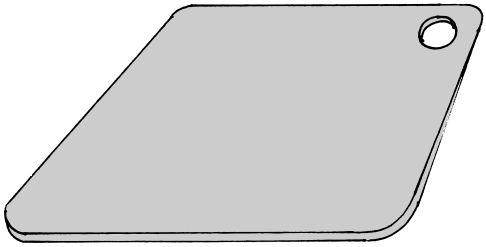

REF
8040

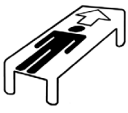



SWL: 200 kg/440 lbs

handicare

Manual no: 833 ver. 11 150811

AntiSlip
SystemRoMedic™


Español

El AntiSlip proporciona fricción bajo los pies del usario en distintas situaciones de traslado, por ejemplo, al recolocar al usario más arriba en la cama o al incorporarse desde una posición sentada. El AntiSlip está fabricado en un material de celdas cerradas, lo que optimiza su higiene.

Inspección operacional

Inspección visual

Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia.

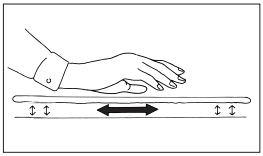

Prueba de fricción

Alta fricción – ¿la superficie es igual de rugosa y frena como antes? ¡Compárelo con un nuevo producto!

Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales de todos los dispositivos de asistencia empleados en los traslados. Guarde el manual en un lugar accesible a los usuarios del producto. Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual. Podrá descargar las ediciones más recientes de los manuales en nuestro sitio web: www.handicare.com.

Colocación del AntiSlip

El AntiSlip se sitúa bajo los pies del usario o en la cama para ofrecer más fricción y, por tanto, un mejor agarre.



Uso del AntiSlip

Aporta fricción bajo los pies dentro de la cama durante los alzamientos pélvicos y en la recolocación hacia arriba en la misma. Se aconseja combinarlo con un dispositivo reductor de la fricción por debajo de los hombros.



El AntiSlip puede emplearse debajo de los pies para proporcionar un adecuado agarre en los levantamientos desde una posición sentada y en los traslados entre distintas ubicaciones, por ejemplo, entre la cama y una silla de ruedas/silla. Se recomienda utilizar con un EasyBelt/ FlexiBelt.



Material

Polietileno

Cuidado del producto

La superficie del producto se puede limpiar con agua caliente o con una solución de jabón. Si es necesaria la desinfección, se debería utilizar etanol al 70 %, isopropanol al 45 % o similar.

¡Atención! No someta el producto a fuertes presiones ni impactos. Ello podría producir mellas en el material.

CE Clase de producto sanitario I

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso. Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

Vida útil estimada

Hasta 10 años de uso normal.

Product information

Art. no	Productname	Size	Description
8040	AntiSlip	450 x 380 mm / 17.7 x 14.9 inch	1 pce
8045	AntiSlip	450 x 380 mm / 17.7 x 14.9 inch	10 pce
8046	AntiSlip	450 x 380 mm / 17.7 x 14.9 inch	30 pce

SystemRoMedic™

Simple solutions for great results

SystemRoMedic™ is the name of Handicare's unique easy transfer concept, the market's widest and most comprehensive range of clever, easy-to-use and safe transfer and lifting aids designed to make life easier, both for the user and for the caregiver. SystemRoMedic™ is a complete solution that provides for the majority of patient transfer or manual handling requirements. From the simplest to the most complex scenarios, from the lightest to the heaviest. The concept encompasses assistive devices for four different categories of transfers:

- Transfer, assistive devices for manual transfers of users between two locations.
- Positioning, assistive devices for manual repositioning of users within the same location.
- Support, assistive devices for mobility support e.g., during sit-to-stand or gait training.
- Lifting, assistive devices for manual and mechanical lifting of users.

Improved work environment, improved quality of care and cost savings

The philosophy behind SystemRoMedic™ is focused on the prevention and reduction of occupational injuries while allowing users to experience a greater sense of independence and dignity. Through a unique combination of training and a complete range of efficient transfer aids, SystemRoMedic™ offers improvement of both work environment and quality of care and, at the same time, achieves significant cost savings.

Always make sure that you have the correct version of the manual

The most recent version of all manuals are available for downloading at/from our website; www.handicare.com.

For questions about the product and its use

Please contact your local Handicare and SystemRoMedic™ representative. A complete list of all our partners with their contact details can be found on our website; www.handicare.com.

Handicare offers solutions and support to increase the independence of disabled or elderly people as well as to improve the convenience of those who are caring for them.

The Handicare Group is one of the leading healthcare companies in Europe with its own manufacturing organizations and sales companies in Norway, Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, Great Britain, France, China, Canada and the USA. Handicare's products are also distributed by partners in more than 40 countries worldwide. Our wide range of high-quality products includes various manual and power wheelchairs, seating systems, scooters, a complete easy transfer system and other patient handling aids, stairlifts, car adaptations, rise and recline chairs, and bathing and toileting products.

MediCauce

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España
T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

Handicare AB is quality and environmentcertified in accordance with ISO 9001, ISO14001 and ISO 3485.