

EasySlide

SystemRoMedic™

Manual de usuario – Español

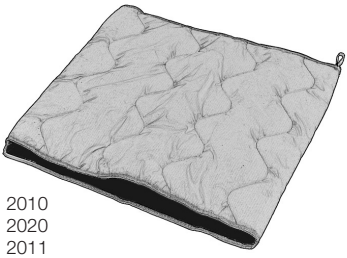


2010
2020
2011
2021

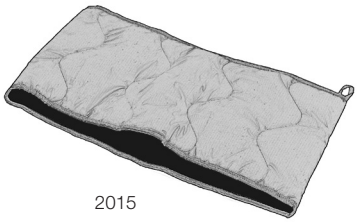

2015

REF

2010
2020
2011
2021
2015

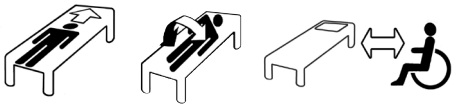

SWL: 300 kg/660 lbs

handicare

Manual no: 813 Ver. 12 150729

EasySlide
SystemRoMedic™

Español


El EasySlide se utiliza para los giros en la cama, los traslados entre la cama y la silla de ruedas/aseo y para recolocar al usuario hacia arriba en la cama. El EasySlide es una alfombrilla tubular y almohadillada con un material reductor de la fricción en la cara interior.

Inspección operacional

Inspección visual

Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia. Examine siempre el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no presenten desperfecto alguno. Asegúrese de que el tejido no esté desgastado o desteñido. Si hay indicios de desgaste, el producto deberá ser desechado.

Prueba de fricción

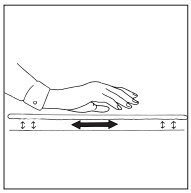



Baja fricción - ¿la superficie es lisa y se desliza con la misma facilidad que antes? ¡Compárelo con un nuevo producto!

Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales de todos los dispositivos de asistencia empleados en los traslados.
Guarde el manual en un lugar accesible a los usuarios del producto.
Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual.
Podrá descargar las ediciones más recientes de los manuales en nuestro sitio web: www.handicare.com.

Colocación del EasySlide

Sitúe el EasySlide bajo una nalga o uno de los hombros. En los traslados deberá bascularse todo el peso del cuerpo del usuario hacia el EasySlide.
Para sacar, tire del extremo inferior del EasySlide.


Uso del EasySlide



1. Se aconseja utilizar el EasySlide en los traslados a y desde una silla de ruedas. A ser posible, complemente con un EasyGlide.



2. El EasySlide puede utilizarse por debajo de los hombros como un dispositivo de asistencia reductor de la fricción a fin de facilitar la recolocación hacia arriba en la cama.

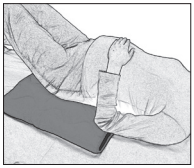

3. El EasySlide puede utilizarse bajo las caderas para facilitar los traslados laterales.
Los usuarios activos pueden utilizar el EasySlide por sí mismos, aunque también pueden hacerlo los menos activos con la ayuda de un asistente.



La separación entre las superficies subyacentes (cama/camilla/carro de ducha) no debe superar los 5 cm.

¡ATENCIÓN!
No olvide bloquear siempre las ruedas.



Para evitar el riesgo de que el usuario se resbale o caiga, no deje nunca el EasySlide debajo del mismo una vez completado el traslado, ni tampoco coloque al usuario demasiado cerca del borde de la cama.

Material

Poliéster, microfibra, poliamida

Cuidado del producto

Consulte la etiqueta del producto.



No use detergente/suavizante y evite el secado para una vida útil óptima.

CE Clase de producto sanitario I

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso. Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

Vida útil estimada

Hasta 10 años de uso normal.

Products

Art. no	Product	Description
2010	EasySlide	500 x 600 mm / 19,7 x 23,6 inch, Polyester
2020	EasySlide	500 x 600 mm / 19,7 x 23,6 inch, Microfibre
2011	EasySlide	500 x 700 mm / 19,7 x 27,2 inch, Polyester
2021	EasySlide	500 x 700 mm / 19,7 x 27,2 inch, Microfibre
2015	EasySlide	250 x 600 mm / 9,8 x 23,6 inch, Polyester

Accessories

Art. no	Product	Description
2051	Protective cover	For EasySlide 2010 ,2020, 2030
2052	Protective cover	For EasySlide 2011, 2021
2055	Dispoable cover	For EasySlide 2010, 2020, 2030

2030	Bundle	EasySlide 2020 + Protective cover 2051

SystemRoMedic™

Simple solutions for great results

SystemRoMedic™ is the name of Handicare's unique easy transfer concept, the market's widest and most comprehensive range of clever, easy-to-use and safe transfer and lifting aids designed to make life easier, both for the user and for the caregiver. SystemRoMedic™ is a complete solution that provides for the majority of patient transfer or manual handling requirements. From the simplest to the most complex scenarios, from the lightest to the heaviest. The concept encompasses assistive devices for four different categories of transfers:

- Transfer, assistive devices for manual transfers of users between two locations.
- Positioning, assistive devices for manual repositioning of users within the same location.
- Support, assistive devices for mobility support e.g., during sit-to-stand or gait training.
- Lifting, assistive devices for manual and mechanical lifting of users.

Improved work environment, improved quality of care and cost savings

The philosophy behind SystemRoMedic™ is focused on the prevention and reduction of occupational injuries while allowing users to experience a greater sense of independence and dignity. Through a unique combination of training and a complete range of efficient transfer aids, SystemRoMedic™ offers improvement of both work environment and quality of care and, at the same time, achieves significant cost savings.

Always make sure that you have the correct version of the manual

The most recent version of all manuals are available for downloading at/from our website; www.handicare.com.

For questions about the product and its use

Please contact your local Handicare and SystemRoMedic™ representative. A complete list of all our partners with their contact details can be found on our website; www.handicare.com.

Handicare offers solutions and support to increase the independence of disabled or elderly people as well as to improve the convenience of those who are caring for them.

The Handicare Group is one of the leading healthcare companies in Europe with its own manufacturing organizations and sales companies in Norway, Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, Great Britain, France, China, Canada and the USA. Handicare's products are also distributed by partners in more than 40 countries worldwide. Our wide range of high-quality products includes various manual and power wheelchairs, seating systems, scooters, a complete easy transfer system and other patient handling aids, stairlifts, car adaptations, rise and recline chairs, and bathing and toileting products.

MediCauce

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España
T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

Handicare AB is quality and environmentcertified in accordance with ISO 9001, ISO14001 and ISO 3485.