
FlexiMove


SystemRoMedic™

Manual de usuario – Español

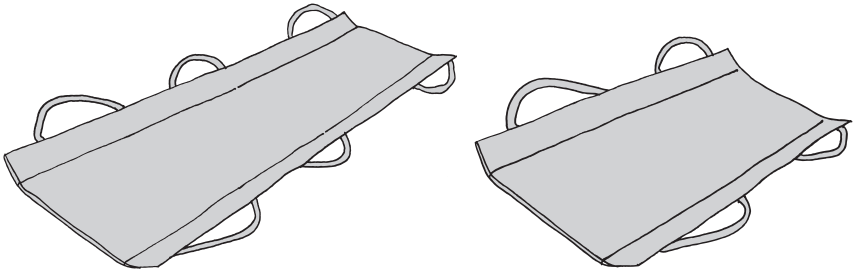

REF

4011
4012
4016

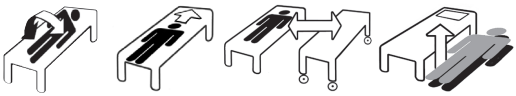

SWL: 150 kg/330 lbs

handicare

Manual no: 805 ver. 11 150806

FlexiMove se emplea en distintas situaciones de traslado y recolocación, como, por ejemplo, giros en la cama, recolocación hacia arriba en la cama, traslados cama a cama/cama a carro de ducha y alzamientos desde el suelo. FlexiMove incluye cuatro o seis asas. La elección dependerá de las necesidades de apoyo del usario y del número de asistentes que se requieran.


Inspección operacional

Inspección visual

Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia. Examine siempre el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no presenten desperfecto alguno. Asegúrese de que el tejido no esté desgastado o desteñido. Si hay indicios de desgaste, el producto deberá ser desechado.

Prueba de fuerza


Haga fuerza sobre las hebillas y las asas y compruebe que soportan cargas pesadas.

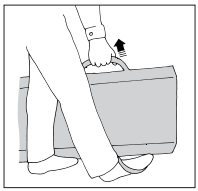

Lea siempre el manual


Lea siempre los manuales de todos los dispositivos de asistencia empleados en los traslados.
Guarde el manual en un lugar accesible a los usuarios del producto.
Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual.
Podrá descargar las ediciones más recientes de los manuales en nuestro sitio web: www.handicare.com.

Colocación del FlexiMove

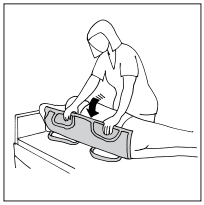


Tras girar al usario sobre un costado, se inserta el FlexiMove con las asas plegadas bajo la deslizadera. A continuación, se gira al usario sobre la espalda y se extraen las asas.

Giros en la cama

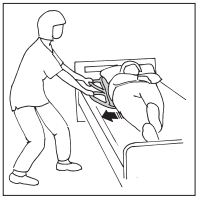


Utilice luego las asas para acercar al usario al borde de la cama. Intervenga en posición erguida, con las rodillas ligeramente dobladas y los brazos y espalda rectos.

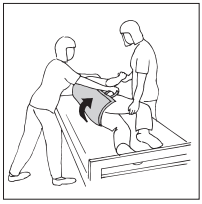

Pliegue las asas y gire luego al usario en dirección opuesta, donde un asistente proporcionará apoyo a este. Si opera en solitario, levante los rieles de la cama. Gire al usario utilizando las piernas y empujando al mismo en dirección contraria usted.

Recolocación hacia arriba en la cama

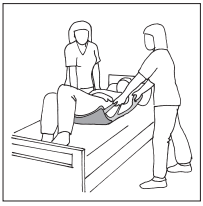

Se situará un asistente a cada lado de la cama. La recolocación resultará más fácil si el usario puede doblar las rodillas para alzarse en la cama. Intervenga en posición erguida, con los brazos y la espalda rectos. Los asistentes deben coordinar sus esfuerzos para agilizar el traslado.


Cama a cama/cama a carro de ducha



Los asistentes deberán operar en parejas (o más), en función de las necesidades del usario. Sitúe las camas lo más cerca posible. Coloque encima primero los pies y ayúdense luego mutuamente para subir al usario a la cama/carro de ducha.

Alzamiento desde el suelo

¡ATENCIÓN!
Siempre que sea posible, deberá utilizarse una grúa mecánica. En las elevaciones manuales, nunca levante más de lo adecuado. Los asistentes deberán operar en parejas (o más), en función de las necesidades del usario. Planifique el traslado para una mínima duración, elevación y distancia.

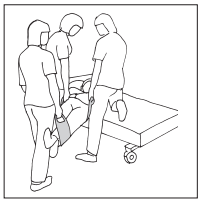

Material

Poliamida, nailon

Cuidado del producto

Consulte la etiqueta del producto.



Limpieza: Extraiga la deslizadera y el almohadillado y, a continuación, limpie las superficies con desinfectante. No use detergente/suavizante y evite el secado para una vida útil óptima.

CE Clase de producto sanitario I

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso. Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

Vida útil estimada

Hasta 10 años de uso normal.

Product information

Art. no	Productname	Size	Description
4011	FlexiMove	1020 x 430 mm /40.1 x 16.9 inch	4 Handles
4012	FlexiMove	1120 x 530 mm / 44 x 20.8 inch	4 Handles
4016	FlexiMove	1520 x 530 mm / 59.8 x 20.8 inch	6 Handles

SystemRoMedic™

Simple solutions for great results

SystemRoMedic™ is the name of Handicare's unique easy transfer concept, the market's widest and most comprehensive range of clever, easy-to-use and safe transfer and lifting aids designed to make life easier, both for the user and for the caregiver. SystemRoMedic™ is a complete solution that provides for the majority of patient transfer or manual handling requirements. From the simplest to the most complex scenarios, from the lightest to the heaviest. The concept encompasses assistive devices for four different categories of transfers:

- Transfer, assistive devices for manual transfers of users between two locations.
- Positioning, assistive devices for manual repositioning of users within the same location.
- Support, assistive devices for mobility support e.g., during sit-to-stand or gait training.
- Lifting, assistive devices for manual and mechanical lifting of users.

Improved work environment, improved quality of care and cost savings

The philosophy behind SystemRoMedic™ is focused on the prevention and reduction of occupational injuries while allowing users to experience a greater sense of independence and dignity. Through a unique combination of training and a complete range of efficient transfer aids, SystemRoMedic™ offers improvement of both work environment and quality of care and, at the same time, achieves significant cost savings.

Always make sure that you have the correct version of the manual

The most recent version of all manuals are available for downloading at/from our website; www.handicare.com.

For questions about the product and its use

Please contact your local Handicare and SystemRoMedic™ representative. A complete list of all our partners with their contact details can be found on our website; www.handicare.com.

Handicare offers solutions and support to increase the independence of disabled or elderly people as well as to improve the convenience of those who are caring for them.

The Handicare Group is one of the leading healthcare companies in Europe with its own manufacturing organizations and sales companies in Norway, Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, Great Britain, France, China, Canada and the USA. Handicare's products are also distributed by partners in more than 40 countries worldwide. Our wide range of high-quality products includes various manual and power wheelchairs, seating systems, scooters, a complete easy transfer system and other patient handling aids, stairlifts, car adaptations, rise and recline chairs, and bathing and toileting products.

MediCauce

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España
T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

Handicare AB is quality and environmentcertified in accordance with ISO 9001, ISO14001 and ISO 3485.