
FootStool

SystemRoMedic™

Manual de usuario – Español



REF
8090
8095

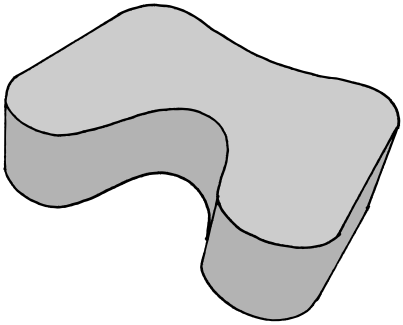

SWL: 200 kg/440 lbs

handicare

Manual no: 831 ver. 11 150811

FootStool

SystemRoMedic™

Español

El FootStool se usa para alzar las rodillas y lograr así un traslado más seguro y sencillo entre la cama y la silla de ruedas en posición sentada. El FootStool ofrece también un apoyo adecuado bajo los pies durante las visitas al aseo y al recolocar hacia atrás en una silla. El FootStool está fabricado en un material de celdas cerradas, lo que facilita su limpieza.

Inspección operacional


Inspección visual

Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia.

Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales de todos los dispositivos de asistencia empleados en los traslados. Guarde el manual en un lugar accesible a los usuarios del producto. Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual. Podrá descargar las ediciones más recientes de los manuales en nuestro sitio web: www.handicare.com.


Colocación del FootStool

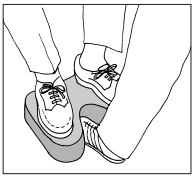

Sitúe el FootStool bajo los pies del usario con este sentado en el inodoro o en una silla de ruedas. El FootStool presenta un hueco en la parte delantera para que el asistente pueda colocar un pie lo más cerca posible de la banqueta. El dorso contiene también un pequeño hueco para facilitar una posición ajustada al inodoro.

Uso del FootStool

El FootStool sirve de complemento de otros dispositivos de asistencia, tales como EasyBelt/FlexiBelt, EasyGlide y SitWalk, para facilitar el traslado entre dos ubicaciones o para recolocar, por ejemplo, más atrás en una silla. Al alzar las rodillas se levantan también ligeramente los muslos, lo que disminuye la fricción y simplifica el traslado.

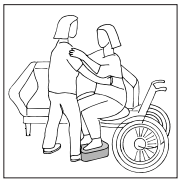





Material

Polietileno

Cuidado del producto

La superficie del producto se puede limpiar con agua caliente o con una solución de jabón. Si es necesaria la desinfección, se debería utilizar etanol al 70 %, isopropanol al 45 % o similar.

¡Atención! No someta el producto a fuertes presiones ni impactos. Ello podría producir mellas en el material.

CE Clase de producto sanitario I

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso. Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

Vida útil estimada

Hasta 10 años de uso normal.

Product information

Art. no	Productname	Size	Description
8090	FootStool	320 x 380 x 100 mm / 12.5 x 14.9 x 3.9”	
8095	FootStool	320 x 380 x 50 mm / 12.5 x 14.9 x 1.9”	

SystemRoMedic™

Simple solutions for great results

SystemRoMedic™ is the name of Handicare's unique easy transfer concept, the market's widest and most comprehensive range of clever, easy-to-use and safe transfer and lifting aids designed to make life easier, both for the user and for the caregiver. SystemRoMedic™ is a complete solution that provides for the majority of patient transfer or manual handling requirements. From the simplest to the most complex scenarios, from the lightest to the heaviest. The concept encompasses assistive devices for four different categories of transfers:

- Transfer, assistive devices for manual transfers of users between two locations.
- Positioning, assistive devices for manual repositioning of users within the same location.
- Support, assistive devices for mobility support e.g., during sit-to-stand or gait training.
- Lifting, assistive devices for manual and mechanical lifting of users.

Improved work environment, improved quality of care and cost savings

The philosophy behind SystemRoMedic™ is focused on the prevention and reduction of occupational injuries while allowing users to experience a greater sense of independence and dignity. Through a unique combination of training and a complete range of efficient transfer aids, SystemRoMedic™ offers improvement of both work environment and quality of care and, at the same time, achieves significant cost savings.

Always make sure that you have the correct version of the manual

The most recent version of all manuals are available for downloading at/from our website; www.handicare.com.

For questions about the product and its use

Please contact your local Handicare and SystemRoMedic™ representative. A complete list of all our partners with their contact details can be found on our website; www.handicare.com.

Handicare offers solutions and support to increase the independence of disabled or elderly people as well as to improve the convenience of those who are caring for them.

The Handicare Group is one of the leading healthcare companies in Europe with its own manufacturing organizations and sales companies in Norway, Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, Great Britain, France, China, Canada and the USA. Handicare's products are also distributed by partners in more than 40 countries worldwide. Our wide range of high-quality products includes various manual and power wheelchairs, seating systems, scooters, a complete easy transfer system and other patient handling aids, stairlifts, car adaptations, rise and recline chairs, and bathing and toileting products.

MediCauce

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España
T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

Handicare AB is quality and environmentcertified in accordance with ISO 9001, ISO14001 and ISO 3485.