IncoSheet


SystemRoMedic™

Manual de usuario – Español



REF

1530
1531
1532
1533

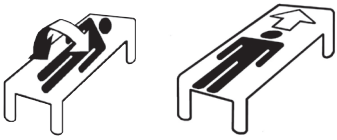

SWL: 300 kg/660 lbs

handicare

Manual no: 841 ver. 11 150803

Size

Art no.	Productname	Size mm/inch	Description
1530	IncoSheet	750 x 900/ 29.5 x 35.4	
1531	IncoSheet	750 x 2000/ 29.5 x 78.7	With fabric on both sides
1532	IncoSheet	750 x 1500/ 29.5 x 59	
1533	IncoSheet	400 x 830/ 15.7 x 32.6	

IncoSheet

SystemRoMedic™

Español

IncoSheet es una barrera de incontinencia lavable que puede utilizarse en la cama o en la almohadilla del asiento de la silla de ruedas. Está fabricado en un material de gran absorción que distribuye el líquido sobre una amplia área.
El tejido de la parte superior del producto permite ofrecer una superficie seca y cómoda. Por su parte, el tejido áspero de la cara inferior ofrece un alto nivel de fricción que ayuda a sujetar la sábana en la cama.

Inspección operacional

Inspección visual

Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia. Examine siempre el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no presenten desperfecto alguno. Asegúrese de que el tejido no esté desgastado o desteñido. Si hay indicios de desgaste, el producto deberá ser desechado.




Prueba de fricción

Baja fricción - ¿la superficie es lisa y se desliza con la misma facilidad que antes? ¡Compárelo con un nuevo producto!

Lea siempre el manual


Lea siempre los manuales de todos los dispositivos de asistencia empleados en los traslados.
Guarde el manual en un lugar accesible a los usuarios del producto.
Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual.
Podrá descargar las ediciones más recientes de los manuales en nuestro sitio web: www.handicare.com.

Colocación

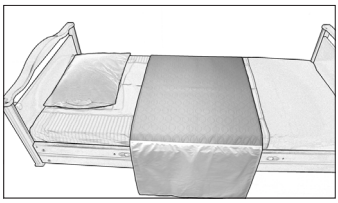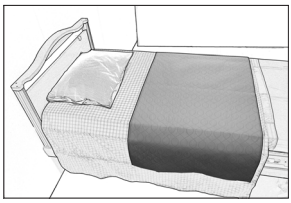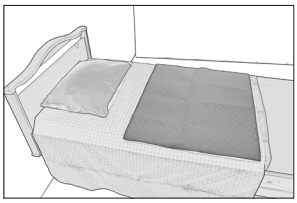
Sitúe el IncoSheet en la cama con el lado acolchado más ligero hacia arriba.

El IncoSheet con la barrera de incontinencia más larga ha sido concebido principalmente para usarios que precisan de ayuda en los giros. Este modelo de tamaño puede situarse encima del dispositivo de asistencia de traslado, ya que incorpora una barrera de incontinencia extralarga que sigue brindando protección también tras el giro.

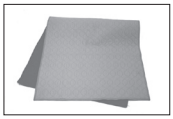

750 x 1500 mm/
29.5 x 59”

Las dos barreras de incontinencia más cortas han sido concebidas principalmente para usarios capaces de girarse por sí solos, aunque también pueden utilizarse si el usario precisa de asistencia en los giros, en cuyo caso se colocará encima un dispositivo de asistencia de traslado. Al situar dicho dispositivo sobre el IncoSheet, este último mantendrá su posición bajo el usario a lo largo del giro y después del mismo, por lo que seguirá proporcionando protección contra la incontinencia.

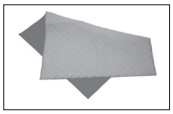


750 x 900 mm/
29.5 x 35.4”



750 x 2000 mm/
29.5 x 78.7”

El modelo de pequeño tamaño, IncoSheet 400 x 830, puede situarse en una silla de ruedas para la protección de la almohadilla del asiento.

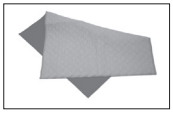

400 x 830 mm/
15.7 x 32.6”

Material

Poliéster, algodón

Cuidado del producto

Consulte la etiqueta del producto.

60-80° C
140-176° F

No use detergente/suavizante y evite el secado para una vida útil óptima.

CE Clase de producto sanitario I

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso. Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

Vida útil estimada

Hasta 10 años de uso normal.

SystemRoMedic™

Simple solutions for great results

SystemRoMedic™ is the name of Handicare's unique easy transfer concept, the market's widest and most comprehensive range of clever, easy-to-use and safe transfer and lifting aids designed to make life easier, both for the user and for the caregiver. SystemRoMedic™ is a complete solution that provides for the majority of patient transfer or manual handling requirements. From the simplest to the most complex scenarios, from the lightest to the heaviest. The concept encompasses assistive devices for four different categories of transfers:

- Transfer, assistive devices for manual transfers of users between two locations.
- Positioning, assistive devices for manual repositioning of users within the same location.
- Support, assistive devices for mobility support e.g., during sit-to-stand or gait training.
- Lifting, assistive devices for manual and mechanical lifting of users.

Improved work environment, improved quality of care and cost savings

The philosophy behind SystemRoMedic™ is focused on the prevention and reduction of occupational injuries while allowing users to experience a greater sense of independence and dignity. Through a unique combination of training and a complete range of efficient transfer aids, SystemRoMedic™ offers improvement of both work environment and quality of care and, at the same time, achieves significant cost savings.

Always make sure that you have the correct version of the manual

The most recent version of all manuals are available for downloading at/from our website; www.handicare.com.

For questions about the product and its use

Please contact your local Handicare and SystemRoMedic™ representative. A complete list of all our partners with their contact details can be found on our website; www.handicare.com.

Handicare offers solutions and support to increase the independence of disabled or elderly people as well as to improve the convenience of those who are caring for them.

The Handicare Group is one of the leading healthcare companies in Europe with its own manufacturing organizations and sales companies in Norway, Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, Great Britain, France, China, Canada and the USA. Handicare's products are also distributed by partners in more than 40 countries worldwide. Our wide range of high-quality products includes various manual and power wheelchairs, seating systems, scooters, a complete easy transfer system and other patient handling aids, stairlifts, car adaptations, rise and recline chairs, and bathing and toileting products.

MediCauce

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España
T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

Handicare AB is quality and environmentcertified in accordance with ISO 9001, ISO14001 and ISO 3485.