

MobiStol

SystemRoMedic™

Manual de usuario – Español

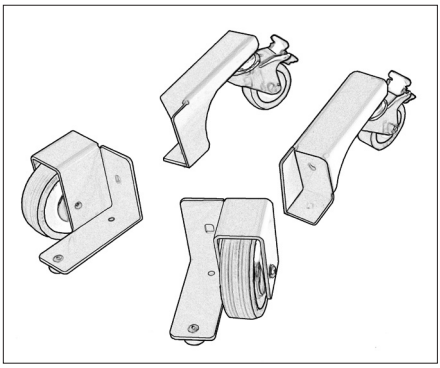

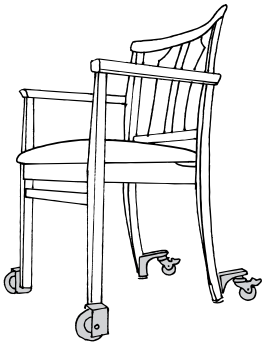

REF
7030

Max: 120 kg/264 lbs

handicare

Manual no: 129 ver. 11 150820

MobiStol

SystemRoMedic™

Español

MobiStol se monta sobre una silla para dotar a esta de movilidad. La silla podrá utilizarse entonces para traslados cortos en recintos cerrados, por ejemplo, en el acceso y salida de una mesa.

Inspección operacional


Inspección visual

Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia. Examine siempre el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no presenten desperfecto alguno. Asegúrese de que el tejido no esté desgastado o desteñido. Si hay indicios de desgaste, el producto deberá ser desechado.

Lea siempre el manual


Lea siempre los manuales de todos los dispositivos de asistencia empleados en los traslados.
Guarde el manual en un lugar accesible a los usuarios del producto.
Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual.
Podrá descargar las ediciones más recientes de los manuales en nuestro sitio web: www.handicare.com.

Instrucciones de montaje

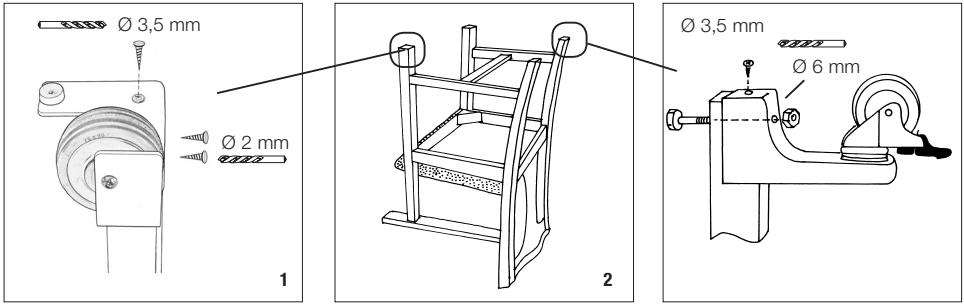


Las ruedas se ajustan a la mayoría de las sillas con patas cuadradas o rectangulares de madera dura, por ejemplo, haya, roble o abedul, de un mínimo de 3x3 cm.
Coloque la silla boca abajo y sujete las monturas metálicas de las ruedas contra las patas de la silla, según se muestra en las ilustraciones 1 y 2. Marque la posición de los orificios de tornillo.
Practique orificios de unos 2 cm de profundidad para los tornillos de madera y rectos a través de las patas traseras para los pernos.
¡ATENCIÓN! Las ruedas delanteras deben montarse en el exterior de las patas, mientras que las monturas metálicas de las ruedas traseras han de situarse en la parte interior y trasera.
¡ATENCIÓN! Realice los orificios para los pernos desde la parte trasera a la delantera.
¡ATENCIÓN! Compruebe los tornillos y vuelva a apretarlos transcurridos unos días.


Montaje de ruedas en las patas traseras con ángulos diferentes

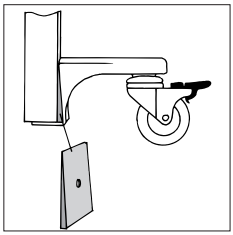

Si las patas traseras de la silla no están inclinadas deberán utilizarse cuñas de plástico.

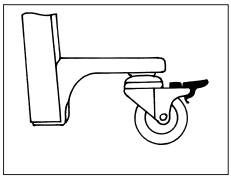

Si las patas traseras de la silla están ligeramente inclinadas no se utilizarán cuñas de plástico.

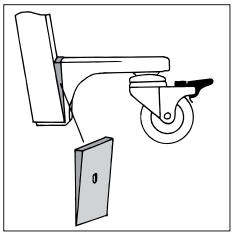


Si las patas traseras de la silla están muy inclinadas deberán utilizarse cuñas de plástico.

Traslados



Antes de que el paciente se siente en la silla o se levante de esta, compruébela siempre y asegúrese de que las ruedas estén bloqueadas. Las ruedas deberán estar bloqueadas si se deja al paciente sentado en la silla.

Bloqueo de las ruedas traseras

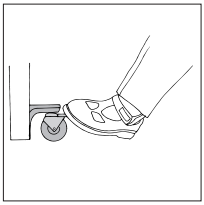

Bloquee las ruedas traseras pisando la pequeña placa metálica. Libere el freno de ruedas alzando el pie de la placa.

Cuidado del producto

Limpie periódicamente las ruedas para mantenerlas libres de polvo, suciedad y pelos.

CE Clase de producto sanitario I

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso. Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

Vida útil estimada

Hasta 10 años de uso normal.

SystemRoMedic™

Simple solutions for great results

SystemRoMedic™ is the name of Handicare's unique easy transfer concept, the market's widest and most comprehensive range of clever, easy-to-use and safe transfer and lifting aids designed to make life easier, both for the user and for the caregiver. SystemRoMedic™ is a complete solution that provides for the majority of patient transfer or manual handling requirements. From the simplest to the most complex scenarios, from the lightest to the heaviest. The concept encompasses assistive devices for four different categories of transfers:

- Transfer, assistive devices for manual transfers of users between two locations.
- Positioning, assistive devices for manual repositioning of users within the same location.
- Support, assistive devices for mobility support e.g., during sit-to-stand or gait training.
- Lifting, assistive devices for manual and mechanical lifting of users.

Improved work environment, improved quality of care and cost savings

The philosophy behind SystemRoMedic™ is focused on the prevention and reduction of occupational injuries while allowing users to experience a greater sense of independence and dignity. Through a unique combination of training and a complete range of efficient transfer aids, SystemRoMedic™ offers improvement of both work environment and quality of care and, at the same time, achieves significant cost savings.

Always make sure that you have the correct version of the manual

The most recent version of all manuals are available for downloading at/from our website; www.handicare.com.

For questions about the product and its use

Please contact your local Handicare and SystemRoMedic™ representative. A complete list of all our partners with their contact details can be found on our website; www.handicare.com.

Handicare offers solutions and support to increase the independence of disabled or elderly people as well as to improve the convenience of those who are caring for them.

The Handicare Group is one of the leading healthcare companies in Europe with its own manufacturing organizations and sales companies in Norway, Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, Great Britain, France, China, Canada and the USA. Handicare's products are also distributed by partners in more than 40 countries worldwide. Our wide range of high-quality products includes various manual and power wheelchairs, seating systems, scooters, a complete easy transfer system and other patient handling aids, stairlifts, car adaptations, rise and recline chairs, and bathing and toileting products.

MediCauce

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España
T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

Handicare AB is quality and environmentcertified in accordance with ISO 9001, ISO14001 and ISO 3485.