

PositioningCover

SystemRoMedic™

Manual de usuario – Español

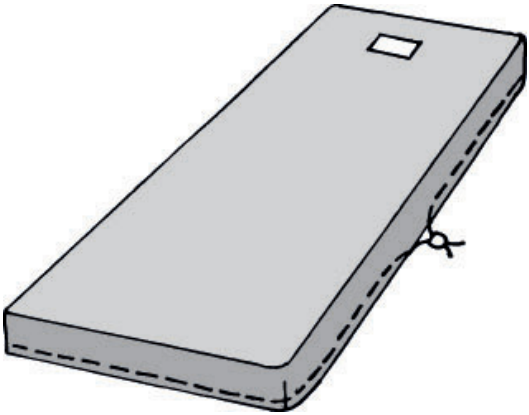

REF
1596

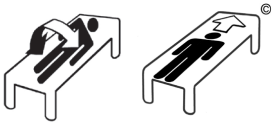

SWL: 300 kg/660 lbs

handicare

Manual no: 838 Ver. 11 150805

PositioningCover

SystemRoMedic™

Español

El PositioningCover es un cobertor de colchón que se utiliza bajo una sábana convencional para la colocación en la cama. El PositioningCover puede usarse con todo tipo de colchones y situaciones que impliquen requisitos especiales de movilidad del usuario en la cama, por ejemplo, con usuarios en unidades de cuidados intensivos.

Inspección operacional

Inspección visual


Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia. Examine siempre el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no presenten desperfecto alguno. Asegúrese de que el tejido no esté desgastado o desteñido. Si hay indicios de desgaste, el producto deberá ser desechado.

Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales de todos los dispositivos de asistencia empleados en los traslados.
Guarde el manual en un lugar accesible a los usuarios del producto.
Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual.
Podrá descargar las ediciones más recientes de los manuales en nuestro sitio web: www.handicare.com.


Informazioni importanti

Nunca deje desatendido al usuario, ya que el cobertor de colchón es muy resbaladizo. Utilice rieles de cama, puesto que existe el riesgo de que el usuario se resbale de esta. No deje que el usuario se incorpore en la cama sin ayuda.

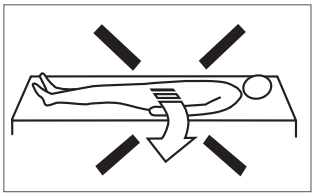

Colocación


Sitúe el cobertor del colchón sobre este último con la cara deslizante hacia arriba, como se indica en la etiqueta del producto. Coloque una sábana extra ancha (o bien dos sábanas cruzadas) sobre el cobertor del colchón.

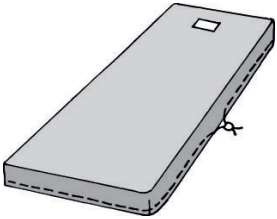

Giros


Lleve al usuario a un lado de la cama antes de efectuar el giro. Tenga cuidado de no desplazar al usuario demasiado cerca/más allá del borde del colchón. Gire al usuario sobre un costado con ayuda de la sábana. Impida cualquier resbalamiento accidental remetiendo bien la sábana por debajo del colchón.



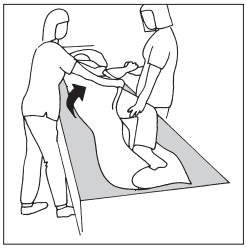

Más arriba

Suba al usuario tirando de la sábana (ver imagen). Si el usuario pesa mucho puede colocarse también una sábana de deslizamiento debajo del mismo.

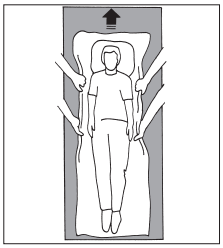

Material

Poliamida

Ultra Low ULF Friction

Cuidado del producto

Consulte la etiqueta del producto.



No use detergente/suavizante y evite el secado para una vida útil óptima.

CE Clase de producto sanitario I

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso. Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

Vida útil estimada

Hasta 10 años de uso normal.

SystemRoMedic™

Simple solutions for great results

SystemRoMedic™ is the name of Handicare's unique easy transfer concept, the market's widest and most comprehensive range of clever, easy-to-use and safe transfer and lifting aids designed to make life easier, both for the user and for the caregiver. SystemRoMedic™ is a complete solution that provides for the majority of patient transfer or manual handling requirements. From the simplest to the most complex scenarios, from the lightest to the heaviest. The concept encompasses assistive devices for four different categories of transfers:

- Transfer, assistive devices for manual transfers of users between two locations.
- Positioning, assistive devices for manual repositioning of users within the same location.
- Support, assistive devices for mobility support e.g., during sit-to-stand or gait training.
- Lifting, assistive devices for manual and mechanical lifting of users.

Improved work environment, improved quality of care and cost savings

The philosophy behind SystemRoMedic™ is focused on the prevention and reduction of occupational injuries while allowing users to experience a greater sense of independence and dignity. Through a unique combination of training and a complete range of efficient transfer aids, SystemRoMedic™ offers improvement of both work environment and quality of care and, at the same time, achieves significant cost savings.

Always make sure that you have the correct version of the manual

The most recent version of all manuals are available for downloading at/from our website; www.handicare.com.

For questions about the product and its use

Please contact your local Handicare and SystemRoMedic™ representative. A complete list of all our partners with their contact details can be found on our website; www.handicare.com.

Handicare offers solutions and support to increase the independence of disabled or elderly people as well as to improve the convenience of those who are caring for them.

The Handicare Group is one of the leading healthcare companies in Europe with its own manufacturing organizations and sales companies in Norway, Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, Great Britain, France, China, Canada and the USA. Handicare's products are also distributed by partners in more than 40 countries worldwide. Our wide range of high-quality products includes various manual and power wheelchairs, seating systems, scooters, a complete easy transfer system and other patient handling aids, stairlifts, car adaptations, rise and recline chairs, and bathing and toileting products.

MediCauce

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España
T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

Handicare AB is quality and environmentcertified in accordance with ISO 9001, ISO14001 and ISO 3485.