

# SupportStraps

SystemRoMedic™

Manual de usuario – Español

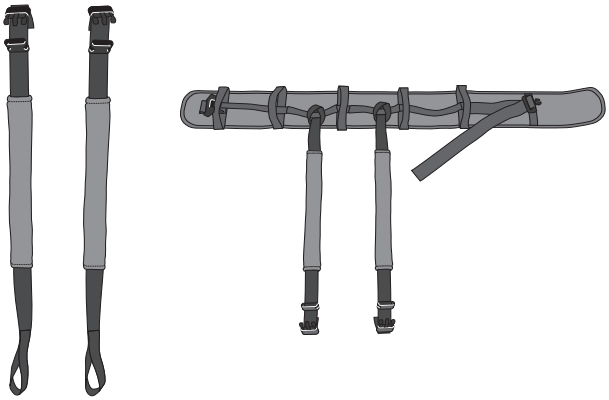

REF
6061

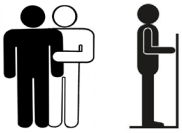

**SWL: 150 kg/330 lbs**
**(2x 75 kg/163 lbs)**

handicare

**Manual no: 786 ver. 11 150810**

# SupportStraps

SystemRoMedic™

Español

Las SupportStraps han sido desarrolladas como accesorio para uso conjunto con EasyBelt, FlexiBelt, ReadyBelt, ReTurnBelt y FlexiMove. Las SupportStraps ofrecen tres áreas de aplicación:

- Arnés de piernas para EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt
- Soporte de torso/lateral en el uso de QuickMove junto con EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt o FlexiMove
- Soporte lateral en el uso de ReTurn junto con ReTurnBelt.

Las SupportStraps constan de dos correas independientes, cada una de ellas con un lazo en un extremo y un cierre de plástico en el otro. Incluyen una funda almohadillada extraíble que descarga la presión al utilizar la correa como arnés de piernas.

## Inspección operacional

**Inspección visual**

Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia. Examine siempre el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no presenten desperfecto alguno. Asegúrese de que el tejido no esté desgastado o desteñido. Si hay indicios de desgaste, el producto deberá ser desechado.

**Prueba de fuerza**

Haga fuerza sobre las hebillas y las asas y compruebe que soportan cargas pesadas.



## Lea siempre el manual


Lea siempre los manuales de todos los dispositivos de asistencia empleados en los traslados.
Guarde el manual en un lugar accesible a los usuarios del producto.
Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual.
Podrá descargar las ediciones más recientes de los manuales en nuestro sitio web: www.handicare.com.

## Antes de su uso


- Lea y aplique siempre las instrucciones del manual del producto con el que va a utilizar las SupportStraps.
- Planifique el alzamiento y determine el número de asistentes necesarios para garantizar la seguridad.
- Realice siempre un montaje de prueba.
- No deje al usario desatendido durante una operación de alzamiento.

## Uso de las SupportStraps como arnés de piernas con EasyBelt/Flexi


**Lea y aplique las instrucciones del manual del cinturón.**

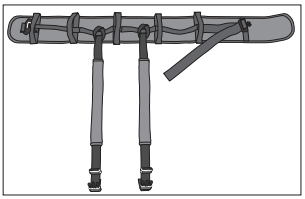


Las SupportStraps deben sujetarse en el asa correspondiente del dorso del cinturón, de forma que las correas queden situadas por detrás de las caderas del usario.

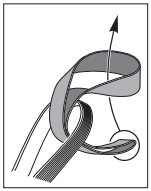

Sujete cada SupportStrap al cinturón insertando la correa por el orificio y luego a través de sí misma para formar un lazo.

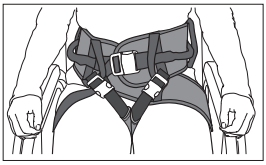

Tire de las correas hasta situarlas entre las piernas del usario y, seguidamente, fije los cierres en las asas correspondientes de la parte delantera del cinturón.

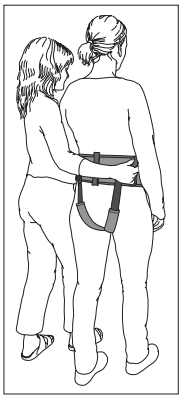


Las correas hacen ahora las veces de arnés de piernas, impidiendo que el cinturón se deslice hacia arriba durante los traslados/entrenamiento de la marcha.


Ajuste las correas y el cinturón para el adecuado acomodo del arnés de piernas. Se puede mejorar la colocación de las asas utilizando una talla diferente.

## Uso como soporte lateral con ReTurn7500/7400

**Consulte los manuales de ReTurn y ReTurnBelt.**

Retire las fundas almohadilladas de las SupportStraps.

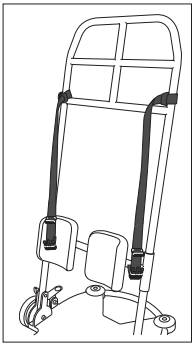

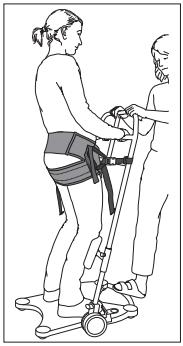


Fije las SupportStraps a ReTurn. Ajuste los lazos a los postes verticales exteriores de la escalera.

Fije las SupportStraps a las asas correspondientes de cada lado del ReTurnBelt una vez que el usario se haya puesto en pie.

Ajuste la longitud de las correas. Estas deben permanecer siempre extendidas, con una tensión suficiente para brindar un óptimo sustento.

## Uso como soporte de torso/lateral con QuickMove


**Lea y aplique las instrucciones del manual del QuickMove.**
Retire las fundas almohadilladas de las SupportStraps.

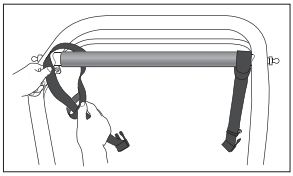

**EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt:**
Fije las SupportStraps alrededor de las asas del QuickMove (recomendado), o bien en las asas correspondientes de los lados/hacia el dorso del cinturón.

Una vez que se ha levantado al usario en el QuickMove y reposa sobre el asiento, las correas deben fijarse en las asas correspondientes de los lados/hacia el dorso del cinturón, o bien en las asas del QuickMove.


Ajuste la longitud de las correas. Estas deben permanecer siempre extendidas, con una tensión suficiente para brindar un óptimo sustento.

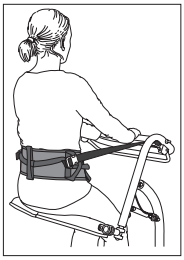

**Con EasyBelt/FlexiBelt**

**FlexiMove:**
Sujete las SupportStraps alrededor de las asas del QuickMove. A continuación, fije una correa alrededor del asa del FlexiMove. Una vez que se ha levantado al usario y reposa sobre el asiento, deberá colocarse el FlexiMove en torno a la espalda del usario y fijarse la otra correa en el lateral del FlexiMove.

Ajuste la longitud de las correas. Estas deben permanecer siempre extendidas, con una tensión suficiente para brindar un óptimo sustento.

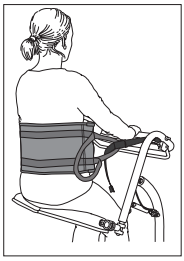

**Con FlexiMove**

## Material
Poliéster

## Cuidado del producto
Consulte la etiqueta del producto.




No use detergente/suavizante y evite el secado para una vida útil óptima.

CE Clase de producto sanitario I


Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso. Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

## Vida útil estimada
Hasta 10 años de uso normal.

## Product information

| Art. no | Productname | Size | Description |
|---|---|---|---|
| 6061 | SupportStraps | 950 mm/37.4” | |

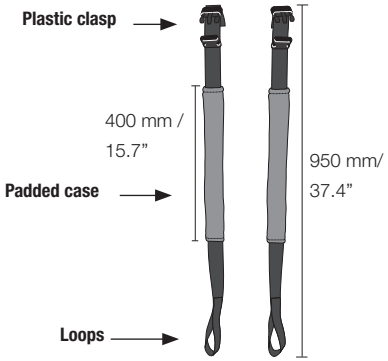

# SystemRoMedic™

## Simple solutions for great results

SystemRoMedic™ is the name of Handicare's unique easy transfer concept, the market's widest and most comprehensive range of clever, easy-to-use and safe transfer and lifting aids designed to make life easier, both for the user and for the caregiver. SystemRoMedic™ is a complete solution that provides for the majority of patient transfer or manual handling requirements. From the simplest to the most complex scenarios, from the lightest to the heaviest. The concept encompasses assistive devices for four different categories of transfers:

- Transfer, assistive devices for manual transfers of users between two locations.
- Positioning, assistive devices for manual repositioning of users within the same location.
- Support, assistive devices for mobility support e.g., during sit-to-stand or gait training.
- Lifting, assistive devices for manual and mechanical lifting of users.

**Improved work environment, improved quality of care and cost savings**

The philosophy behind SystemRoMedic™ is focused on the prevention and reduction of occupational injuries while allowing users to experience a greater sense of independence and dignity. Through a unique combination of training and a complete range of efficient transfer aids, SystemRoMedic™ offers improvement of both work environment and quality of care and, at the same time, achieves significant cost savings.

## Always make sure that you have the correct version of the manual

The most recent version of all manuals are available for downloading at/from our website; www.handicare.com.

## For questions about the product and its use

Please contact your local Handicare and SystemRoMedic™ representative. A complete list of all our partners with their contact details can be found on our website; www.handicare.com.

***Handicare offers solutions and support to increase the independence of disabled or elderly people as well as to improve the convenience of those who are caring for them.***

*The Handicare Group is one of the leading healthcare companies in Europe with its own manufacturing organizations and sales companies in Norway, Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, Great Britain, France, China, Canada and the USA. Handicare's products are also distributed by partners in more than 40 countries worldwide. Our wide range of high-quality products includes various manual and power wheelchairs, seating systems, scooters, a complete easy transfer system and other patient handling aids, stairlifts, car adaptations, rise and recline chairs, and bathing and toileting products.*

MediCauce

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España
T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

Handicare AB is quality and environmentcertified in accordance with ISO 9001, ISO14001 and ISO 3485.