
TurnSheet

SystemRoMedic™

Manual – Español



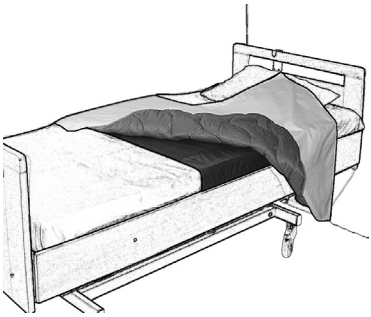

REF

2060
2080
2081



SWL: 300 kg/660 lbs

handicare

Manual no: 814 ver. 10 140506

TurnSheet
SystemRoMedic™

Español

El TurnSheet se coloca en la cama e incorpora un material antifricción que facilita tanto al paciente como al asistente los giros y la recolocación hacia arriba en la cama. El TurnSheet se compone de dos secciones: un cobertor de colchón y un cobertor de giro. El cobertor de colchón se sitúa alrededor del colchón y el cobertor de giro encima del otro. El cobertor de colchón incluye una sección intermedia con material antifricción. Los laterales presentan material de fricción, que evita los resbalamientos.

SystemRoMedic es una serie de modelos distintos de dispositivos de asistencia para traslados. La elección del dispositivo de asistencia dependerá de la operación de traslado y de las capacidades funcionales y necesidades del paciente.


Inspección operacional


Inspección visual

Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia. Examine siempre el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no presenten desperfecto alguno. Asegúrese de que el tejido no esté desgastado o desteñido. Si hay indicios de desgaste, el producto deberá ser desechado.

Inspección operacional

Pruebe la función deslizante de Turn Sheet enrollándolo y verificando su facilidad de deslizamiento. A ser posible, compare con un producto nuevo.
Compruebe también del mismo modo el material de fricción. Asegúrese de que la superficie sea áspera y que siga generando fricción.

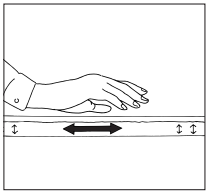

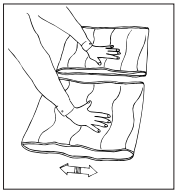


¡Atención!




Tenga en cuenta que existe el riesgo de que el paciente se resbale de la cama. Asegúrese de que el colchón es lo suficientemente ancho para disponer de material antideslizante sobre ambos bordes del cobertor del colchón.

Colocación

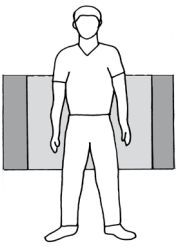

El cobertor del colchón se sitúa con la superficie deslizante en el centro de la cama y las superficies ásperas de fricción distribuidas uniformemente a ambos lados. El cobertor de colchón se fija con ayuda de cintas de velcro alrededor del colchón.

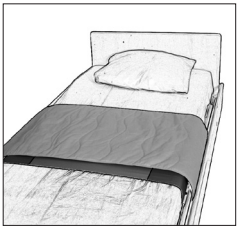

El cobertor de giro se coloca sobre el cobertor del colchón. También puede disponerse una sábana de tracción encima del cobertor de giro.


Uso del TurnSheet



El paciente podrá utilizar por sí solo el TurnSheet si es capaz de girarse con solo cierta ayuda del asistente.



El TurnSheet se desliza fácilmente, simplificando así los giros al asistente. No olvide trabajar en posición erguida con las rodillas dobladas y los brazos rectos, así como bascular el peso.

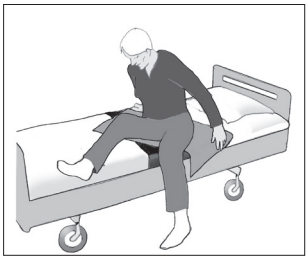

El TurnSheet puede utilizarse también para ayudar al paciente a incorporarse en posición sentada en el borde de la cama. El paciente puede girarse sencillamente a un lado y levantar los pies por encima del borde de la cama.

Material:
Poliamida, poliéster, microfibra

Cuidado del producto:
Consulte la etiqueta del producto.



No utilice detergente. Para una máxima vida útil del material, séquelo colgándolo o con una secadora a baja temperatura.

CE Clase de producto sanitario I

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso. Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores. Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual. Podrá descargar las ediciones más recientes de los manuales en nuestro sitio web: www.handicare.com.

Combination

Art no.	Combination	Size LxW	Bed size
2080	2060+2081	65 x 130 cm	90 cm

Size & Accessories

Art no.	Productname	Size LxW	Bed size
2060	TurnSheet	65x130 cm	90 cm
2081	Mattress cover	55 cm	

SystemRoMedic™

For 25 years we have applied ourselves wholeheartedly to developing smart and easy-to-use assistive devices for easy transfers and to making life and work easier for both patients and personnel in the care sector.

Experience, innovation and training are the basis for SystemRoMedic, a total solution for every imaginable transfer situation.

Transfer: products for moving patients between locations.
Positioning: products for repositioning in the same location.
Support: products that provide mobility support.
Lifting: products adapted for lifting.

The philosophy behind SystemRoMedic is to prevent occupational injuries while improving the patient's sense of independence and dignity. Through a combination of training and a complete range of transfer-assistive devices, SystemRoMedic offers the means to improving both the work environment and the quality of care while enabling significant cost savings.

Our mission, to help people, has always been, and will continue to be, the driving force of innovation. We love easy transfers.

Contact your local distributor if you have any questions about the product and its use. See www.handicare.com for a complete list of distributors. Always make sure that you have the right version of the manual. The most recent editions of manuals are available for downloading from our website, www.handicare.com

MediCauce

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España
T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com