
WalkingBelt

SystemRoMedic™

Manual de usuario – Español



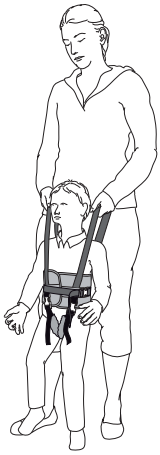

REF

6041

6042



SWL: 50 kg/110 lbs

handicare

Manual no: 644 Ver. 11 150817

WalkingBelt

SystemRoMedic™

Español

WalkingBelt se utiliza como apoyo durante el entrenamiento de la marcha en niños con resistencia y estabilidad reducidas. WalkingBelt ofrece sostén alrededor del torso y se sujeta mediante un arnés de piernas almohadillado. WalkingBelt incorpora dos correas de hombros almohadilladas, que el asistente sujeta para un apoyo y estabilidad adicionales en el entrenamiento de la marcha. Sin embargo, no debe emplearse como dispositivo de asistencia en tareas de elevación. WalkingBelt incluye un suave revestimiento de poliéster que resulta muy cómodo en el contacto con la piel. El material posee un efecto antideslizante.


Inspección operacional

Inspección visual

Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia. Examine siempre el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no presenten desperfecto alguno. Asegúrese de que el tejido no esté desgastado o desteñido. Si hay indicios de desgaste, el producto deberá ser desechado.

Prueba de fuerza

Haga fuerza sobre las hebillas y las asas y compruebe que soportan cargas pesadas.

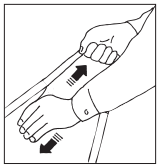

Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales de todos los dispositivos de asistencia empleados en los traslados.
Guarde el manual en un lugar accesible a los usuarios del producto.
Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual.
Podrá descargar las ediciones más recientes de los manuales en nuestro sitio web: www.handicare.com.

Aplicación del WalkingBelt



Sitúe el WalkingBelt alrededor de la cintura del usario y coloque los brazos a través de las correas de hombros. Fije y apriete la correa.

Ajuste las correas de hombros a la longitud adecuada. El asistente debe mantener los brazos relativamente rectos durante el entrenamiento de la marcha.



Coloque el arnés de piernas debajo del usario. Fíjelo y apriete. El arnés de piernas debe estar lo suficientemente ajustado para ofrecer un apoyo adecuado, pero no tanto que resulte incómodo para el usuario.

> Puede requerirse el apriete de la correa de cintura y del arnés de piernas después de ponerse en pie el usario.

Uso del WalkingBelt



Ajuste la longitud de las correas de hombros para una cómoda postura de trabajo del asistente y un adecuado sostén del niño.

Manténgase cerca del menor para un óptimo apoyo y sensación de seguridad de este. Permanezca atento a las señales del niño. Interrumpa el entrenamiento ante el menor indicio de incomodidad por parte del menor.

¡Atención! No use el WalkingBelt como dispositivo de asistencia en tareas de elevación.

Desmontaje del WalkingBelt

Baje las correas de hombros. Desprenda los cierres del arnés de piernas y de la correa de cintura. Retire el cinturón.

Material
Poliamida, poliéster

Cuidado del producto
Consulte la etiqueta del producto.



No use detergente/suavizante y evite el secado para una vida útil óptima.

CE Clase de producto sanitario I

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso. Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

Vida útil estimada
Hasta 10 años de uso normal.

Art. no.	Productname	Size	Measurements	Rec. user weight
6041	WalkingBelt	XXS	600 mm/23,6”	0-25 kg/ 0-55 lbs
6042	WalkingBelt	XS	700 mm/27,5”	20-35 kg/44-77 lbs

SystemRoMedic™

Simple solutions for great results

SystemRoMedic™ is the name of Handicare's unique easy transfer concept, the market's widest and most comprehensive range of clever, easy-to-use and safe transfer and lifting aids designed to make life easier, both for the user and for the caregiver. SystemRoMedic™ is a complete solution that provides for the majority of patient transfer or manual handling requirements. From the simplest to the most complex scenarios, from the lightest to the heaviest. The concept encompasses assistive devices for four different categories of transfers:

- Transfer, assistive devices for manual transfers of users between two locations.
- Positioning, assistive devices for manual repositioning of users within the same location.
- Support, assistive devices for mobility support e.g., during sit-to-stand or gait training.
- Lifting, assistive devices for manual and mechanical lifting of users.

Improved work environment, improved quality of care and cost savings

The philosophy behind SystemRoMedic™ is focused on the prevention and reduction of occupational injuries while allowing users to experience a greater sense of independence and dignity. Through a unique combination of training and a complete range of efficient transfer aids, SystemRoMedic™ offers improvement of both work environment and quality of care and, at the same time, achieves significant cost savings.

Always make sure that you have the correct version of the manual

The most recent version of all manuals are available for downloading at/from our website; www.handicare.com.

For questions about the product and its use

Please contact your local Handicare and SystemRoMedic™ representative. A complete list of all our partners with their contact details can be found on our website; www.handicare.com.

Handicare offers solutions and support to increase the independence of disabled or elderly people as well as to improve the convenience of those who are caring for them.

The Handicare Group is one of the leading healthcare companies in Europe with its own manufacturing organizations and sales companies in Norway, Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, Great Britain, France, China, Canada and the USA. Handicare's products are also distributed by partners in more than 40 countries worldwide. Our wide range of high-quality products includes various manual and power wheelchairs, seating systems, scooters, a complete easy transfer system and other patient handling aids, stairlifts, car adaptations, rise and recline chairs, and bathing and toileting products.

MediCauce

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España
T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

Handicare AB is quality and environmentcertified in accordance with ISO 9001, ISO14001 and ISO 3485.