
TurnSheet


SystemRoMedic™

Manual – Español

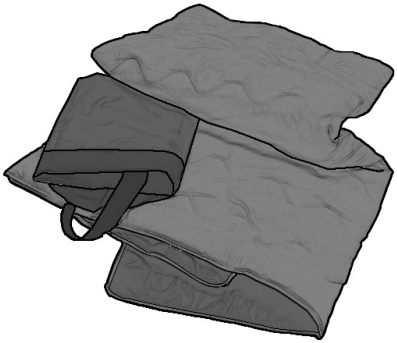

REF

1592
1588
1589
1597

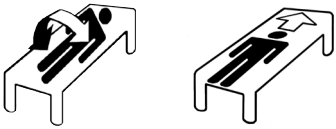

SWL: 300 kg/660 lbs

handicare

Manual no: 811 ver. 10 140506

El TurnSheet se coloca en la cama e incorpora un material antifricción que facilita tanto al paciente como al asistente los giros y la recolocación hacia arriba en la cama. El TurnSheet se compone de dos secciones: un cobertor de colchón y un cobertor de giro. El cobertor de colchón se sitúa alrededor del colchón y el cobertor de giro encima del otro. El cobertor de colchón incluye tanto material antifricción como una superficie de fricción.

SystemRoMedic es una serie de modelos distintos de dispositivos de asistencia para traslados. La elección del dispositivo de asistencia dependerá de la operación de traslado y de las capacidades funcionales y necesidades del paciente.


Inspección operacional


Inspección visual

Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia. Examine siempre el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no presenten desperfecto alguno. Asegúrese de que el tejido no esté desgastado o desteñido. Si hay indicios de desgaste, el producto deberá ser desechado.

Inspección operacional

Pruebe la función deslizante de Turn Sheet enrollándolo y verificando su facilidad de deslizamiento. A ser posible, compare con un producto nuevo.
Compruebe también del mismo modo el material de fricción. Asegúrese de que la superficie sea áspera y que siga generando fricción.

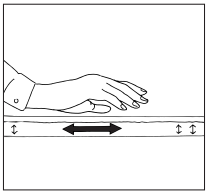

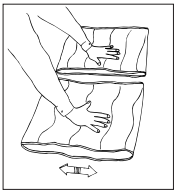


¡Atención!




Tenga en cuenta que existe el riesgo de que el paciente se resbale de la cama. Asegúrese de que el colchón es lo suficientemente ancho para disponer de material antideslizante sobre ambos bordes del cobertor del colchón. No deje al paciente desatendido sin alzar primero los rieles de la cama.
Sitúe el panel deslizante por debajo del colchón.

Colocación

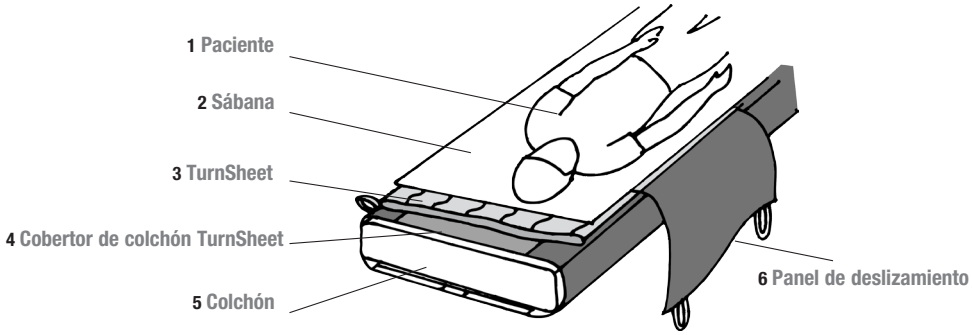

El TurnSheet se sitúa en la cama en el orden descrito más arriba.
El cobertor de colchón se fija con ayuda de cintas de velcro alrededor del colchón.
El cobertor de giro se coloca encima de todo, con las superficies de deslizamiento una frente a otra.


Giro manual con TurnSheet

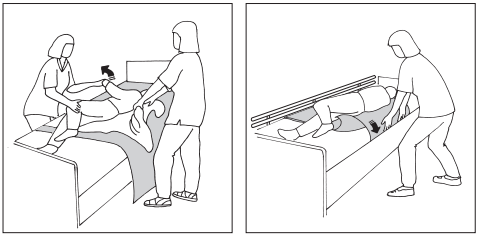

Lleve al paciente a un lado de la cama. Alise la sábana y el cobertor de giro. Tire de la sábana y gire al paciente hasta la posición deseada.


Coloque la sábana bajo ambos lados del colchón y alce los rieles de la cama.

Giro con TurnSheet, dos partes

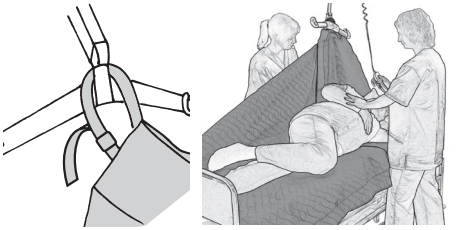

El bucle de suspensión de TurnSheet se engancha sobre la percha en una grúa móvil o elevada.
En caso de no utilizar rieles de cama, deberá situarse un asistente junto a la cama para garantizar la seguridad.

Inicie el giro alzando la percha. Deberá operar la grúa el asistente con una mejor visibilidad del paciente.
Gire al paciente a la posición deseada.

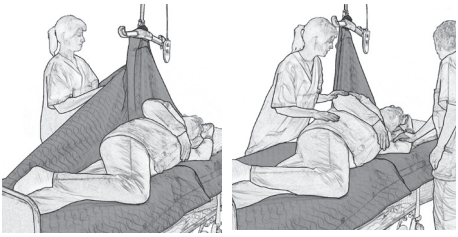



A fin de garantizar el centrado del paciente sobre la cama, pueden requerirse algunos ajustes manuales hacia el centro de la misma.

Una vez girado el paciente a la posición deseada, podrá soltarse la cinta de velcro situada detrás del paciente.


El TurnSheet sujeta ahora la espalda del paciente, por lo que el asistente podrá encargarse de la higiene de este.

Uso de paneles de deslizamiento

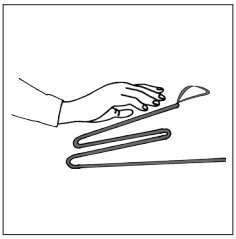

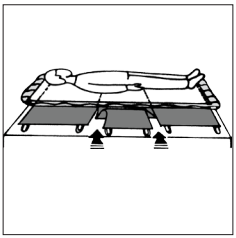



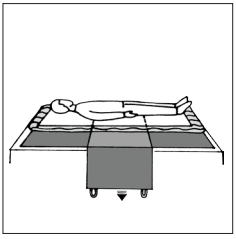

El cobertor de colchón de 140 cm/55” consta de dos paneles de deslizamiento y el de 200 cm/78” de tres.
Por debajo de los paneles de deslizamiento se incluye material de fricción.
Los paneles de deslizamiento pueden extraerse para posibilitar la colocación del paciente en la cama. Por ejemplo, el panel deslizante situado en torno a las caderas puede sacarse para evitar que el paciente se resbale hacia abajo al tratar de incorporarse en la cama.

La colocación y extracción de los paneles de deslizamiento resultan sencillas, ya que estos se pliegan sobre sí mismos y se insertan por debajo del paciente. Presione hacia abajo y tire hacia adelante. Esta tarea se verá facilitada si un asistente bascula ligeramente al paciente.

Al sacar el panel deslizante, colóquelo por debajo del colchón para evitar que quede colgando sobre el suelo.

Material:

Poliamida, poliéster, microfibra

Cuidado del producto:

Consulte la etiqueta del producto.



No utilice detergente.
Evite el secado en secadora para alargar la vida útil del producto.

CE Clase de producto sanitario I

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso. Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores. Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual. Podrá descargar las ediciones más recientes de los manuales en nuestro sitio web: www.handicare.com.

Combination

Art no.	Combination	Size LxW	Bed size
1580	1583+1592	150 x 210 cm	90 cm
1590	1593+1592	210 x 150 cm	90 cm
1586	1588+1587	200 x 150 cm	90 cm

Size & Accessories

Art no.	Productname	Size LxW	Bed size
1592	TurnSheet	210 x 150cm / 83” x 60”	
1588	TurnSheet w. buckles	200 x 150cm / 80” x 60”	
1589	TurnSheet	200 x 240cm / 80” x 94”	
1597	TurnSheet, two parts	200 x 160 cm / 80” x 63”	
1583	Mattress cover	140 cm / 55”	90 cm/35”
1593	Mattress cover	200 cm / 80”	90 cm/35”
1594	Mattress cover	200 cm / 80”	105 cm/42”
1595	Mattress cover	200 cm / 80”	120 cm/47”
1587	Mattress cover	200 cm / 80”	90 cm/35”

SystemRoMedic™

For 25 years we have applied ourselves wholeheartedly to developing smart and easy-to-use assistive devices for easy transfers and to making life and work easier for both patients and personnel in the care sector.

Experience, innovation and training are the basis for SystemRoMedic, a total solution for every imaginable transfer situation.

Transfer: products for moving patients between locations.
Positioning: products for repositioning in the same location.
Support: products that provide mobility support.
Lifting: products adapted for lifting.

The philosophy behind SystemRoMedic is to prevent occupational injuries while improving the patient's sense of independence and dignity. Through a combination of training and a complete range of transfer-assistive devices, SystemRoMedic offers the means to improving both the work environment and the quality of care while enabling significant cost savings.

Our mission, to help people, has always been, and will continue to be, the driving force of innovation. We love easy transfers.

Contact your local distributor if you have any questions about the product and its use. See www.handicare.com for a complete list of distributors. Always make sure that you have the right version of the manual. The most recent editions of manuals are available for downloading from our website, www.handicare.com

MediCauce

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España
T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com