MoveMaster

SystemRoMedic™

Manual de usuario – Español



REF
2090



handicare

Manual no: 807 ver. 11 150805

MoveMaster

SystemRoMedic™

Español

El MoveMaster se utiliza en los traslados entre la cama y la silla de ruedas/inodoro portátil. Se trata de una alfombrilla deslizante abierta dotada de tres asas, una de ellas de mayor longitud que las otras dos. Las distintas asas y el diseño abierto permiten al asistente adoptar diferentes posturas de trabajo.


Inspección operacional


Inspección visual

Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia. Examine siempre el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no presenten desperfecto alguno. Asegúrese de que el tejido no esté desgastado o desteñido. Si hay indicios de desgaste, el producto deberá ser desechado.

Prueba de fuerza

Haga fuerza sobre las hebillas y las asas y compruebe que soportan cargas pesadas.

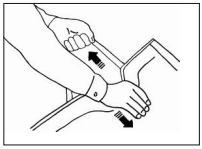

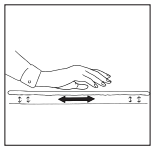


Prueba de fricción

Baja fricción - ¿la superficie es lisa y se desliza con la misma facilidad que antes? ¡Compárelo con un nuevo producto!

Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales de todos los dispositivos de asistencia empleados en los traslados.
Guarde el manual en un lugar accesible a los usuarios del producto.
Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual.
Podrá descargar las ediciones más recientes de los manuales en nuestro sitio web: www.handicare.com.

Uso del MoveMaster

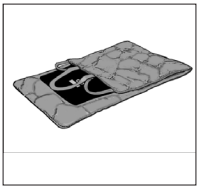

El MoveMaster es un dispositivo de asistencia reductor de la fricción que puede utilizarse junto con un EasyGlide para facilitar los traslados en posición sentada. El MoveMaster se dobla para deslizarse sobre sí mismo con objeto de desplazar al usario sobre la superficie subyacente.



Coloque el MoveMaster debajo dell´usario utilizando una mano o con ayuda de un EasyGlide. El EasyGlide puede ejercer de transición entre la cama/silla de ruedas/silla de ducha. Incline ligeramente al usario en dirección opuesta a la hora de colocar el MoveMaster. Durante la operación, el usario se inclina en la dirección de traslado para reducir la superficie de contacto por debajo de los “huesos de asiento” (las protuberancias óseas inferiores o tuberosidades isquiáticas), lo que facilita el deslizamiento.





Para extraer el MoveMaster, incline al usario en dirección opuesta, sujete la sección superior del MoveMaster y tire a continuación de la sección inferior en la otra dirección.

Material
Poliamida, poliéter

Cuidado del producto
Consulte la etiqueta del producto.



No use detergente/suavizante y evite el secado para una vida útil óptima.

CE Clase de producto sanitario I

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso. Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

Vida útil estimada
Hasta 10 años de uso normal.

Product information

Art. no	Productname	Size	Description
2090	MoveMaster	470 x 1200 mm /18.5 x 47.2”	3 handles

SystemRoMedic™

Simple solutions for great results

SystemRoMedic™ is the name of Handicare's unique easy transfer concept, the market's widest and most comprehensive range of clever, easy-to-use and safe transfer and lifting aids designed to make life easier, both for the user and for the caregiver. SystemRoMedic™ is a complete solution that provides for the majority of patient transfer or manual handling requirements. From the simplest to the most complex scenarios, from the lightest to the heaviest. The concept encompasses assistive devices for four different categories of transfers:

- Transfer, assistive devices for manual transfers of users between two locations.
- Positioning, assistive devices for manual repositioning of users within the same location.
- Support, assistive devices for mobility support e.g., during sit-to-stand or gait training.
- Lifting, assistive devices for manual and mechanical lifting of users.

Improved work environment, improved quality of care and cost savings

The philosophy behind SystemRoMedic™ is focused on the prevention and reduction of occupational injuries while allowing users to experience a greater sense of independence and dignity. Through a unique combination of training and a complete range of efficient transfer aids, SystemRoMedic™ offers improvement of both work environment and quality of care and, at the same time, achieves significant cost savings.

Always make sure that you have the correct version of the manual

The most recent version of all manuals are available for downloading at/from our website; www.handicare.com.

For questions about the product and its use

Please contact your local Handicare and SystemRoMedic™ representative. A complete list of all our partners with their contact details can be found on our website; www.handicare.com.

Handicare offers solutions and support to increase the independence of disabled or elderly people as well as to improve the convenience of those who are caring for them.

The Handicare Group is one of the leading healthcare companies in Europe with its own manufacturing organizations and sales companies in Norway, Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, Great Britain, France, China, Canada and the USA. Handicare's products are also distributed by partners in more than 40 countries worldwide. Our wide range of high-quality products includes various manual and power wheelchairs, seating systems, scooters, a complete easy transfer system and other patient handling aids, stairlifts, car adaptations, rise and recline chairs, and bathing and toileting products.

MediCauce

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España
T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

Handicare AB is quality and environmentcertified in accordance with ISO 9001, ISO14001 and ISO 3485.