
# ClassicHighBackSling

SystemRoMedic™

Manual - Spanish



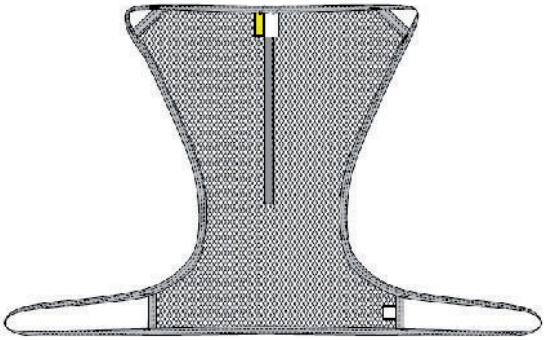

**Max load: 300kg/660lbs**

ClassicHighBackSling proporciona una postura sentado confortable y segura y de al paciente sensación de estabilidad. Está diseñado para dejarlo puesto en la silla una vez que la transferencia se ha completado, con el paciente sentado sobre el arnés. Proporciona soporte desde la parte interior de las rodillas hasta detrás de la cabeza. ClassicHighBackSling está diseñado para usarse en las transferencias más comunes, como desde la cama a la silla de ruedas, etc.

SystemRoMedic incluye un ámplio rango de arneses funcionales, confortables y de alta calidad que pueden ser adaptados para diferentes tipos de elevación y para pacientes con distintas necesidades. Los arneses están disponibles en muchos materiales distintos y en tallas desde XXS hasta XXL. Todos los modelos son seguros y muy fáciles de usar y están indicados para elevación de pacientes con un peso de hasta 300 kg. La elección del modelo y material dependerá de las necesidades del paciente y la posición de transferencia.

## Inspección funcional

**Inspección visual y mecánica.**

Compruebe regularmente el estado y la funcionalidad del arnés. Siempre chequee el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no están dañados. Compruebe que el textil no está deshilachado o desgastado. Ponga peso en el arnés para comprobar su fortaleza en enganches, asas, etc. Si hay signos de desgaste deseche el producto.


## Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales para todos los dispositivos de asistencia usados durante una transferencia.
Mantenga el manual donde sea accseible para los usuarios del producto.
No deje al paciente sin atención durante la transferencia.
Para evitar incomodidad y prevenir que el paciente se deslice fuera del arnés, ajuste cuidadosamente este.
Primero, cuelgue los bucles de la parte de atrás del arnés en la percha, y después los que están situados en los soportes para las piernas. Use una percha que haya sido previamente probada.
Tenga en cuenta que puede haber riesgo de que el paciente se incline hacia delante cuando se usa un arnés con soporte de piernas estandar (sin separar).
El peso máximo de elevación lo determinará el peso que aguante el componente de menor peso máximo.
Comprueba siempre los pesos máximos de los dispositivos.
Contacte a su disitribuidor en caso de dudas.

handicare

**Manual no: 00863 En Ver. 5 101123**

## ClassicHighBackSling solo podrá ser colocado con el paciente totalmente tumbado.

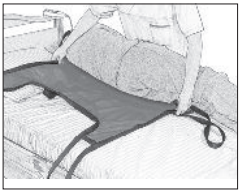







**1.** Gire al paciente hacia usted. Coloque el arnés de modo que la sección central quede paralelo a la columna y el borde inferior entre 5 y 10 centímetros por encima de la parte posterior de la rodilla. Coloque el borde el arnés tan debajo del paciente como sea posible.
**2.** Vuelva a poner al paciente boca arriba, asegurándose de que queda centrado en el arnés.
**3.** Si es posible, eleve el respaldo antes de comenzar la elevación. Comience a levantar la grúa, cuando las correas se tensen, pare y compruebe que todo está correcto antes de continuar con la elevación.
**4.** Deje el arnés en la silla.

## ClassicHighBackSling solo podrá ser retirado cuando el paciente esté tumbado en cama, camilla o en el suelo.

Siga los mismo pasos que a la hora de colocarlo, pero en orden inverso.

## Materiales:

Red de poliéster: es un material transpirable que puede ser dejado bajo el paciente si fuera necesario. Resiste altas temperaturas de lavado.

## Cuidado del producto:

Lea la etiqueta del producto.




No utilice lejía.
Para alargar la vida de este producto déjelo secar o utilice un programa delicado de secadora.

## Información sobre las tallas.

Los arneses pueden ser usados habitualmente tanto con dos como con cuatro puntos de suspensión. Es esencial asegurarse de que el ancho de la percha es apropiado para la talla del arnés y el estado y capacidad del paciente.

Use el arnes recomendado para cada paciente a fin de garantizar su segurirdad e higiene.

| Talla | | XS/Naranja | S/Rojo | M/Amarillo | L/Verde | XL/Morado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso usuario recomendado | lbs | 44-88 | 66-132 | 121-187 | 176-265 | 243-309 |
| | kg | 20-40 | 30-60 | 55-85 | 80-120 | 110-140 |
| Alturla total arnés | inch | 37,5 | 38,5 | 42 | 43 | 45 |
| | cm | 95 | 98 | 106 | 110 | 115 |
| Medidas asiento | inch | 12 | 16 | 19 | 25,5 | 31,5 |
| | cm | 30 | 40 | 48 | 65 | 80 |

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso.
Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España

T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

MediCauce