
FlexibleSling
SystemRoMedic™

Manual - Spanish



Soporte de piernas sin dividir

Carga Máxima: 300kg/660lbs

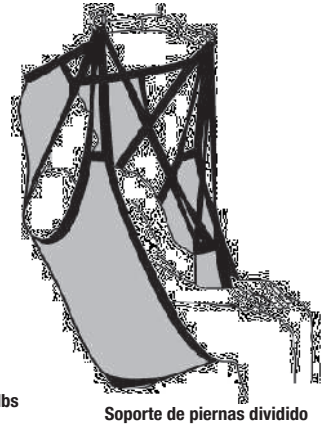

Soporte de piernas dividido

FlexibleSling se adapta de forma flexible a lo largo del cuerpo, proporcionando seguridad. Está disponible en tres modelos; con soporte de piernas dividido, con soporte de piernas sin dividir y con soporte de piernas sin dividir y apertura cómoda. Use FlexibleSling para proporcionar mucho apoyo y adaptarse a la forma del cuerpo del paciente.

Después de usarlo, puede dejarse puesto en la silla de ruedas, asiento adaptado o similar.

SystemRoMedic incluye un ámplio rango de arneses funcionales, confortables y de alta calidad que pueden ser adaptados para diferentes tipos de elevación y para pacientes con distintas necesidades. Los arneses están disponibles en muchos materiales distintos y en tallas desde XXS hasta XXL. Todos los modelos son seguros y muy fáciles de usar y están indicados para elevación de pacientes con un peso de hasta 300 kg. La elección del modelo y material dependerá de las necesidadesdel paciente y la posición de transferencia.

Inspección Funcional

Inspección visual y mecánica.

Compruebe regularmente el estado y la funcionalidad del arnés. Siempre chequee el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no están dañados. Compruebe que el textil no está deshilachado o desgastado. Ponga peso en el arnés para comprobar su fortaleza en enganches, asas, etc.
Si hay signos de desgaste deseche el producto.

Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales para todos los dispositivos de asistencia usados durante una transferencia.
Mantenga el manual donde sea accesible para los usuarios del producto.
No deje al paciente sin atención durante la transferencia.
Para evitar incomodidad y prevenir que el paciente se deslice fuera del arnés, ajuste cuidadosamente este.
Primero, cuelgue los bucles de la parte de atrás del arnés en la percha, y después los que están situados en los soportes para las piernas. Use una percha que haya sido previamente probada.
Tenga en cuenta que puede haber riesgo de que el paciente se incline hacia delante cuando se usa un arnés con soporte de piernas estandar (sin separar).
El peso máximo de elevación lo determinará el peso que aguante el componente de menor peso máximo.
Comprueba siempre los pesos máximos de los dispositivos.
Contacte a su disitribuidor en caso de dudas.

handicare


Manual no: 00852 En Ver. 5 101124

FlexibleSling con soporte de piernas dividido. Colocar el arnés cuando el paciente está sentado, en silla de ruedas o en cama.


1


2


3

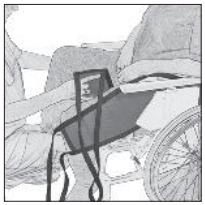
4

1. Sostenga el arnés con una mano y agarre el borde inferior del arnés con la otra. Esto resultará más sencillo si el paciente se inclina hacia adelante o puede ser ayudado a inclinarse ligeramente hacia adelante. Deslice el arnés por la espalda del paciente a lo largo de la silla o silla de ruedas o de la cama, preferentemente, hasta el coxis. La sección central del arnés debe estar paralela a la columna vertebral del paciente.

2. Guíe cuidadosamente el arnés hacia las caderas del paciente. Haga esto introduciendo el arnés en los espacios que quedan en las esquinas del respaldo de la silla de ruedas.

3. Después, coloque los soportes para piernas a lo largo de la parte exterior de los muslos del paciente. Colóquese frente al paciente y tire del borde inferior del soporte para piernas, de modo que el arnés se situe alrededor de las caderas en la parte interior de los muslos. La presión ligera contra las rodillas del paciente impide que se deslice hacia adelante en la silla.

4. Después de comprobar que los soportes de las piernas son de igual longitud en ambos lados, colóquelos debajo de los muslos del paciente. Cruce los soportes para piernas y engánchelos a la percha.
Comience a levantar la grúa, cuando las correas estén tensas, pare y revise que todo está correcto antes de seguir.

Retirar el arnés cuando el paciente está sentado



1



2


1. Doble el soporte para piernas y deslícelo bajo el mismo de modo que pueda tirar hacia la parte exterior del muslo.


2. Después, extraiga el arnés deslizándolo hacia arriba por la espalda del paciente.

Colocar el arnés cuando el paciente está tumbado en la cama, en camilla o en el suelo.

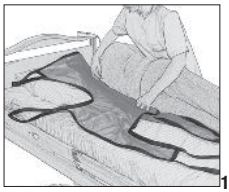
1

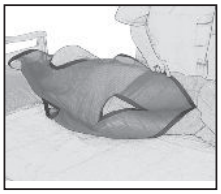
2

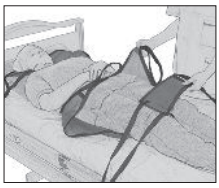
3

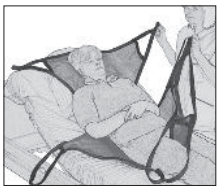
4


1. Gire el paciente hacia usted. Coloque el arnés de modo que la etiqueta del producto quede mirando a la superficie de apoyo y la sección media del arnés alineada con la columna del paciente. El borde superiordel arnés debe estar lo suficientemente alto como paraque cubra la cabeza y el borde inferior cubra el coxis. Introduzca el arnés debajo del cuerpo del paciente tanto como pueda. Coloque los bucles de la sección de la espalda de modo que pueda cogerlos una vez el paciente sea tumbado de nuevo boca arriba sobre el arnés.


2. Para una colocación más sencilla, doble la sección trasera contra la espalda del paciente y coloque el soporte para piernas entre las rodillas cuando está girado hacia usted, después tire hacia alante cuando el arnés se encuentre sobre el paciente.
Pare y compruebe que todo está correcto antes de proceder con la grúa.


3. Vuelva a colocar al paciente de nuevo en el arnés y estire el soporte para cabeza, la parte de atrás del arnés y el soporte para piernas.

4. Cruce el soporte para piernas y cuélguelo en la percha. Comience el levantamiento con la grúa.

FlexibleSling con soporte de piernas sin dividir, Colocar el arnés cuando el paciente está en cama, camilla o en el suelo.

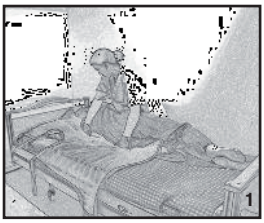

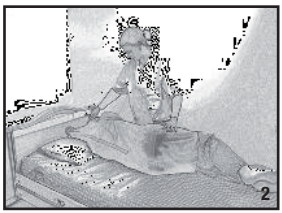

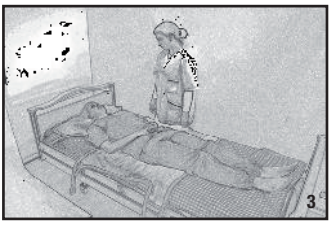

1. Gire el paciente hacia usted. Coloque el arnés de modo que la etiqueta del producto quede mirando a la superficie de apoyo y la sección media del arnés alineada con la columna del paciente. El borde superior del arnés debe estar lo suficientemente alto como para que cubra la cabeza y el borde inferior cubra el coxis. Introduzca el arnés debajo del cuerpo del paciente tanto como pueda. Coloque los bucles de la sencción de la espalda de modo que pueda cogerlos una vez el paciente sea tumbado de nuevo boca arriba sobre el arnés.


2. Para asegurarse de que el arnés está colocado de forma correcta y su mitad alineada con la columna del paciente, puede doblar el arnés sobre el paciente para comprobarlo.

3. Vuelva a colocar al paciente de nuevo en el arnés y estire el soporte para cabeza, la parte de atrás del arnés y el soporte para piernas.

Conecte los bucles a la percha, empezando por los superiores y después los de los soportes para piernas. Comience la elevación, pare y compruebe que todo está como debería antes de continuar levantando al paciente por completo.

FlexibleSling con y sin soporte para piernas dividido, Retirar el arnés cuando el paciente está recostado.



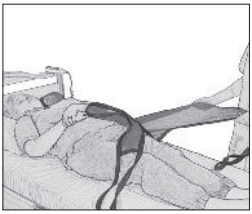

Gire al paciente hacia usted y doble el arnés bajo él de modo que el tejido se deslice hacia usted cuando tire una vez que haya vuelto a tumbar al paciente.

Posiciones alternativas.





La espalda alta del arnés proporciona buen soporte a la cabeza además de permitir al paciente colocar los brazos tanto fuera como dentro de arnés.

Para el modelo con el soporte de piernas dividido, normalmente, los soportes para piernas se cruzan antes de colgarlo de la percha.

Material:

Red de poliéster: es un material poroso que puede ser dejado bajo el paciente si fuera necesario. Resiste altas temperaturas de lavado.

Cuidado del producto:

Lea la etiqueta del producto



No utilice lejía.
Para alargar la vida de este producto déjelo secar o utilice un programa delicado de secadora.

Información de las tallas.

Los arneses pueden ser usados habitualmente tanto con dos como con cuatro puntos de suspensión. Es esencial asegurarse de que el ancho de la percha es apropiado para la talla del arnés y el estado y capacidad del paciente.

Use el arnes recomendado para cada paciente a fin de garantizar su segurirdad e higiene.

FlexibleSling, con soporte de piernas dividido.

Talla		XXS/Gris	XS/Naranja	S/Roja	M/Amarilla	L/Verde	XL/Morado
Peso usuario recomendado	lbs	22-66	44-77	55-121	110-165	154-243	220-287
	kg	10-30	20-35	25-55	50-75	70-110	100-130
Altura total arnés	inch	29,5	32	35,5	40	40	41
	cm	75	81	90	102	102	104
Medidas asiento	inch	8	10	14	18	22	25,5
	cm	20	25	35	45	55	65

FlexibleSling, soporte de piernas sin dividir.

Talla		XS/Naranja	S/Rojo	M/Amarillo	L/Verde	XL/Morado
Peso usuario recomendado	lbs	44-88	66-154	132-198,5	176-286,5	242,5-397
	kg	20-40	30-70	60-90	80-130	110-180
Altura total arnés	inch	31,5	33,5	36,5	38	38,5
	cm	80	85	93	96	98
Medidas del asiento	inch	29,5	33,5	37	41,5	45,5
	cm	75	85	94	105	115

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso.
Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España

T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

MediCauce