
HygieneLBSling

SystemRoMedic™

Manual - English



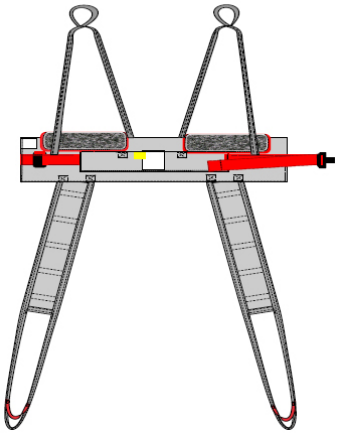

SWL: 300kg/660lbs

HygieneLBSling es un arnés que es simple de colocar y que facilita al cuidador vestir y desvestir al usuario en relación con las visitas al inodoro. Incorpora soportes para piernas, con lo cual el paciente no se sienta sobre el arnés. En vez de eso, el arnés proporciona soporte tras la espalda, sobre la cabeza y bajo las piernas. HygieneLBSling está diseñado para la mayoría de situaciones de elevación que requieran vestir y desvestir al paciente.

SystemRoMedic incluye un ámplio rango de arneses funcionales, confortables y de alta calidad que pueden ser adaptados para diferentes tipos de elevación y para pacientes con distintas necesidades. Los arneses están disponibles en muchos materiales distintos y en tallas desde XXS hasta XXL. Todos los modelos son seguros y muy fáciles de usar y están indicados para elevación de pacientes con un peso de hasta 300 kg. La elección del modelo y material dependerá de las necesidades del paciente y la posición de transferencia.

Inspección functional

Inspección visual y mecánica

Compruebe regularmente el estado y la funcionalidad del arnés. Siempre chequee el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no están dañados. Compruebe que el textil no está deshilachado o desgastado. Ponga peso en el arnés para comprobar su fortaleza en enganches, asas, etc. Si hay signos de desgaste deseche el producto.

Lea siempre el manual


Lea siempre los manuales de las ayudas técnicas y de transferencia.
Mantenga el manual en un lugar accesible.
No deje al paciente solo durante una transferencia.
Para asegurarse de la comodidad y seguridad en el paciente, elija la talla adecuada. Enganche primero las sujeciones de la espalda y luego las de las piernas.
El peso máximo de elevación lo determinará el peso que aguante el componente de menor peso máximo.
Comprueba siempre los pesos máximos de los dispositivos.
Contacte a su disitribuidor en caso de dudas.

handicare

Manual no: 00785 En Ver. 4 120131

Colocación del arnés cuando el paciente está sentado en una silla o silla de ruedas o en una cama.


El paciente debe tener suficiente grado de control funcional para poder usar este arnés. Un tono muscular deficiente puede conllevar el riesgo de que el paciente se deslice fuera del arnés. Tenga cuidado.

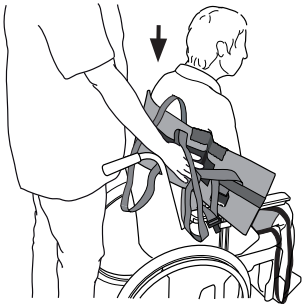



HygieneHBSling se coloca detrás de la espalda y alrededor de 5 a 10 cm por debajo de las axilas. La etiqueta del producto está en el punto medio del arnés y debe estar alineado con la columna vertebral del paciente.

Los brazos se colocan en los bucles del arnés. Esto es más fácil si el paciente se inclina hacia delante o puede ser ayudado a inclinarse ligeramente hacia adelante. Cierre la hebilla - un clic señala que está firmemente cerrado. Tire de la correa para apretar el cinturón.

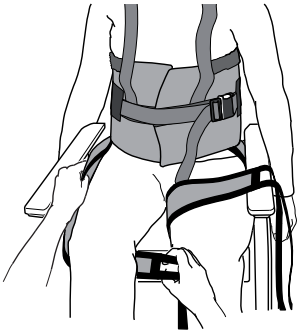





Coloque los soportes de las piernas debajo de los muslos del paciente.
Cruce los soportes de las piernas y luego conecte los bucles de las secciones traseras antes de conectar los bucles de soporte de las piernas.

Comience a levantar la percha y, a continuación, deténgase para asegurarse de que todo esta en la posición correcta antes de levantar el paciente de donde estuviera sentado.
No lo eleve más de lo necesario.


Extracción del arnés cuando el paciente está sentado.

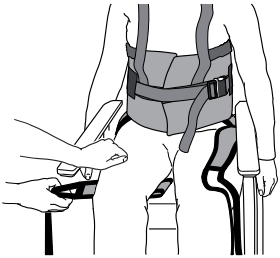


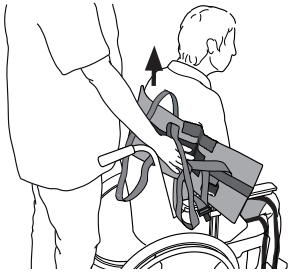

Doble el soporte de la pierna debajo de sí mismo y tire de él hacia fuera por el exterior del muslo.
Luego, tire del arnés por detrás de la espalda del paciente.


Para ir al baño.

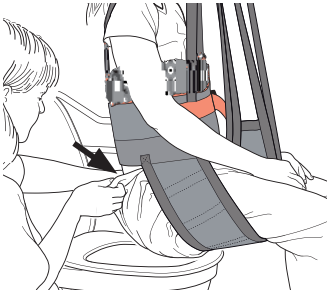

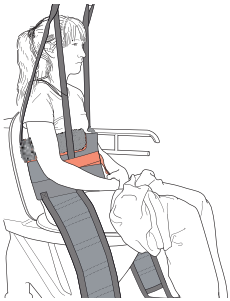

Antes de colocar al usuario sobre el inodoro, tire de los pantalones hasta colocarlos los más alejados posible de los soportes para piernas.
Baje y coloque al paciente y desenganche los soportes para piernas. Retire un poco más los pantalones. Puede dejar la sección de cinturón enganchada para proporcionar soporte adicional.

Después de ir al baño.

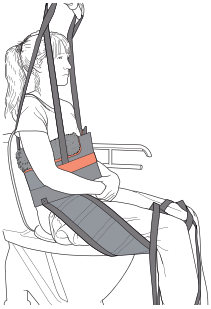



Tire de los pantalones hacia las ingles tanto como sea posible. Coloque el soporte para las piernas a lo largo de la parte superior de las piernas entre la rodilla y la cintura.

Levante al paciente y suba los pantalones. No lo levante más de lo necesario.

Si el usuario usa pañal, colóquela dentro de los pantalones antes de subirlos.

Materiales:

Poliéster: Material duradero de baja fricción. Resiste altas temperaturas de lavado.

Cuidado del producto:

Lea la etiqueta del producto.



No utilice lejía.
Para alargar la vida de este producto déjelo secar o utilice un programa delicado de secadora.

Información sobre las tallas.

Los arneses pueden ser usados habitualmente tanto con dos como con cuatro puntos de suspensión. Es esencial asegurarse de que el ancho de la percha es apropiado para la talla del arnés y el estado y capacidad del paciente.

Use el arnes recomendado para cada paciente a fin de garantizar su segurirdad e higiene.

Talla		XXS/Gris	XS/Naranja	S/Rojo	M/Amarillo	L/Verde	XL/Morado	XXL/Blanco
Peso usuario recomendado	kg	10-30	25-45	40-60	55-80	75-110	90-130	120-170
	lbs	22-66	55-99	88-132	121-187	165-220,5	198,5-286,5	264,5-375
Medidas arneses	cm	60	70	80	95	110	122	142
	inch	23,5	27,5	31,5	37,5	43,5	48	56
Altura total arneses	cm	92	92	96	102	102	104	104
	inch	36	36	38	40	40	41	41
Medidas del arnés	cm	25	28	30	35	41	46	60
	inch	9.8	11	11.8	13.8	16.1	18.1	23.6

Carga operacional segura:

Diferentes productos del mismo sistema de elevación (grúa, percha, arneses, básculas y otros accesorios de elevación) pueden tener diferentes cargas operacionales permitidas. La carga operacional más pequeña permitida siempre determina la carga operacional permitida de todo el sistema montado.Compruebe siempre la carga operacional tanto de la grúa como de los accesorios antes de usarlos.

Contacte con su proveedor si tiene algún tipo de duda.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso.
Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España

T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

MediCauce