


SafeHandlingSheet

SystemRoMedic™

Manual - Español

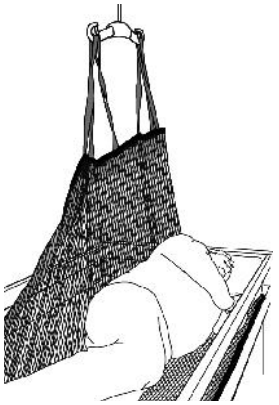

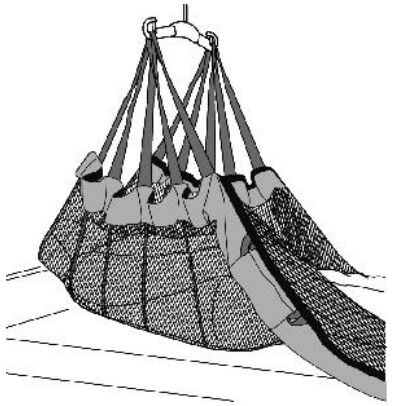

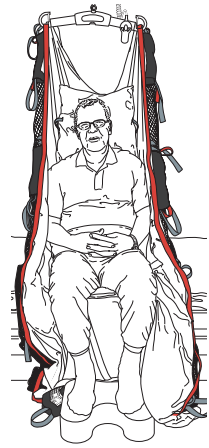

SWL: 300 kg/661 lbs, 400kg/900 lbs, 570 kg/1250 lbs

SafeHandlingSheet es un sábana que puede ser usada para reposicionamiento en cama tanto con grúas estacionarias como móviles. Incorpora dieciseis puntos de suspensión, ocho a cada lado del paciente.

SafeHandlingSheet ha sido diseñado para responder a la necesidad de reposicionar pacientes en cama.

SystemRoMedic incluye un ámplio rango de arneses funcionales, confortables y de alta calidad que pueden ser adaptados para diferentes tipos de elevación y para pacientes con distintas necesidades. Los arneses están disponibles en muchos materiales distintos y en tallas desde XXS hasta XXL. Todos los modelos son seguros y muy fáciles de usar y están indicados para elevación de pacientes con un peso de hasta 300 kg. La elección del modelo y material dependerá de las necesidades del paciente y la posición de transferencia.

Inspección Funcional

Inspección visual y mecánica.

Compruebe regularmente el estado y la funcionalidad del arnés. Siempre chequee el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no están dañados. Compruebe que el textil no está deshilachado o desgastado. Ponga peso en el arnés para comprobar su fortaleza en enganches, asas, etc. Si hay signos de desgaste deseche el producto.

Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales de las ayudas técnicas y de transferencia.
Mantenga el manual en un lugar accesible.
No deje al paciente solo durante una transferencia.
Para asegurarse de la comodidad y seguridad en el paciente, elija la talla adecuada. Enganche primero las sujeciones de la espalda y luego las de las piernas.
El peso máximo de elevación lo determinará el peso que aguante el componente de menor peso máximo.
Comprueba siempre los pesos máximos de los dispositivos.
Contacte a su disitribuidor en caso de dudas.

handicare

Manual no: 896-En Ver. 8 130201

Description of SafeHandlingSheet:



SHSheet L Polyester net/WendyLett4Way

SafeHandlingSheet tiene correas de elevación a ambos lados. Para simplificar la operación al cuidador las correas de elevación son alternativamente grises y negras.
Las correas de elevación tienen tres bucles alternativos con diferentes colores: gris, rojo y negro.

SafeHandlingSheet tiene claramente diferenciado que lado debe ir hacia arriba en la cama mediante un grabado con las palabras: “This side up”.
Este grabado marca también la mitad de la sábana.



SHSheet L Polyester net


Cuando el reposicionamiento se complete, coloque las cintas debajo del colchón o sitúelas en los bolsillos de los lados.



¡Consejos!


- Úselo con sábanas encima del SafeHandlingSheet.
- Situe al usuario en el centro del SafeHandlingSheet.
- El material extra disponible junto con SafeHandlingSheet permite reposicionar al usuario varias veces antes de que necesite cambiar de posición al usuario en el Safe Patient Handling Sheet.
- Se recomienda su uso con sistemas de gruas de techo (ejes x-y).
- Si es posible, considere mover la cama en primer lugar en vez de empujar o dejar caer al usuario cuando sea levantado de la superficie de ésta.

Uso del SafeHandlingSheet:

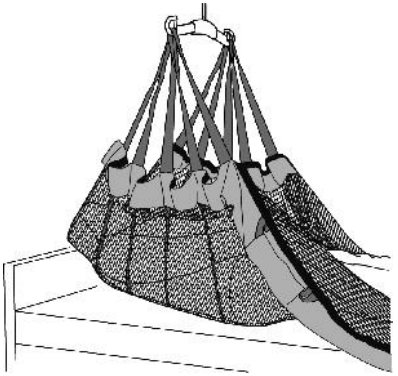

Levantamiento en la cama:
Las cinco correas superiores de cada lado (o tantas correas como sean necesarias paca cubrir los puntos de fricción) deben ser enganchadas a la percha.

Comience el levantamiento con la grúa e incorpore al peciente conforme se vaya liberando peso de los puntos de fricción.

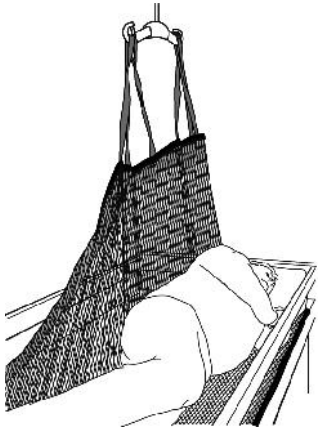


Lateralización en cama:
Si el usuario va a ser posicionado en el centro de la cama después de lateralizarlo, se recomienda reposicionar primero al usuario (ver: Levantamiento en cama) lateralmente a un lado de la cama y después girar al usuario hacia el centro de la cama. Para realizar el giro, conecte las cuatro correas más céntricas de uno del los lados del SafeHandlingSheet (el lado opuesto a la direcciónen que se desea girar al paciente) a la percha. En caso de no utilizar rieles de cama, deberá situarse un asistente junto a la camapara garantizar la seguridad. Suba la grúa para devolver suávemente al usuario hacia el centro de la cama.


Cambio del SafeHandlingSheet:
Cuando reemplace un SafeHandlingSheet usado por uno nuevo, comience con una elevación como se ha descrito previamente. Una vez el usuario se encuentra fuera de la cama, coloque el nuevo SafeHandlingSheet centrado en la cama. Devuelva al usuario de nuevo a la cama y descuelgue de la percha el SafeHandlingSheet usado. Conecte el nuevo SafeHandlingSheet a la percha y gire al usuario hacia una lado (ver: Giros en cama) y enrolle o pliegue el viejo SafeHandlingSheet bajo el usuario, después gire de nuevo al usuario de vuelta a la cama. Vuelva a hacer un giro con el nuevo SafeHandlingSheet en la dirección opuesta y extraiga el SafeHandlingSheet usado desde debajo del usuario, después gire de nuevo al usuario sobre la cama.

Posición sentada en la cama.

¡Recuerde! Para este procedimiento el paciente debe ser capaz de mantenerse sentado.
Disminuya la altura de la cama, de modo que el paciente pueda pueda plantar con firmeza sus pies en el suelo a la hora de quedarse sentado. Si la cama es demasiado alta, use un soporte para pies.

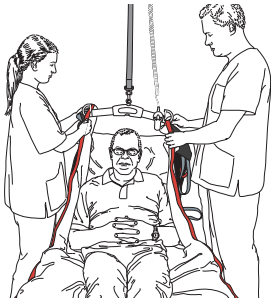

Prepare al paciente para la elevación. Levante el respaldo de la cama y enganche las correas superiores en la percha.

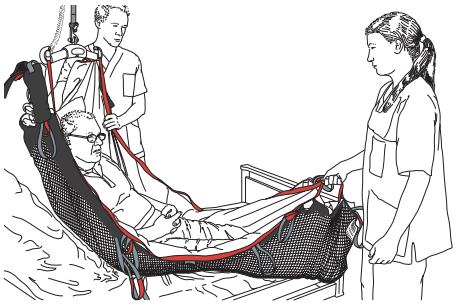



Un cuidador debe agarrar las correas situadas a la altura de los pies.
Comience levantando la grúa.
El cuidador elevará las piernas del usuario por encima del borde de la cama y bajará ses pies hasta que apoyen en el suelo.
Asegúsere de que el paciente el capaz de mantenerse sentado de forma segura en la cama. Las rodillas y la cadera deben estar al mismo nivel.
Coloque un dispositivo de bipedestación compatible o un andador delante del usuario para ayudarle a mantenerse erguido.

Producto	Ref.	Medidas	Material	Carga máxima
SHSheet L poly net	47522007	240 x 115	Red de poliester: poroso, alta transpiración	300kg / 661lbs.
SHSheet XL poly	47502008	240 x 115	Poliester: duradero y de baja fricción	400kg / 900 lbs.
SHSheet XXL poly/ reinforced	47502009	240 x 130	Poliester: duradero y de baja fricción	570kg / 1250 lbs.
SHSheet L Poly net/ WendyLett4Way	47542007	240 x 115	Red de poliester: poroso, alta transpiración WendyLett4Way: sábana que puede ser colocada en cama bajo el paciente	300kg / 661 lbs.

Cuidado del producto:

Lea la etiqueta del producto.



No utilice lejía.
Para alargar la vida de este producto déjelo secar o utilice un programa delicado de secadora.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso.
Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España

T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

MediCauce