

ShellHighBackSling

SystemRoMedic

Manual - Spanish

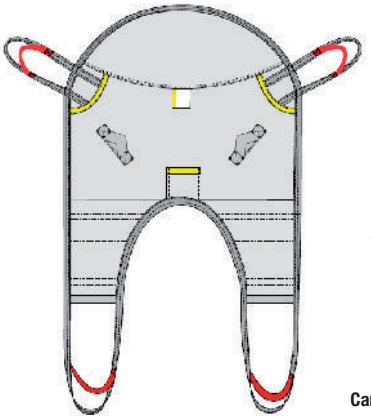

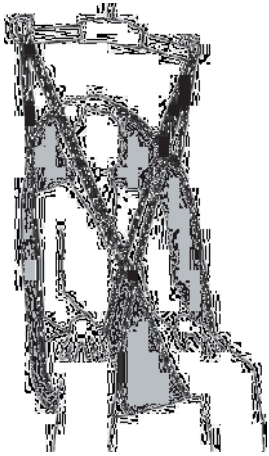

Carga máxima: 300kg/660lbs

ShellHBsling incorpora soportes de piernas divididos; fácil para el cuidador de poner y quitar, el usuario no se sienta en el arnés. Además con el respaldo alto, el usuario recibe apoyo desde el cóccix, hasta por encima de la cabeza y debajo de las piernas. La posición sentada erguida se puede regular con dos bucles de elevación alternativos en la parte posterior y en los soportes de piernas. ShellHBSling tiene forma de cuenco y proporciona un apoyo excelente y ajustable para la cabeza.

SystemRoMedic incluye un ámplio rango de arneses funcionales, confortables y de alta calidad que pueden ser adaptados para diferentes tipos de elevación y para pacientes con distintas necesidades. Los arneses están disponibles en muchos materiales distintos y en tallas desde XXS hasta XXL. Todos los modelos son seguros y muy fáciles de usar y están indicados para elevación de pacientes con un peso de hasta 300 kg. La elección del modelo y material dependerá de las necesidades del paciente y la posición de transferencia.

Inspección funcional

Inspección visual y mecánica.

Compruebe regularmente el estado y la funcionalidad del arnés. Siempre chequee el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no están dañados. Compruebe que el textil no está deshilachado o desgastado. Ponga peso en el arnés para comprobar su fortaleza en enganches, asas, etc. Si hay signos de desgaste deseche el producto.

Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales para todos los dispositivos de asistencia usados durante una transferencia.
Mantenga el manual donde sea accseible para los usuarios del producto.
No deje al paciente sin atención durante la transferencia.
Para evitar incomodidad y prevenir que el paciente se deslice fuera del arnés, ajuste cuidadosamente este.
Primero, cuelgue los bucles de la parte de atrás del arnés en la percha, y después los que están situados en los soportes para las piernas. Use una percha que haya sido previamente probada.
Tenga en cuenta que puede haber riesgo de que el paciente se incline hacia delante cuando se usa un arnés con soporte de piernas estandar (sin separar).
El peso máximo de elevación lo determinará el peso que aguante el componente de menor peso máximo.
Comprueba siempre los pesos máximos de los dispositivos.
Contacte a su disitribuidor en caso de dudas.


handicare

Manual no: 00871 En Ver. 3 101111

Colocar el arnés con el paciente sentado en silla/silla de ruedas o en la cama



1

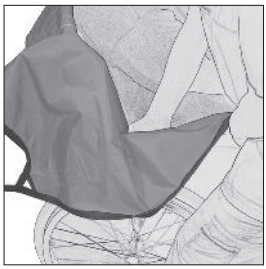


2

1. Sujete el arnés con una mano y coloque la otra en el interior del bolsillo que se encuentra en el borde inferior del arnés. Esto será más sencillo si el paciente es capaz de inclinarse ligeramente hacia delante o se le puede ayudar a hacerlo. Introduzca el arnés siguiendo la espalda del paciente hacia abajo, deslizándolo por el respaldo de la silla/silla de ruedas o a lo largo de la cama, hasta, preferiblemente, el cóccix. La sección central del arnés debería quedar paralela a la columna del paciente.

2. Guíe con cuidado el arnés siguiendo las caderas del paciente. Para esto apriete primero el arnés hacia las esquinas que forma el respaldo con el asiento de la silla de ruedas.



3

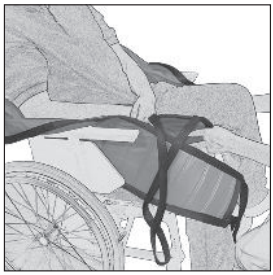


4


3. Después, coloque los soportes para piernas en la parte exterior de los muslos del paciente. Colóquese frente la paciente y tire del borde inferior del soporte para piernas de modo que se deslice por las caderas hacia el interior. Sujetar ligeramente las rodillas del paciente prevendrá que éste se resvale de la silla.

4. Tras asegurarse de que los soportes para piernas quedan a la misma longitud en ambos lados colóquelos bajo los muslos del paciente. Cruce los soportes para piernas y cuélguelos en la percha. Comience la elevación, cuando las correas queden tensas, pare y compruebe que todo está correcto antes de proseguir con la elevación.

Retirar el arnés cuando el paciente está sentado

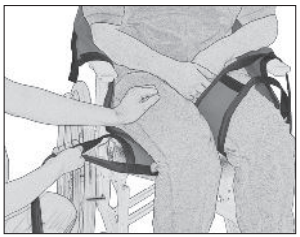

1

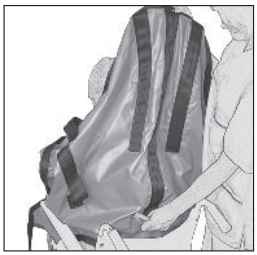


2


1. Doble el soporte para piernas para permitir que se deslice sobre si mismo cuando tire de ello hacia la parte exterior de los muslos.

2. Después, tire del arnés hacia arriba siguiendo la espalda del paciente.

Colocar el arnés con el paciente tumbado en cama, camilla o en el suelo

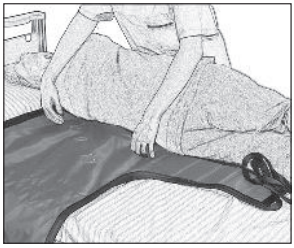


1

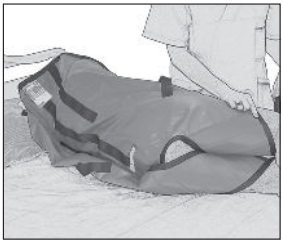


2

1. Gire al paciente hacia usted. Coloque el arnés de modo que la etiqueta quede hacia la superficie de apoyo y la sección central paralela la la comuna del paciente. El borde superior del arnés debe quedar los suficientemente arriba como para proporcionar soporte en la cabeza y el borde inferior debe quedar al nivel del cóccix. Coloque el arnés tan debajo del paciente como sea posible. Coloque también debajo los bucles de la sección posterior, de modo que pueda cogerlos una vez vuelva a tumbar al paciente.

2. Para reducir el número de pasos a la hora de colocar el arnés, puede doblar la sección trasera contra la espalda del paciente y colocar el soporte para piernas entre las rodillas cuando el paciente esté girado hacia usted, y después tirar de ellos una vez el paciente está sobre el arnés.

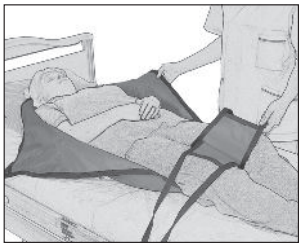

3

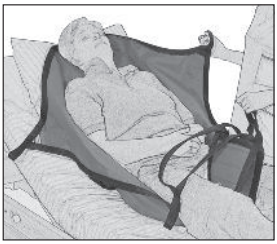


4


3. Tumbe de nuevo al paciente sobre el arnés y tire del soporte para la cabeza, de la sección trasera y del soporte para piernas.

4. Cruce el soporte para piernas y engánchelo a la percha.
Comience la elevación, cuando las correas queden tensas, pare y compruebe que todo está correcto antes de continuar con la elevación.

Retirar el arnés con el paciente está recostado

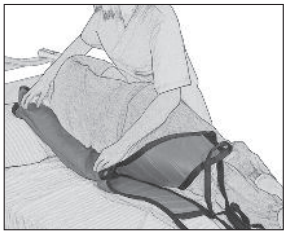

1

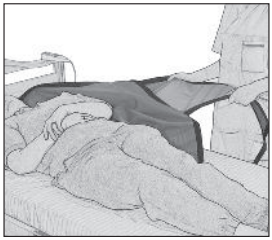

2

1. Coloque los soportes para piernas entre las rodillas del paciente.

2. Gire al paciente hacia usted y doble el arnés bajo el paciente de modo que pueda deslizar el tejido hacia usted cuando tire de este una vez haya vuelto a tumbar al paciente.

Posición alternativa del soporte para piernas







1. En la posición habitual las correas del soporte para piernas se cruzan antes de colgarlas en la percha.
2. Si se desea que las piernas del paciente permanezcan juntas, por respeto o comodidad, el soporte para piernas puede también solaparse bajo ambas piernas.
3. Para un mayor acceso al área perineal del paciente, puede dejar sin cruzar las correas del soporte para piernas. Tenga sin embargo en cuenta que se corre el riesgo de que el paciente se delice hacia afuera en el arnés.

Materiales:

Poliéster: material duradero de baja fricción. Resiste altas temperaturas de levado.

Cudidado del producto:

Lea la etiqueta del producto.



No utilice lejía.
Para alargar la vida de este producto déjelo secar o utilice un programa delicado de secadora.

Información de las tallas

Los arneses pueden ser usados habitualmente tanto con dos como con cuatro puntos de suspensión. Es esencial asegurarse de que el ancho de la percha es apropiado para la talla del arnés y el estado y capacidad del paciente.

Use el arnes recomendado para cada paciente a fin de garantizar su segurirdad e higiene.

Tallas		XXS/Gris	XS/Naranja	S/Rojo	M/Amarillo	L/Verde	XL/Morado	XXL/Blanco
Peso usuario recomendado	lbs	22-66	44-77	66-121	110-198	176-265	243-353	331-463
	kg	10-30	20-35	30-55	50-90	80-120	110-160	150-210
Altura total arnés	inch	31,5	33,5	37	38	38,5	39,5	39,5
	cm	80	85	94	97	98	100	100
Medida asiento	inch	6,5	10	14	16	17,5	21,5	25,5
	cm	17	25	35	40	45	55	65

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso.
Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España

T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

MediCauce