
SlingBar

SystemRoMedic™

Manual - Spanish

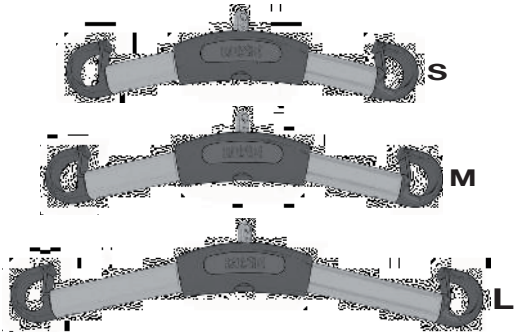

Carga máx. rec. 300kg

SlingBar es una gama de perchas que pueden ser usadas en combinación con grúas móviles o estacionarias aprovadas por Handicare. Estas prechas has sido diseñadas para usarse con arneses adecuados a sus medidas para la elevación de pacientes. Están disponobles en tres tallas distintas.

SystemRoMedic incluye un ámplio rango de arneses funcionales, confortables y de alta calidad que pueden ser adaptados para diferentes tipos de elevación y para pacientes con distintas necesidades. Los arneses están disponibles en muchos materiales distintos y en tallas desde XXS hasta XXL. Todos los modelos son seguros y muy fáciles de usar y están indicados para elevación de pacientes con un peso de hasta 300 kg. La elección del modelo y material dependerá de las necesidades del paciente y la posición de transferencia.

Inspección funcional

Inspección visual

Comprebe con regularidad las condiciones y funcionalidad del producto. Asegúrese de que el material no está dañado. Compruebe que el tejido no está gastado o deshilachado. Si hay signos de desgaste, el producto debe ser desechado.

Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales para todos los dispositivos de asistencia usados durante una transferencia.
Mantenga el manual donde sea accseible para los usuarios del producto.
No deje al paciente sin atención durante la transferencia.
Para evitar incomodidad y prevenir que el paciente se deslice fuera del arnés, ajuste cuidadosamente este.
Primero, cuelgue los bucles de la parte de atrás del arnés en la percha, y después los que están situados en los soportes para las piernas. Use una percha que haya sido previamente probada.Tenga en cuenta que puede haber riesgo de que el paciente se incline hacia delante cuando se usa un arnés con soporte de piernas estandar (sin separar).
El peso máximo de elevación lo determinará el peso que aguante el componente de menor peso máximo. Compruebe siempre los pesos máximos de los dispositivos.
Contacte a su disitribuidor en caso de dudas.

handicare

Manual no: 00885 En Ver. 2 101117

Descripción de producto: SlingBar

La SlingBar de RoMedic está fabricada en aluminio.
Las SlingBarare se usan en combinación con grúas móviles o estacionarias de Handicare. Los ganchos de elevación están equipados con pestañas de seguridad.



SlingBar S tiene 35cm de ancho y es apropiada para niños, pacientes de poco peso y para el entrenamiento de marcha.




SlingBar M tiene 45cm de ancho y es apropiada para la mayoría de tipos de elevación.



SlingBar L tiene 60cm de ancho y está indicada para pacientes que requieren un arnés más ancho. Esto incluiría pacientes sensibles a la presión, con hombros anchos u obesos.


Instalación de SlingBar en grúas móviles:

1 x 90000038 (Tornillo M8x50)
1 x 90000026 (Tuerca M8)
1 x 90000039 (Funda 10/8x38)
2 x 90000124 (Arandela para la tapa M10)
2 x 90000014 (Tapa M10)

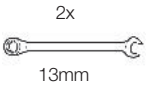

Instalación de SlingBar en grúas estacionarias:

1 x 90000038 (Tornillo M8x50)
1 x 90000026 (Tuerca M8)
1 x 90000039 (Funda 10/8x38)
2 x 90000124 (Arandela para la tapa M10)
2 x 90000014 (Tapa M10)

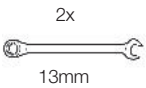

Carga máxima segura

Diferentes productos del mismo sistema de elevación (grúa, percha, arnés, báscula y otros accesorios de elevación) pueden tener diferentes cargas máximas de trabajo permitidas. La carga de trabajo máxima más pequeña siempre determina la carga máxima permitida para todo el conjunto. Compruebe siempre la carga máxima de cada accesorio antes de usarlo.
Ante cualquier duda contacte con su proveedor.

Limpieza

Cuando sea necesario, limpie la percha usando agua caliente o alcohol. No utilice productos de limpieza que contengan fenol o cloro, ya que esto podría dañar el material.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso.
Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España

T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

MediCauce