
StandingVest

SystemRoMedic™

Manual - Spanish



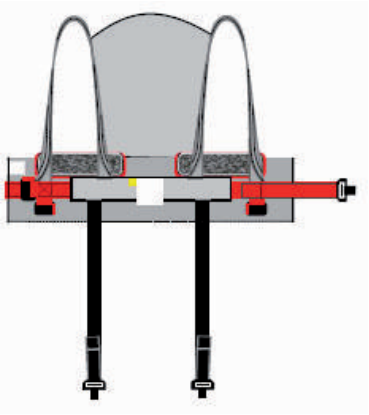

Carga máxima: 300kg/660lbs

StandingVest es un chaleco de elevación hecho especialmente para la elevación relacionada con el entrenamiento de pie con usuarios que utilizan férulas rígidas de piernas.
StandingVest está diseñado para proporcionar apoyo en el muslo, alrededor de la parte superior del cuerpo y por todo el recorrido hacia arriba hasta detrás de la cabeza, manteniéndose en su lugar gracias a la correa inguinal.

SystemRoMedic incluye un ámplio rango de arneses funcionales, confortables y de alta calidad que pueden ser adaptados para diferentes tipos de elevación y para pacientes con distintas necesidades. Los arneses están disponibles en muchos materiales distintos y en tallas desde XXS hasta XXL. Todos los modelos sonseguros y muy fáciles de usar y están indicados para elevación de pacientes con un peso de hasta 300 kg. La elección del modelo y material dependerá de las necesidades del paciente y la posición de transferencia.

Inspección funcional

Inspección visual y mecánica.

Compruebe regularmente el estado y la funcionalidad del arnés. Siempre chequee el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no están dañados. Compruebe que el textil no está deshilachado o desgastado. Ponga peso en el arnés para comprobar su fortaleza en enganches, asas, etc. Si hay signos de desgaste deseche el producto.


Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales de las ayudas técnicas y de transferencia.
Mantenga el manual en un lugar accesible.
No deje al paciente solo durante una transferencia.
Para asegurarse de la comodidad y seguridad en el paciente, elija la talla adecuada.
Enganche primero las sujeciones de la espalda y luego las de las piernas.
El peso máximo de elevación lo determinará el peso que aguante el componente de menor peso máximo.
Comprueba siempre los pesos máximos de los dispositivos.
Contacte a su disitribuidor en caso de dudas.

handicare

Manual no: 00879 En Ver. 4 110912

Descripción del StandingVest

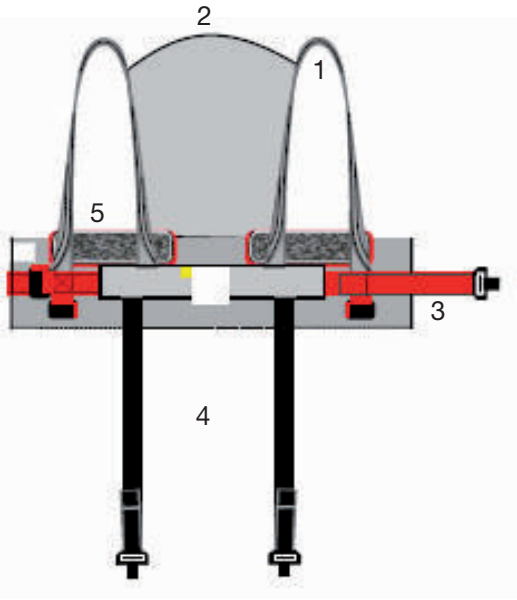


StandingVest consiste en:

1. Bucles de elevación (grises)
2. Soporte para espalda/cabeza
3. Cinturón (rojo)
4. Soportes inguinales (negros)
5. Acolchado para el cinturón

Los bucles de elevación serán los qu se conecten a la percha. El cinturón y el arnés de piernas están equipados con una hebilla de fácil desenganchado para una cómoda colocación. El soporte inguinal se ajusta alrededor de los muslos, de atrás hacia adelante. El cinturón está también acolchado a la altura de las axilas para prevenir la presión y fricción.

Colocar StandingVest cuando el paceinte está tumbado y con férulas rígidas en las piernas.

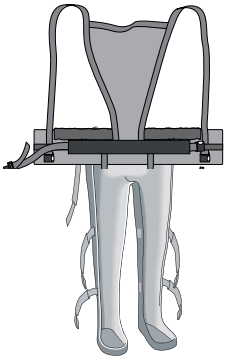


Coloque el StandingVest bajo la férula, después coloque al paciente en la férula de acuerdo con las instrucciones de ésta. Introduzca los brazos del paciente a través de los bucles de elevación del StandningVest. La sección central del StandingVest debería quedar alineada con la columna del paciente para proporcionar el mayor soporte en la cabeza.



Abroche y ajuste el cinturón.

Colocar el soporte inguinal en el paciente con férula rígida.

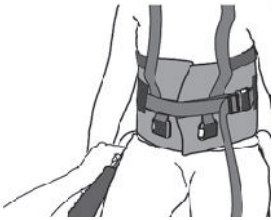

Cuando el cinturón se coloca alrededor de la parte superior del cuerpo del paciente, el soporte inguinal se aplica desde el lado y debajo de los muslos hasta la ingle.



El soporte inguinal se abrochará en la parte delantera.

Poner en pie al paciente.



Prepare al paciente explicándole el procedimiento.

Conecte los bucles de elevación y comience el levantamiento.

Nunca deje al paciente desatendido durante el proceso de elevación. Esté siempre atento a posibles señales del paciente. Pare la elevación si el paciente no está cómodo.

Las férulas deberán comprobarse de acuerdo a sus instrucciones mientras se estabiliza al paciente durante la elevación. Una vez el paciente se encuentre seguro en pie, puede rebajar la altura de elevación e incluso retirar el StandingVest.

Materiales:

Poliéster: Material duradero de baja fricción. Resiste altas temperaturas de lavado.

Cuidado del producto:

Lea la etiqueta del producto.



No utilice lejía.
Para alargar la vida de este producto déjelo secar o utilice un programa delicado de secadora.

Información de las tallas

Talla		XS/Naranja	S/Rojo	M/Amarillo	L/Verder	XL/Morado
Ancho del cinturón	cm	82	96	110	122	130
	inch	32	38	43	48	51
Peso usuario recomendado	lbs	33-88	44-110	88-132	110-176	154-220
	kg	15-40	20-50	40-60	50-80	70-100

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso.Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España

T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

MediCauce