

StretcherSling

SystemRoMedic™

Manual - Spanish

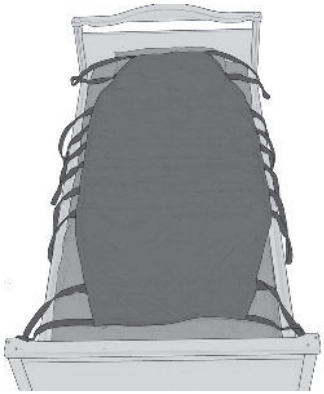

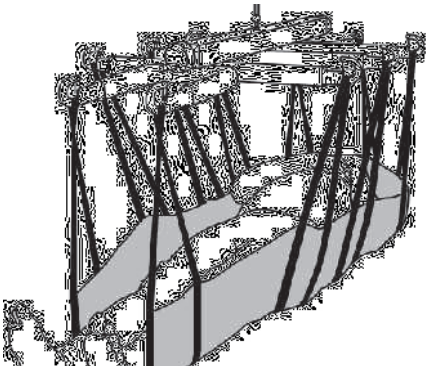

Carga máxima: 300kg/660lbs

StretcherSling es un arnés que se utiliza junto con grúas móviles o estacionarias y la StretcherBar de SystemRoMedic, una percha especialmente diseñada para llevar a cabo elevaciones horizontales para transferir el usuario en posición supina.StretcherSling tiene diez puntos de suspensión, cinco a cada lado del usuario, dando al usuario un apoyo distribuido uniformemente por debajo de todo el cuerpo

SystemRoMedic incluye un ámplio rango de arneses funcionales, confortables y de alta calidad que pueden ser adaptados para diferentes tipos de elevación y para pacientes con distintas necesidades. Los arneses están disponibles en muchos materiales distintos y en tallas desde XXS hasta XXL. Todos los modelos son seguros y muy fáciles de usar y están indicados para elevación de pacientes con un peso de hasta 300 kg. La elección del modelo y material dependerá de las necesidades del paciente y la posición de transferencia.

Inspección funcional

Inspección visual y mecánica.

Compruebe regularmente el estado y la funcionalidad del arnés. Siempre chequee el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no están dañados. Compruebe que el textil no está deshilachado o desgastado. Ponga peso en el arnés para comprobar su fortaleza en enganches, asas, etc. Si hay signos de desgaste deseche el producto.


Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales para todos los dispositivos de asistencia usados durante una transferencia.
Mantenga el manual donde sea accseible para los usuarios del producto.
No deje al paciente sin atención durante la transferencia.
Para evitar incomodidad y prevenir que el paciente se deslice fuera del arnés, ajuste cuidadosamente este.
Primero, cuelgue los bucles de la parte de atrás del arnés en la percha, y después los que están situados en los soportes para las piernas. Use una percha que haya sido previamente probada.
Tenga en cuenta que puede haber riesgo de que el paciente se incline hacia delante cuando se usa un arnés con soporte de piernas estandar (sin separar).
El peso máximo de elevación lo determinará el peso que aguante el componente de menor peso máximo.
Comprueba siempre los pesos máximos de los dispositivos.
Contacte a su disitribuidor en caso de dudas.


handicare

Manual no: 00865 En Ver. 3 101116


StretcherSling y StretcherBar, descripción del producto.

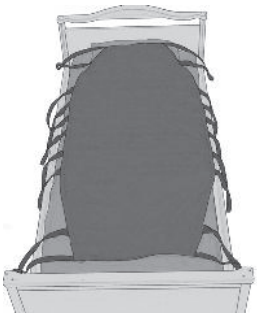


StretcherSling cuenta con una sábana de 177cm de lárgo con cinco correas de elevación a ambos lados, que harán que el peso del paciente se distribuya sobre diez correas.

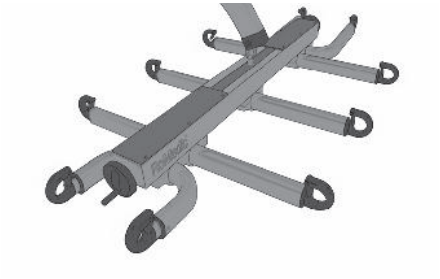

StretcherSling ha sido diseñada para usarse exclusivamente con la StretcherBar.
No se recomienda usar otras combinaciones.
La StretcherBar está hecha de aluminio. La sección central lleva incorporada un regulador de equilibrio y cinco barras de aluminio con un gancho de elevación en cada una. Vea el manual de StretcherBar para más detalle

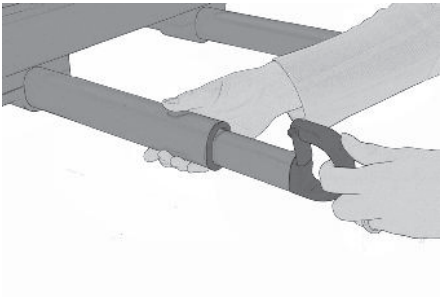


Los ganchos de elevación están equipados con pestañas de seguridad y todos los brazos de elevación pueden ser ajustados a la anchura del paciente tirando ligeramente hacia afuera antes de comenzar la elevación. Encuentre información más detallada en el manual de StretcherBar.

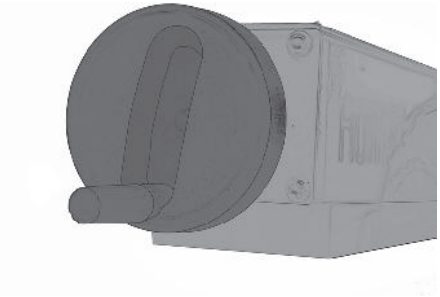


La sección central del StretcherBar incorpora un regulador de equilibrio. El quilibrio deseado se consigue girando una pequeña rueda en un sentido u otro. Encontrará más información en el manual de StretcherBar.


StretcherSling solo puede ser colocado o retirado con el paciente tumbado.

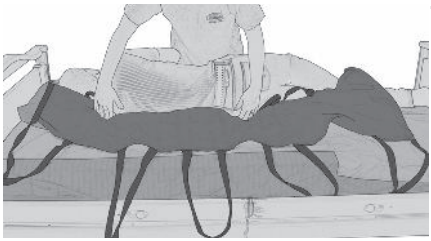
1


1. Gire el paciente hacia usted. Coloque el StretcherSling de modo que la etiqueta del producto quede boca abajo y la sección central del arnés paralela a la columna del paciete.
El borde superior del StretcherSling debería dar soporte a la cabeza.
Coloque el borde lateral del arnés tan debajo del paciente como sea posible. Introduzca también debajo las correas, de modo que pueda llegar a ellos una vez tumbe al paciente sobre el StretcherSling.

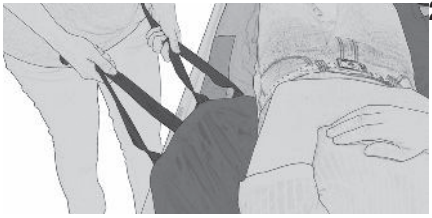
2

2. Tumbe de nuevo al paciente sobre el arnés y tire hacia afuera del lado que ha quedado debajo con ayuda de las correas.

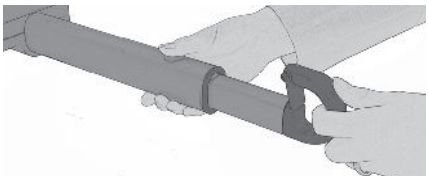
3

3. Si es necesario, ajuste el ancho de la Stretcher- Bar para ajustarlo al del paciente extendiendo los ganchos de elevaicón.
Después, enganche enganche las correas de elevación a la barra.

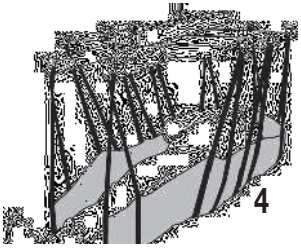
4


5


4. Comience la elevación hasta que las correas queden tensas. Haga una pausa para asegurarse de que todo está correcto antes de desplazar al paciente de la superficie donde estaba tumbado.

5. Si el paciente no se encuentra equilibrado después de comenzar con la elevación desde la superficie de apoyo, puede equilibrarlo mediante el regulador.

Retirar el StretcherSling


1

1. Libere todos los ganchos de elevación de la percha y colóquelos de modo que no interfieran en la retirada. Gire al paciente hacia usted y pliegue el StretcherSling bajo entre éste y la superficie de apoyo.

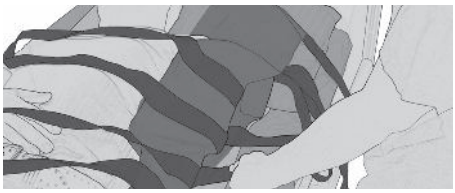
2

2. El tejido se deslizará sobre si mismo cuando tire hacia afuera del StretcherSling, después de volver a tumbar al paciente.

Colocación alternativa del StretcherSling

Si la situación no permitiera girar al paciente, comience colocando dos ReadySheets bajo el paciente (desde arriba hacia abajo) y después introduzca y arrastre el StretcherSling entre ambos.

Materiales:

Poliéster: material duradero de baja fricción. Resiste altas temperaturas de levado.
Red plástica: material diseñado para permitir el baño y la ducha. Puede desinfectarse usando alcohol.

Cuidado del producto:

Lea la etiqueta del producto.



No utilice lejía.
Para alargar la vida de este producto déjelo secar o utilice un programa delicado de secadora.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso. Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo, España

T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

MediCauce