
WalkingVest

SystemRoMedic™

Manual - Spanish



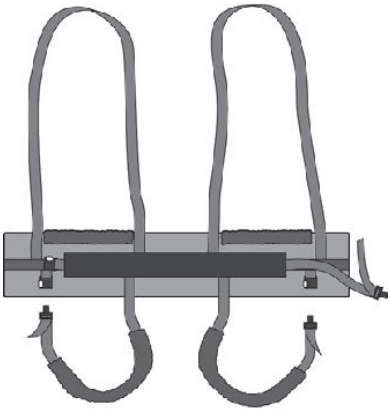

Carga máxima: 300kg/660lbs

WalkingVest es un arnés para el entrenamiento de la marcha facil de colocar para el cuidador y que proporciona sensación de segurirdad al usuario. Está diseñado para proporcionar apoyo en la parte superior del cuerpo y en las ingles, mediante un soporte inguinal durante la elevación y el entrenamiento de marcha. WalkingVest está diseñado para mantener activo al paciente de forma cómoda y segura.

SystemRoMedic incluye un ámplio rango de arneses funcionales, confortables y de alta calidad que pueden seradaptados para diferentes tipos de elevación y para pacientes con distintas necesidades. Los arneses estándisponibles en muchos materiales distintos y en tallas desde XXS hasta XXL. Todos los modelos son seguros y muy fáciles de usar y están indicados para elevación de pacientes con un peso de hasta 300 kg. La elección del modelo y material dependerá de las necesidades del paciente y la posición de transferencia.

Inspección funcional

Inspección visual y mecánica.

Compruebe regularmente el estado y la funcionalidad del arnés. Siempre chequee el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no están dañados. Compruebe que el textil no está deshilachado o desgastado. Ponga peso en el arnés para comprobar su fortaleza en enganches, asas, etc. Si hay signos de desgaste deseche el producto.


Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales de las ayudas técnicas y de transferencia.
Mantenga el manual en un lugar accesible.
No deje al paciente solo durante una transferencia.
Para asegurarse de la comodidad y seguridad en el paciente, elija la talla adecuada. Enganche primero las sujeciones de la espalda y luego las de las piernas.
El peso máximo de elevación lo determinará el peso que aguante el componente de menor peso máximo.
Comprueba siempre los pesos máximos de los dispositivos.
Contacte a su disitribuidor en caso de dudas.

handicare

Manual no: 00866 En Ver. 2 101112

Partes del WalkingVest

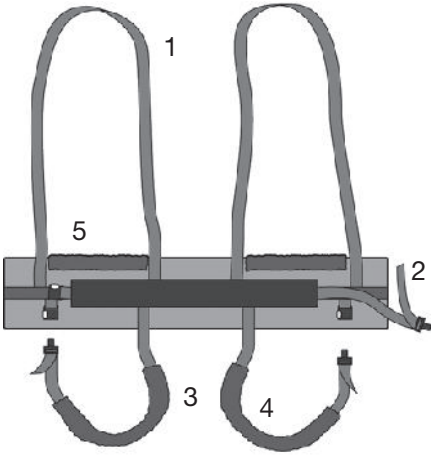

WalkingVest se divinalde en:


1. Bucles de elevación (gris)
2. Cinturón (rojo)
3. Soporte inguinal (negro)
4. Acolchado para el soporte inguinal
5. Acolchado para el cinturón

Los bucles de elevación serán los que se conecten a la percha. El cinturón y el arnés de piernas están equipados con una hebilla de fácil desenganchado para una cómoda colación. El arnés para piernas se ajusta alrededor de los muslos, de atrás hacia adelante. El arnés para piernas está acolchado para evitar la presión y fricción en la ingle. El cinturón está también acolchado a la altura de las axilas para prevenir la presión y fricción.

Colocación del WalkingVest en posición sentada




1. Coloque el WalkingVest alrededor de la parte superior del cuerpo con las hebillas hacia delante. El borde inferior del chaleco se coloca sobre las articulaciones de la cadera. Los brazos deben dejarse fuera. La línea que marca la mitad del cinturón debe estar alineada con la columna del paciente.

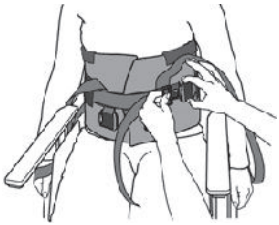

2. El cinturón debe ser conectado y ajustado a la talla del paciente.

Colocar el arnés para piernas es posición sentada.

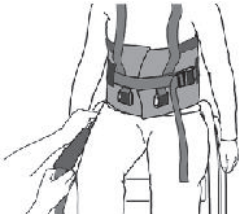

1. Cuando el cinturón se coloca en el tronco superior del paciente, el arnés para piernas se intorducirá desde los lados y por debajo de los muslos.



2. El arnés para piernas se abrochará en la parte delantera.



3. Ajuste el arnés para piernas acorde a la talla del paciente.

Levantamiento a posición herguida.



1. Prepare al paciente explicándole la forma de proceder. Nunca deje al paciente desatendido durante el proceso de elevación. Esté siempre atento a posibles señales del paciente. Pare la elevación si el paciente no está cómodo.



2. Cuando el paciente esté herguido, puede usarse algún tipo de soporte para ayudarle a caminar.

Materiales:

Poliéster: Material duradero de baja fricción. Resiste altas temperaturas de lavado.

Cuidado del producto:

Lea la etiqueta del producto.



No utilice lejía.
Para alargar la vida de este producto déjelo secar o utilice un programa delicado de secadora.

Información de las tallas

Talla		XXS/Gris	XS/Naranja	S/Rojo	M/Amarillo	L/Verde	XL/Morado	XXL/Blanco
Medida arnés	cm	60	70	82	96	110	122	142
	inch	24	27,5	32	38	43	48	56
Peso paciente recomendado	lbs	33-88	44-110	88-132	121-176	165-220	198-243	220-287
	kg	15-40	25-50	40-60	55-80	75-100	90-110	100-130

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso.Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España

T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

MediCauce