
AmpHBSling

SystemRoMedic™

Manual - Spanish



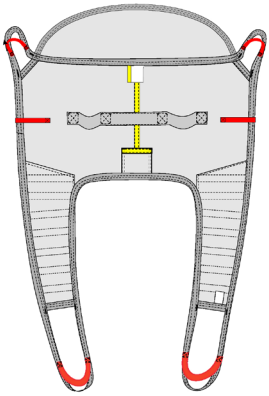

Carga máxima: 300kg/660lbs

AmpHBSling está diseñado para usar en las situaciones de elevación más comunes, como por ejemplo en las transferencias en posición sentada entre la cama y la silla de ruedas, incluso cuando un arnés sin soportes de piernas divididos fuese preferible, por ejemplo, al levantar un usuario con doble amputación alta de las piernas.
El respaldo alto garantiza que el usuario tenga apoyo desde el coxis hasta por encima de la cabeza y debajo de las piernas. Incorpora soportes de piernas divididos siendo fácil para el cuidador de poner y quitar, además el usuario no se sienta en el arnés

SystemRoMedic incluye un ámplio rango de arneses funcionales, confortables y de alta calidad que pueden ser adaptados para diferentes tipos de elevación y para pacientes con distintas necesidades. Los arneses están disponibles en muchos materiales distintos y en tallas desde XXS hasta XXL. Todos los modelos son seguros y muy fáciles de usar y están indicados para elevación de pacientes con un peso de hasta 300 kg. La elección del modelo y material dependerá de las necesidades del paciente y la posición de transferencia.

Inspección funcional

Inspección visual y mecánica.

Compruebe regularmente el estado y la funcionalidad del arnés. Siempre chequee el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no están dañados. Compruebe que el textil no está deshilachado o desgastado. Ponga peso en el arnés para comprobar su fortaleza en enganches, asas, etc. Si hay signos de desgaste deseche el producto.


Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales para todos los dispositivos de asistencia usados durante una transferencia.Mantenga el manual donde sea accseible para los usuarios del producto.No deje al paciente sin atención durante la transferencia. Para evitar incomodidad y prevenir que el paciente se deslice fuera del arnés, ajuste cuidadosamente este. Primero, cuelgue los bucles de la parte de atrás del arnés en la percha, y después los que están situados en los soportes para las piernas. Use una percha que haya sido previamente probada.Tenga en cuenta que puede haber riesgo de que el paciente se incline hacia delante cuando se usa un arnés con soporte de piernas estandar (sin separar). El peso máximo de elevación lo determinará el peso que aguante el componente de menor peso máximo. Comprueba siempre los pesos máximos de los dispositivos. Contacte a su disitribuidor en caso de dudas.

handicare

Manual no: 646 En ver. 1 150429

Colocar el arnés cuando el paciente está sentado el silla/silla de ruedas o en la cama

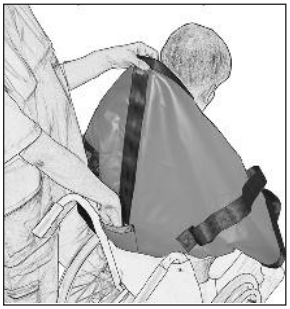

1




2

1. Sujete el arnés con una mano y coloque la otra en el bolsillo que hay en el borde inferior del arnés. Esto será más sencillo si el paciente puede inclinarse ligeramente hacia delante o se le puede ayudar a hacerlos. Conduzca el arnés hacia abajo por la espalda del paciente, deslizándolo por el respaldo de la silla/silla de ruedas o a lo largo de la cama preferiblemente hasta el cóccix. La sección central debe quedar paralela a la columna del paciente.

2. Con cuidado conduzca el arnés bajo la cadera del paciente. Para ello empuje el arnés en las esquinas formadas por el respaldo y el asiento de la silla.



3

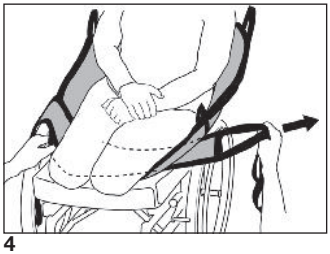


4

3. Coloque los soportes para piernas en la cara exterior de los muslos del paciente. Siéntese frente al paciente y tire del borde inferior del soporte para piernas, de modo que el arnés se deslice y quede bajo la cadera. Sujetar ligeramente las rodillas del paciente prevendrá que se resvale de la silla.

4. Tras asegurarse de que los soportes para piernas quedan a la misma longitud en ambos lados colóquelos bajo los muslos del paciente. Cruce los soportes para piernas y cuélguelos en la percha. Comience la elevación, cuando las correas queden tensas, pare y compruebe que todo está correcto antes de proseguir con la elevación.

Retirar el arnés cuando el paciente está sentado

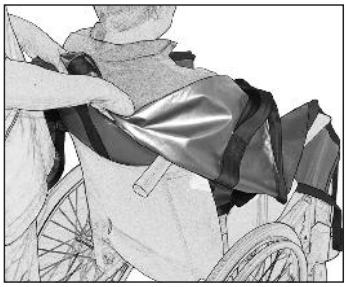


Doble el soporte para piernas para permitir que se deslice sobre si mismo cuando tire de ello hacia la parte exterior de los muslos.

Después tire del arnés hacia arriba siguiendo la espalda del paciente.

Colocar el arnés cuando el paciente está tumbado en cama, camilla o en el suelo




1

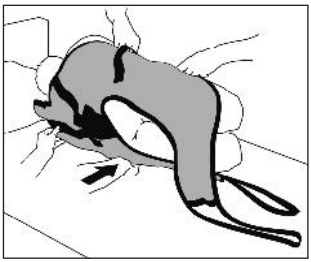


2

1. Gire al paciente hacia usted. Coloque el arnés de modo que la etiqueta quede hacia la superficie de apoyo y la sección central paralela la la comuna del paciente. El borde superior del arnés debe quedar los suficientemente arriba como para proporcionar soporte en la cabeza y el borde inferior debe quedar al nivel del cóccix. Coloque el arnés tan debajo del paciente como sea posible. Coloque también debajo los bucles de la sección posterior, de modo que pueda cogerlos una vez vuelva a tumbar al paciente.

2. Para reducir el número de pasos a la hora de colocar el arnés, puede doblar la sección trasera contra la espalda del paciente y colocar el soporte para piernas entre las rodillas cuando el paciente esté girado hacia usted, y después tirar de ellos una vez el paciente está sobre el arnés.

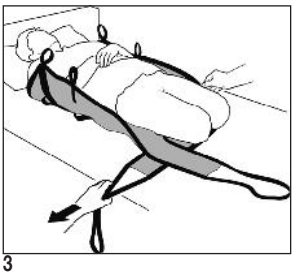


3

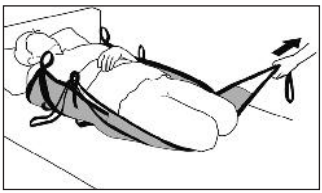

4

3. Tumbe de nuevo al paciente sobre el arnés y tire de la sección trasera y del soporte para piernas. El soporte para piernas quedará solapado bajo el paciente.

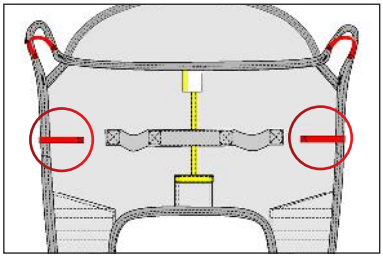


RECUERDE!

Nunca conecte los bucles de guía a la percha!

4. Pase las correas de los soportes para piernas a través de los bucles de guía que está en los bordes del arnés. Comience la elevación, pare y compruebe que todo está correcto antes de elevar al paciente de la superficie de apoyo.

Retirar el arnés cuando el paciente está recostado

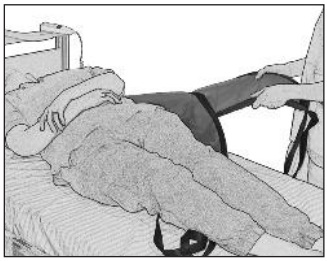


Gire al paciente hacia usted y doble el arnés bajo el paciente de modo que pueda deslizar el tejido hacia usted cuando tire de este una vez haya vuelto a tumbar al paciente.


Otras formas de colocación de los soportes de piernas



1

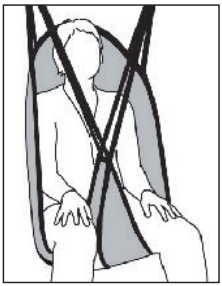

2

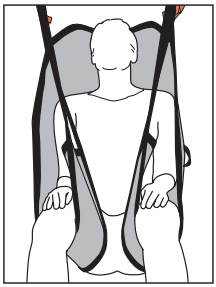

3

1. El soporte para piernas se coloca, solapado, bajo las piernas y las correas se pasan a través de los bucles de guía en el borde del arnés.

2. En la posición habitual las correas del soporte para piernas se cruzan antes de colgarlas en la percha.

3. Para un mayor acceso al área perineal del paciente, puede dejar sin cruzar las correas del soporte para piernas. Tenga sin embargo en cuenta que se corre el riesgo de que el paciente se delice hacia afuera en el arnés.

Materiales:

Poliéster: material duradero de baja fricción. Resiste altas temperaturas de levado.
Red de poliéster: es un material transpirable que puede ser dejado bajo el paciente si fuera necesario. Resiste altastemperaturas de lavado.

Cuidado del producto:

Lea la etiqueta del producto.



No utilice lejía.
Para alargar la vida de este producto déjelo secar o utilice un programa delicado de secadora.

Información de las tallas.

Los arneses pueden ser usados habitualmente tanto con dos como con cuatro puntos de suspensión. Es esencial asegurarse de que el ancho de la percha es apropiado para la talla del arnés y el estado y capacidad del paciente. Use el arnes recomendado para cada paciente a fin de garantizar su segurirdad e higiene.

Talla		S/Rojo	M/Amarillo	L/Verde	XL/Morado
Peso recomendado	bs	77-132	110-176	154-242	220-286
usuario	kg	35-60	50-80	70-110	100-130
Altura total	inch	35,5	38	39,5	39,5
arnés	cm	90	97	100	100
Medidas asiento	inch	14,5	17,5	19,5	23,5
arnés	cm	37	45	50	60

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso.
Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España

T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com

MediCauce