Movilización Segura de Pacientes



Ayudas Manuales de Transferencia

MediCauce
Technology for better care

SystemRoMedic™

Índice

TRANSFERENCIA

TABLAS DE TRANSFERENCIA
EasyGlide ____ 6
PantientSlider ____ 6

ESTERAS DE DESLIZAMIENTO
EasySlide (versión transfer) ____ 6
MoveMaster ____ 7
RollerSlide ____ 7

POSICIONAMIENTO

TABLAS DE POSICIONAMIENTO
EasyGlide, Oval (Mini)/EasyGlide, Oval ____ 8

ESTERAS DE DESLIZAMIENTO
OneWaySlide ____ 8
AutoSlide ____ 9

DISCOS GIRATORIOS
TurnTableSoft ____ 9

OTRAS AYUDAS POSICIONAMIENTO
SitWalk ____ 9
EasyGloves ____ 11

ESTERAS DE DESLIZAMIENTO
ReadySlide ____ 10
EasySlide/ EasySlide, disposable ____ 10-11
ReadySheet ____ 11

SÁBANAS DE DESLIZAMIENTO
Introducción ____ 12-13
Portfolios ____ 14
WendyLett sábana bajera deslizante ____ 15
WendyLett2Way travesera deslizante ____ 16
WendyLett4Way travesera deslizante ____ 17
WendyLean ____ 16
TurnSheet (2 partes) ____ 18

OTRAS AYUDAS DE POSICIONAMIENTO
TopSheet ____ 19
AntiSlip ____ 20
FootStool/ FootStoolCover ____ 20

SOPORTE

AYUDAS A LA BIPEDESTACIÓN
FlexiMove (Mini) ____ 21
FlexiGrip ____ 21

CINTURONES
FlexiBelt/ EasyBelt ____ 22
ReadyBelt ____ 22
WalkingBelt ____ 23

ACCESORIOS DE CINTURONES
SupportStraps ____ 23

AYUDAS A LA MARCHA
RoWalker400 ____ 23

DISCOS GIRATORIOS
TurnTable ____ 24
TurnSafe2 ____ 24
PantLock ____ 24

BIPEDESTACIÓN
ReTurn ____ 25-26
QuickMove ____ 27

SIMBOLOS DE ACTIVIDADES

- Tansferencia tumbado
- Lateralización tumbado
- Hacia el cabecero
- De tumbado a sentado
- Elevación desde suelo
- Apoyo a la marcha
- Entrenamiento bipedestación
- De cama a silla
- De cama a silla de ducha
- De silla a inodoro
- Bipedestación
- Posicionamiento en silla
- Entrar y salir del vehículo

BMAT (Bedside Mobility Assesment Tool)
Herramienta de Valoración de Movilidad para Transferencias

BMAT es una herramienta para la valoración de la movilidad de un usuario, diseñada y validada para transferencias. El BMAT permite a los profesionales sanitarios determinar la ayuda técnica apropiada para realizar una transferencia o posicionamiento de forma segura.

Es la única herramienta validada para la gestión de transferencias en cuidados sanitarios.

En este catálogo orientamos el producto adecuado para cada Nivel de Movilidad BMAT. En caso de duda no deje de contactar con nosotros.



Encuentra la ayuda correcta para cada situación

Ponemos a su disposición la siguiente matriz de selección de ayudas técnicas según el tipo de transferencia o movilización.

Índice/Matriz

	PRODUCTOS	Pag.	Transferencia Tumbado	Lateralización Tumbado	Hacia arriba al cabecero	de Tumbado a sentado	Elevación desde Suelo	Apoyo a la marcha	Entrenamiento bipe.	De cama a silla	De cama a silla de ducha	De silla a inodoro	Bipedestación	Posicionamiento en silla	Entrada y salida del vehículo	Posicionamiento en vehículo
	ACTIVIDAD															
TRANSFERENCIA	**TABLAS DE TRANSFERENCIA**															
	EasyGlide	6	✔							✔	✔	✔			✔	
	PatientSlider	6	✔													
	ESTERAS DE DESLIZAMIENTO															
	EasySlide (transfer version)	6	✔	✔												
	MoveMaster	7								✔	✔	✔				
	RollerSlide	7	✔													
POSICIONAMIENTO	**TABLAS DE POSICIONAMIENTO**															
	EasyGlide, Oval (Mini)/ EasyGlide, Oval	8	✔							✔	✔	✔		✔	✔	
	ESTERAS DE DESLIZAMIENTO															
	OneWaySlide	8												✔		
	AutoSlide	9													✔	✔
	DISCOS GIRATORIOS															
	TurnTableSoft	9				✔										✔
	OTRAS AYUDAS DE POSICIONAMIENTO															
	SitWalk	9												✔		
	Easy Gloves	11	✔	✔	✔					✔						
	ESTERAS DE DESLIZAMIENTO															
	ReadySlide	10		✔	✔									✔		
	EasySlide/ EasySlide, disposable	10-11	✔	✔	✔					✔				✔		
	ReadySheet	11	✔		✔	✔									✔	
	SÁBANAS DE DESLIZAMIENTO															
	WendyLett sábana bajera deslizante	15	✔													
	WendyLett2Way travesera deslizante	16		✔		✔										
	WendyLett4Way travesera deslizante	17		✔	✔	✔										
	WendyLean	16			✔	✔										
	TurnSheet (dos partes)	18		✔	✔											
	OTRAS AYUDAS DE POSICIONAMIENTO															
	TopSheet	19		✔												
	AntiSlip	20			✔								✔			
	FootStool/ FootStoolCover	20								✔	✔	✔		✔		

Para arneses vea el catálogo de grúas y arneses ▶

Índice/Matriz

ACTIVIDAD

PRODUCTOS	Pag.	Transferencia Tumbado	Lateralización Tumbado	Hacia arriba al cabecero	de Tumbado a sentado	Elevación desde Suelo	Apoyo a la marcha	Entrenamiento bipe.	De cama a a silla	De cama a silla de ducha	De silla a inodoro	Bipedestación	Posicionamiento en silla	Entrada y salida del vehículo	Posicionamiento en vehículo
PRODUCTOS DE APOYO															
AYUDAS A LA BIPEDESTACIÓN															
FlexiMove (Mini)	21			✔	✔				✔		✔	✔			
FlexiGrip	21				✔				✔						
CINTURONES															
FlexiBelt/ EasyBelt	22						✔		✔	✔	✔	✔			
ReadyBelt	22						✔				✔	✔	✔		
WalkingBelt	23						✔								
ACCESORIOS DE CINTURONES															
SupportStraps	23						✔	✔							
AYUDAS A LA MARCHA															
RoWalker400	23						✔	✔							
DISCOS GIRATORIOS															
TurnTable	24								✔	✔	✔				
TurnSafe2	24							✔	✔	✔	✔	✔	✔		
BIPEDESTACIÓN															
ReTurn	25-26							✔	✔	✔	✔	✔	✔		
QuickMove	27							✔	✔	✔	✔	✔	✔		
GRÚAS (VER CATÁLOGO DE GRÚAS)															
GRÚAS DE BIPEDESTACIÓN															
MiniLift	Otro Catálogo							✔	✔	✔	✔	✔	✔		
ThoraxSling	Otro Catálogo							✔	✔	✔	✔	✔	✔		
GRÚAS DE TECHO															
RiseBasic/ RiseAtlas	Otro Catálogo	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
SISTEMAS DE RAILES															
Castor/ Helena, estructuras para railes	Otro Catálogo	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
MilkyWay, sistema de railes	Otro Catálogo	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
GRÚAS MÓVILES DE ELEVACIÓN															
Eva	Otro Catálogo	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
EvaDrive	Otro Catálogo	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
Carina350	Otro Catálogo	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
Vega505EE	Otro Catálogo	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		

Transferencia

Deslizamiento



EasyGlide 5050



EasyGlide 5060

EasyGlide

EasyGlide es una tabla de transferencia flexible y dividida en tres partes que se pueden doblar, facilitando su colocación sobre las ruedas de la silla.



Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
5020	EasyGlide	60 x 33 cm, Tres partes	1 Ud
5050	EasyGlide	75 x 33 cm, Tres partes	1 Ud
5060	EasyGlide	60 x 25 cm	1 Ud
5070	EasyGlide	45 x 20 cm	1 Ud





EasyGlide 5000

EasyGlide

Para transferencia horizontal en decúbito.



Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
5000	EasyGlide, extra largo	120 x 60 cm	1 Ud





Tabla MD-PSS

PatientSlider

Tabla de transferencia larga, radiotransparente y con tratamiento antiestático.

Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
MD-PSS	PatientSlider	Tabla transferencia 183 x 56 cm x 5 mm	1 Ud





EasySlide 1030

EasySlide (transfer version)

EasySlide (190 x 60) es una estera de deslizamiento que se usa fundamentalmente para transferencias. Su interior se compone de nuestro material exclusivo ULF (Ultra Low Friction). Reduce la fricción y permite al cuidador mover al paciente prácticamente hacia cualquier superficie, sin necesidad de agarre y con el mínimo esfuerzo.



Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
1020	EasySlide	190 x 60 cm	1 Ud
1030	EasySlide (1020 + 1051)	190 x 60 cm completo	1 Set

Accesorios

1051	Funda protectora	Para 1020, 1030	1 Ud
1055	Funda desechable	Para 1020, 1030	2 x 50 Uds
1151	Funda protectora	Para 1120*, 1130*	1 Ud
1155	Funda desechable	Para 1120*, 1130*	2 x 90 Uds
1085	WallRack	Para colgar la esteras y fundas desechables para EasySlide y RollerSlide	1 Ud



Funda Protectora

Funda desechable



WallRack

** 1120, 1130, EasySlide 100 x 60, descatalogadas*





MoveMaster

MoveMaster es una estera de deslizamiento abierta, con asas situadas en un extremo, que facilitan las transferencias para un solo cuidador.
Costuras reforzadas para mayor durabilidad.
El acolchado suave permite transferencias sencillas y confortables.



Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
2090	MoveMaster	47 x 120 cm, 3 asas	1 Ud





RollerSlide 9145



RollerSlide, flexi 9148

RollerSlide


RollerSlide se utiliza para transferencias en decúbito (posición tumbada) entre dos superficies, por ejemplo, de la cama a la mesa de rayos X, camilla de operaciones, carro de ducha, a una camilla o similares.



RollerSlide salva distancias de hasta 20 cm. La tabla interna garantiza una transferencia estable, incluso cuando hay hueco y/o diferencia de altura. Incluye una funda exterior fabricada en tejido ULF (Ultra Low Friction), un exclusivo material que se desliza alrededor de la tabla durante la transferencia. Este material reduce la fricción bajo el usuario, facilitando la transferencia y evitando que el cuidador realice elevaciones manuales innecesarias. RollerSlide asegura transferencias muy suaves para usuarios dependientes o sensibles al dolor.

RollerSlide está disponible en versiones plegables y fijas. Dispone de asas en los extremos para un fácil manejo, transporte y almacenamiento.

Además están disponibles como accesorio fundas desechables como medida extra de protección e higiene.

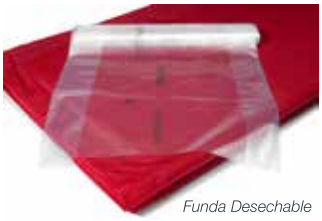

Funda Desechable

Art. Nº.	Producto	Descripción		Unidades
9145	RollerSlide	175 x 50 cm, plegable, larga	4,1 kg	1 Ud.
9155	RollerSlide	85 x 50 cm, corta	2,2 kg	1 Ud.
9148	RollerSlide, flexi	175 x 50 cm, plegable, larga	3,9 kg	1 Ud.
9158	RollerSlide, flexi	85 x 50 cm, corta	2,0 kg	1 Ud.
9120	RollerSlide, light	175 x 50 cm, plegable, larga	2,0 kg	1 Ud.
9110	RollerSlide, light	85 x 50 cm, corta	1,1 kg	1 Ud.
9170	RollerSlide, flexi	175 x 60 cm, plegable, larga	5,7 kg	1 Ud.
9175	RollerSlide, flexi	85 x 60 cm, corta	3,2 kg	1 Ud.



WallRack

Accesorios

9136	Funda deslizante	Para 9120, 9145, 9148	1 Ud.
9156	Funda deslizante	Para 9110, 9155, 9158	1 Ud.
9172	Funda deslizante	Para 9170	1 Ud.
9177	Funda deslizante	Para 9175	1 Ud.
9138	Funda desechable (largo)	Para 9120, 9145, 9148	2 x 50 Uds.
9168	Funda desechable (corto)	Para 9110, 9155, 9158	2 x 115 Uds.
1085	WallRack	Para colgar las fundas desechables, los EasySlide y RollerSlide	1 Ud.




Posicionamiento

Deslizamiento



EasyGlide 5045


EasyGlide Oval (Mini)

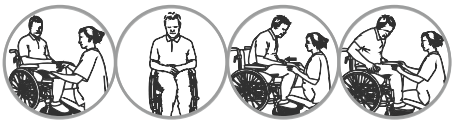

EasyGlide Oval Mini son 2 tablas de posicionamiento ovales concebidas para ser utilizadas conjuntamente.
Tamaño pequeño y práctico, de forma redondeada y superficies lisas. Fácil de tener siempre a mano.
Rápidas y sencillas de colocar y quitar, disponen de una guía rápida impresa en su cara interna.
Elimina la fricción debajo del usuario y hace que sea más fácil reposicionarlo hacia atrás en la silla o colocarle las perneras del arnés.

Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
5045	EasyGlide, oval	45 x 20 cm	2 Uds



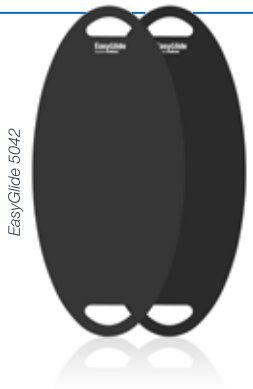

EasyGlide 5042

EasyGlide, Oval



EasyGlide, Oval es una tabla para el posicionamiento o movilización del usuario en cama. También para transferencias en posición supina de una cama a otra y para la colocación de arneses.

Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
5040	EasyGlide, oval	85 x 39 cm	1 ud
5042	EasyGlide, oval	85 x 39 cm	2 uds





OneWaySlide 2075



OneWaySlide 2069

OneWaySlide



OneWaySlide es una estera de deslizamiento con superficie suave y acolchada, muy cómoda para sentarse.
El tejido de la cara interna es unidireccional para evitar que el usuario se resbale hacia delante.
Correas de fijación para fijarla a la mayoría de sillas.

Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
2074	OneWaySlide	110 x 30 cm, 6 asas	1 Ud
2075	OneWaySlide	130 x 40 cm, 6 asas	1 Ud
2076	OneWaySlide	130 x 45 cm, 6 asas	1 Ud
2077	OneWaySlide	130 x 55 cm, 6 asas	1 Ud
2069	OneWaySlide, tubular	50 x 40 cm	1 Ud
2070	OneWaySlide, tubular	50 x 45 cm	1 Ud



Deslizamiento



AutoSlide

AutoSlide es una ayuda para el acceso y el reposicionamiento en el vehículo. Tiene 2 superficies: una externa suave y una cara interna fabricada en nuestro exclusivo tejido ULF (Ultra Low Friction). Incluye cintas de anclaje al asiento del coche.



Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
8100	AutoSlide	46 x 46 cm	1 Ud

Discos giratorios



TurnTableSoft 5086

TurnTableSoft

TurnTableSoft es un disco giratorio que facilita la rotación en posición sentada. Tanto para entrar y salir de la cama, como para posicionarse en un vehículo. Está fabricado en dos partes con un material de baja fricción en el interior, permitiendo que una gire suavemente sobre la otra. Es un tejido duradero y resistente a la suciedad.



Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
5086	TurnTableSoft	Ø 45 cm	1 Ud
5087	TurnTableSoft	Ø 40 cm	1 Ud

Otras ayudas de posicionamiento



SitWalk 6080

SitWalk

SitWalk es undispositivo para el reposicionamiento de usuarios en posición sentada. El SitWalk se coloca bajo las piernas del usuario y las asas permiten al cuidador asistir la reubicación en la superficie del asiento, quedando el usuario bien posicionado.



Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
6080	SitWalk	140 x 13 cm, 8 asas	1 Ud


Posicionamiento

Deslizamiento



ReadySlide

ReadySlide es una estera de deslizamiento plegable y muy fácil de usar que facilita varios tipos de movilizaciones. Fabricada en nuestro material exclusivo de deslizamiento ULF (Ultra Low Friction).

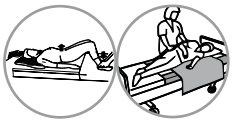

Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
11240	ReadySlide	50 x 60 cm, poliamida	1 Ud
11250	ReadySlide	70 x 70 cm, poliamida	1 Ud
11230	ReadySlide	110 x 70 cm, poliamida	1 Ud
11235	ReadySlide	110 x 90 cm, poliamida, extra ancho	1 Ud
11236	ReadySlide	110 x 110 cm, poliamida	1 Ud
11241	ReadySlide	130 x 90 cm, poliamida	1 Ud
11210	ReadySlide	195 x 70 cm, poliamida	1 Ud
11215	ReadySlide	195 x 70 cm, poliamida, con asas	1 Ud



EasySlide 2010



EasySlide 2015



EasySlide 1220



EasySlide 1470



EasySlide 1420

EasySlide

EasySlide (50 x 60), (50 x 70) y (25 x 60) son esteras de deslizamiento con una superficie suave y acolchada que permiten transferencias confortables. El material de deslizamiento ULF reduce la fricción bajo el usuario.



EasySlide (100 x 70) está indicada para facilitar el deslizamiento del usuario en transferencias y movilizaciones en decúbito supino y sedestación.

Reduce la fricción en los hombros y la cadera, lo que disminuye el riesgo de úlceras por presión. Promueve la independencia y mejora la calidad de vida del usuario y el trabajo de los cuidadores.



EasySlide de 140 x 90 / 200 x 90 cm es una estera de deslizamiento con un acolchado adicional para reducir el riesgo de úlceras por presión.

El exterior está hecho de microfibra agradable al tacto, algo especialmente importante para usuarios que están permanentemente encamados y/o con dolor.



Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
2010	EasySlide	50 x 60 cm, Poliéster	1 Ud
2020	EasySlide	50 x 60 cm, Microfibra	1 Ud
2021	EasySlide	50 x 70 cm, Microfibra	1 Ud
2015	EasySlide	25 x 60 cm, Poliéster	1 Ud
1220	EasySlide	100 x 70 cm, Microfibra	1 Ud
1420	EasySlide	140 x 90 cm, 2 cintas se anclaje, Microfibra	1 Ud
1470	EasySlide	200 x 90 cm, 4 cintas se anclaje, Microfibra	1 Ud

Accessorios

2051	Funda protectora	Para 2010, 2020, 2030, Poliéster	1 Ud
2055	Funda desechable	Para 2010, 2020, 2030, Plástico	100 Uds
1085	WallRack	Dispensador de fundas desechables y colocación del EasySlide y RollerSlide	1 Ud



Funda desechable





WallRack

Deslizamiento



EasySlide, desechable

La EasySlide Desechable es una nueva y versátil estera de deslizamiento fabricada en un material delgado y flexible, muy fácil de usar. Resistente y duradero, con propiedades deslizantes. No se disuelve con el agua, por lo que es una solución perfecta para transferencias en aseo o ducha.



Facilita las transferencias al usuario y al cuidador, eliminando elevaciones manuales innecesarias.



EasySlide, desechable, 2040


Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
2040	EasySlide, desechable	50 x 70 cm	2 x 60 Uds





ReadySheet

ReadySheet es un dispositivo de asistencia simple y versátil para la colocación de arneses y el reposicionamiento de usuarios. Puede ser abierta o tubular y de diferentes tamaños, pero todas llevan asas para facilitar el posicionamiento.
Está fabricada en nuestro material exclusivo de deslizamiento ULF (Ultra Low Friction).

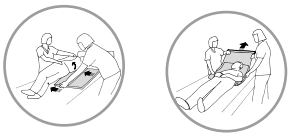

Permite llevar a cabo transferencias fáciles y seguras con muy poco esfuerzo y sin ningún tipo de elevación manual innecesaria. Es fácil y cómoda para el usuario y protege la espalda y los hombros del cuidador. Reduce la fricción bajo el usuario.

Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
11412	ReadySheet	180 x 110 cm	1 ud.
11415	ReadySheet,	180 × 110 cm	1 par
11425	ReadySheet	200 × 90 cm	1 ud.
11430	ReadySheet	195 × 75 cm	1 ud.
11440	ReadySheet	175 × 75 cm	1 ud.
11445	ReadySheet	175 x 75 cm Tubular	1 ud.
11450	ReadySheet	150 × 75 cm	1 ud
11455	ReadySheet,	150×75 cm	1 par

Guantes



EasyGloves


EasyGloves son guantes de deslizamiento para reducir la fricción y cizalla en diversas tareas realicionadas con las transferencias y el posicionamiento.
Además, contribuyen a la colocación de arneses y aumentan el confort del usuario tras un cambio de posición o al articular la cama.

Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
CA36	EasyGloves	Guantes de deslizamiento	1 Par




Guía de Sábanas


Seleccion de la zona deslizante según las necesidades del usuario

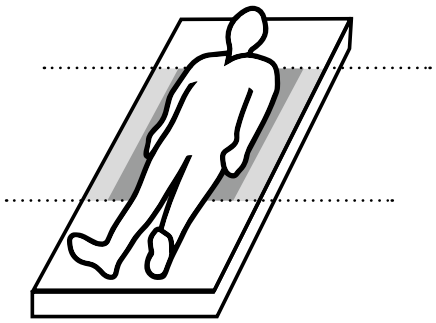

Zona deslizante en caderas: usuarios más activos/usuarios menos pesados que necesitan solo deslizamiento en la pelvis.

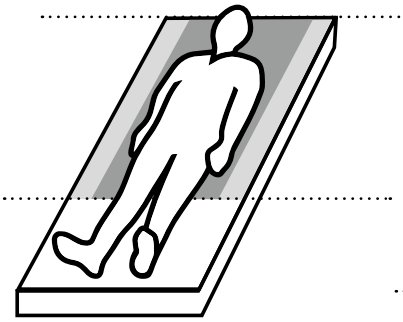


Zona deslizante caderas y cabeza: usuarios menos activos o pesados que necesitan delizamiento desde la caderas hasta la cabeza.

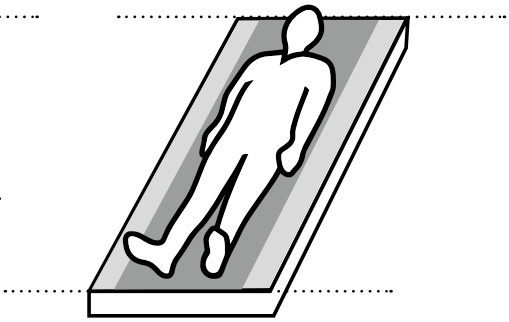

Zona deslizante completa: Usuarios pasivos/con necesidad de cuidados constantes y que necesitan deslizamiento en todo el cuerpo.

Seleccion del ancho correcto de la sábana para una cama concreta

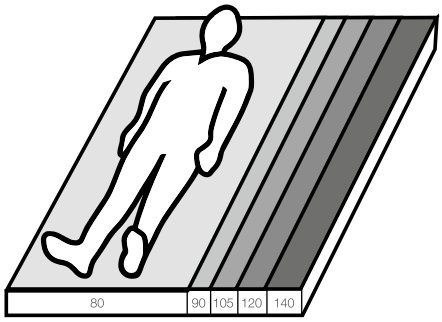



Ancho de cama

Las dimensiones del colchón son importantes para optimizar la superficie deslizante de la sábana y estimular la actividad del usuario.
Para las sábanas traveseras deslizantes no es necesario tener en cuenta al ancho de la cama.

Selección de las funcionalidades



Protección de incontinencia (Empapador)

Los empapadores se colocan directamente sobre una sabana bajera convencional. Los protectores de incontinencia son lavables y están disponibles con o sin función de deslizamiento. El material es muy absorbente y distribuye el fluido en una amplia superficie.



Asas

Algunas de las sábanas están equipadas con asas para combinarse con grúas de elevación, permitiendo realizar reposicionamientos y lateralizaciones sin ningún esfuerzo.



Elástica


Las sábanas con este símbolo disponen de borde elástico para sujetarse al colchón. Otros modelos disponen de cintas para anclarse a la superficie de descanso.

Instrucciones de lavado


Elija el producto teniendo en cuenta las condiciones de lavado.



Selección de la combinación correcta

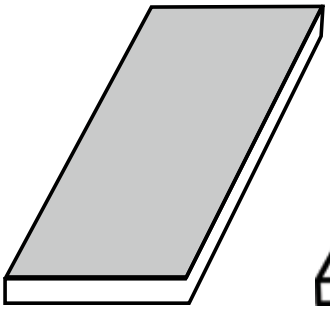


Protector de colchón.
Colocado sobre el propio colchón.

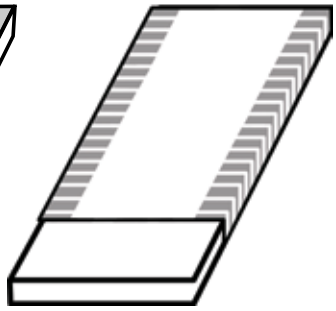

Sábana de deslizamiento (bajera).
Tejido satinado en el centro y opción de zona antideslizante en los lados. Deslizamiento en la dirección de las rayas de la sábana.



Sábana de deslizamiento (bajera) + travesera deslizante 2 direcciones.
Facilitan las lateralizaciones y reduce el calor del satinado de la sábana deslizante. Deslizamiento en la dirección de las rayas de las sábanas.

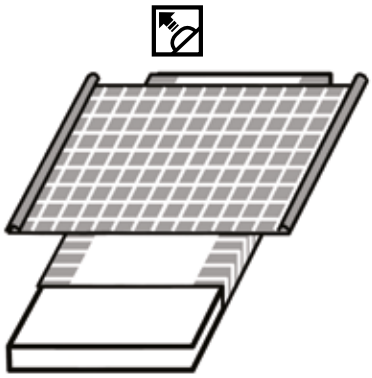

Sábana de deslizamiento (bajera) + travesera deslizante 4 direcciones.
Ambas sábanas disponen de superficie deslizante. Con esto se obtiene un deslizamiento total.

Uso de las combinaciones



Para paciente con cierta capacidad de girarse por sí mismos. Con estos dispositivos se aumenta la autonomía, facilitando movimientos autónomos.




La combinación de una sabana bajera deslizante con la travesera de 2 direcciones se utiliza con usuarios menos activos o más corpulentos que requieren mayor asistencia.



La combinación de sábana bajera deslizante con la sabana travesera deslizante de 4 direcciones se usa con pacientes muy pasivos y/o muy pesados que necesitan un nivel de cuidados alto. Esta combinación se usa habitualmente con grúa durante las tareas de higiene o cuando se coloca un arnés.

Encuentra la sábana correcta

Ejemplo de producto en el listado:

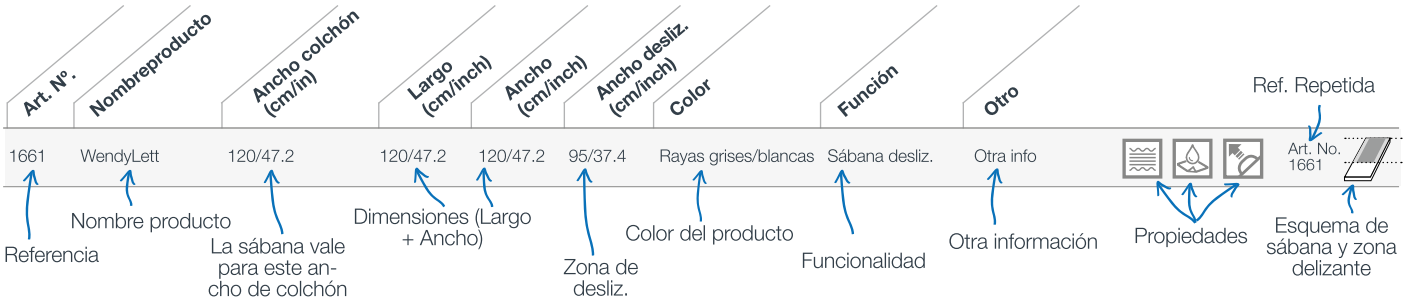

Posicionamiento

Deslizamiento

WendyLett portfolio



WendyLett
Sábana bajera deslizante
página 15



WendyLett2Way
Sábana travesera deslizante
2 direcciones
página 16




WendyLett4Way
Sábana travesera
deslizante
página 17

+



Gama WendyLett inco
WendyLett 4Way, inco
Travesera deslizante
página 17

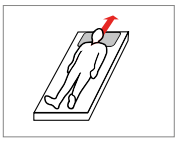

WendyLean
Funda almohada
página 16






Los productos WendyLett son nuestra solución patentada, de alta calidad, desarrollados para falicitar el reposicionamiento y lateralizaciones de pacientes en cama.
La gama está compuesta por tres tipos de sábanas deslizantes que se complementan entre ellas, para contribuir a hacer la vida diaria más fácil a las personas con necesidades especiales y sus cuidadores.

WendyLett Sábana bajera deslizamiente

WendyLett es una sábana bajera de deslizamiento fabricada combinando diferentes tejidos: un algodón suave que proporciona comodidad al usuario y un poliéster resistente y suave en su área central que asegura su funcionalidad y durabilidad. La parte central de WendyLett facilita el movimiento del usuario en cualquier dirección, contribuye al resposicionamiento de la espalda al incorporar el cabecero de la cama y mejora el pivote de la pelvis cuando el paciente se sienta en el borde de la cama.
Contribuye a la prevención de úlceras al reducir la fricción en los puntos de apoyo claves. Se coloca en la cama como una sábana bajera normal, quedando el área central deslizante en contacto con el usuario.

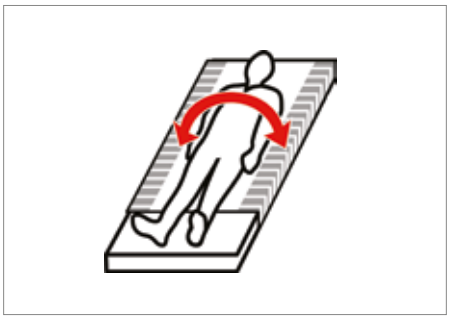





Productos WendyLett sábana de deslizamiento (bajera)

Art. Nº.	Producto	Ancho colchón (cm/in)	Largo (cm/inch)	Ancho (cm/inch)	Ancho desliz. (cm/inch)	Color	Función	Otro	Sábana / Largo / Área Desliz.
1609	WendyLett	80–90/31.5–35.4	100/39.4	200/78.7	60/23.6	Blanca	Sábana desliz.		Art. No. 1609
1614	WendyLett	80–90/31.5–35.4	140/55.1	200/78.7	60/23.6	Blanca	Sábana desliz.		Art. No. 1614
1629	WendyLett	80–90/31.5–35.4	100/39.4	200/78.7	60/23.6	Rayas grises/blancas	Sábana desliz.		Art. No. 1629
1634	WendyLett	80–90/31.5–35.4	140/55.1	200/78.7	60/23.6	Rayas grises/blancas	Sábana desliz.		Art. No. 1634
1641	WendyLett	90/36	200/78.7	90/36	70/27.6	Rayas grises/blancas	Sábana desliz.		Art. No. 1641
1639	WendyLett	105/41.3	200/78.7	200/78.7	70/27.6	Rayas grises/blancas	Sábana desliz.		Art. No. 1639
1651	WendyLett	105/41.3	200/78.7	105/41.3	80/31.5	Rayas grises/blancas	Sábana desliz.		Art. No. 1651
1667	WendyLett	120/47.2	100/39.4	220/86.6	100/39.4	Rayas grises/blancas	Sábana desliz.		Art. No. 1667
1668	WendyLett	120/47.2	140/55.1	220/86.6	100/39.4	Rayas grises/blancas	Sábana desliz.		Art. No. 1668
1669	WendyLett	120/47.2	200/78.7	220/86.6	100/39.4	Rayas grises/blancas	Sábana desliz.		Art. No. 1669
1661	WendyLett	120/47.2	200/78.7	120/47.2	95/37.4	Rayas grises/blancas	Sábana desliz.		Art. No. 1661
1671	WendyLett	140/55.1	200/78.7	140/55.1	110/43.3	Rayas grises/blancas	Sábana desliz.		Art. No. 1671
1681	WendyLett	-	200/78.7	365/143.7	70/27.6	Rayas grises/blancas	Sábana desliz.	Extra ancha	Art. No. 1681

Material: Poliéster, algodón, satín.
Instrucciones: No usar suavizante. Evitar secar en secadora para mayor durabilidad del producto.

60-90°

BMAT 1 BMAT 2 CE Material Sanitario clase 1

Deslizamiento

WendyLett2Way Sábana travesera deslizante 2 direcciones

WendyLett2Way es una sábana travesera diseñada para ser utilizada junto con la sábana bajera de deslizamiento WendyLett.
El deslizamiento es de forma lateral, siguiendo la dirección de las rayas.

Impide que el usuario se deslice hacia arriba o hacia abajo en la cama. Disponible en dos tonalidades de gris, con rayas finas blancas y también en diferentes tamaños.







Productos WendyLett2Ways Sábana travesera deslizante 2 direcciones


Art. Nº.	Producto	Ancho colchón (cm/in)	Largo (cm/inch)	Ancho (cm/inch)	Ancho desliz. (cm/inch)	Color	Función	Otro	Dirección deslizamiento
1620	WendyLett2Way	-	90/35.4	180/70.9	-	Blanca	Travesera 2 direc.		Art. No. 1620
1631	WendyLett2Way	-	100/39.4	200/78.7	-	Rayas blancas/grises	Travesera 2 direc.		Art. No. 1631
1636	WendyLett2Way	-	140/55.1	200/78.7	-	Rayas blancas/grises	Travesera 2 direc.		Art. No. 1636

Material: Poliéster, algodón, satín.
Instrucciones: No usar suavizante. Evitar secar en secadora para mayor durabilidad del producto.

Material Sanitario clase 1

WendyLean Funda de almohada

WendyLean es una herramienta muy simple que está siempre a mano. Se puede combinar con FlexiMove de SystemRoMedic en la movilización hacia el cabecero de la cama.
Las asas autorretráctiles, tecnología patentada, no son las únicas sutilezas de esta funda de almohada; son muy prácticas para ayudar al usuario a moverse hacia el cabecero de la cama o sentarse en el borde de la misma.

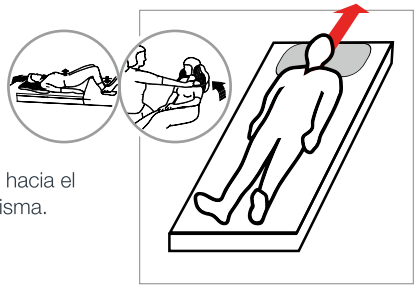



Suave y deslizante con asas para mayor ayuda

Productos WendyLean funda de almohada para posicionamiento

Art. Nº.	Producto	Ancho colchón (cm/in)	Largo (cm/inch)	Ancho (cm/inch)	Ancho desliz. (cm/inch)	Color	Función	Otro	Dirección deslizamiento
1680	WendyLean	-	50/19.7	60/23.6	-	Rayas grises/blancas	Funda almohada	2 asas	Art. No. 1680

Material: Parte superior: Poliéster y algodón. Parte inferior: Algodón/poliester. Trasera: Satén
Instrucciones: No usar suavizante. Evitar secar en secadora para mayor durabilidad del producto.


Material Sanitario Clase 1

WendyLett4Way Sábana travesera deslizante 4 direcciones

WendyLett4Way es una sábana travesera diseñada para ser utilizada junto con la sábana bajera de deslizamiento WendyLett.
El deslizamiento entre ellas permite movimientos multidireccionales en la cama, siguiendo el dibujo de los cuadros.

WendyLett4Way se coloca sobre la sábana de deslizamiento WendyLett. La combinación de ambas ayuda al cuidador a voltear al usuario hacia los lados en la dirección de las rayas.



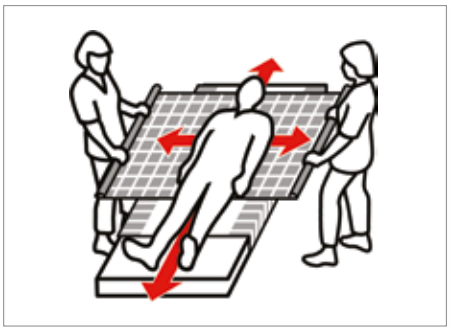





Productos WendyLett4Ways Sábana travesera deslizante 4 direcciones

Art. Nº.	Producto	Ancho colchón (cm/in)	Largo (cm/inch)	Ancho (cm/inch)	Ancho desliz. (cm/inch)	Color	Función	Otro		Dirección deslizamiento
1657	WendyLett4Way	-	140/55.1	190/74.8	-	Cuadros blancos/grises	Travesera desliz.		2 x 7 asas	Art. No. 1657
1637	WendyLett4Way	-	140/55.1	200/78.7	-	Cuadros blancos/grises	Travesera desliz.			Art. No. 1637
1647	WendyLett4Way	-	200/78.7	200/78.7	-	Cuadros blancos/grises	Travesera desliz.			Art. No. 1647
1652	WendyLett4Way	-	140/55.1	260/102.4	-	Cuadros blancos/grises	Travesera desliz.		Colchón Ancho	Art. No. 1652

Material: Poliéster, algodón, satín.
Instrucciones: No usar suavizante. Evitar secar en secadora para mayor durabilidad del producto.

60-90°

BMAT 1 CE Material Sanitario Clase 1

Productos WendyLett4Way Sábana Travesera Deslizante Inco (con Empapador)

Art. Nº.	Producto	Ancho colchón (cm/in)	Largo (cm/inch)	Ancho (cm/inch)	Ancho desliz. (cm/inch)	Color	Función	Otro	Dirección deslizamiento
1648	WendyLett4Way, inco	-	75/29.5	200/78.7	-	Cuadros blancos/grises	Travesera desliz.		Art. No. 1648
1649	WendyLett4Way, inco	-	140/55.1	120/47.2	-	Gris	Travesera desliz.		Art. No. 1649

Material: Poliéster, algodón, satín.
Instrucciones: No usar suavizante. Evitar secar en secadora para mayor durabilidad del producto.

60-90°

BMAT 1 CE Material Sanitario Clase 1





WendyLett-4Way con asas Art. No. 1657

Deslizamiento



TurnSheet (dos partes)

TurnSheet está diseñada para usuarios que necesitan ayuda para movilizarse en la cama y tienen sobrepeso, discapacidades severas y/o riesgo evidente de úlceras por presión.

Su acolchado fino y transpirable lo hace adecuado para su uso sobre Superficies Especiales para el Manejo de la Presión (SEMP).



Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
1592	TurnSheet	210 x 150 cm/ 82.7” x 59.1”	1 Ud
1588	TurnSheet	200 x 150 cm/ 78.7” x 59.1”, con hebilla	1 Ud
1597	TurnSheet	200 x 160 cm/ 78.7” x 63”, dos partes	1 Ud
1589	TurnSheet	200 x 240 cm/ 78.7” x 94.5”, para bariatría	1 Ud

Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
1593	Funda colchón	Para 1592, 1590, 1597 y TopSheet 1510, 1515, 1511, largo 200 cm/ 78.7”, cama de 90 cm / 35.4”	1 Ud
1587	Funda colchón	Para 1588, 1586, largo 200 cm/ 78.7”, cama de 90 cm / 35.4”	1 Ud
1594	Funda colchón	Para 1592, 1589, y TopSheet 1510, 1515, largo 200 cm/ 78.7”, cama de 105 cm / 41.3”	1 Ud
1595	Funda colchón	Para 1592 y 1589, Largo 200 cm/ 78.7”, cama de 120 cm / 47.2”	1 Ud



TurnSheet 1592

TurnSheet 1589

TurnSheet 1588

TurnSheet 1597





TopSheet 1520

TopSheet



TopSheet se utiliza para usuarios encamados y con incontinencia que deben ser lateralizados regularmente. Es también una excelente herramienta cuando se necesita mantener a un usuario con sobrepeso en posición lateral, por ejemplo cuando se le ayuda con la higiene personal o el cambio de apósitos. TopSheet es también adecuado cuando se necesita lateralizar a usuarios con patologías asociadas a la demencia, ya que el proceso es tranquilo y suave. El peso se distribuye sobre toda la superficie corporal.

TopSheet está hecha de un material superabsorbente. La superficie siempre está seca, ayudando a prevenir las úlceras por presión. La parte inferior tiene un revestimiento de PU resistente a la humedad que evita que ésta traspase a las sábanas y al colchón.

TopSheet está disponible en diferentes versiones, con y sin material reductor de fricción (ULF) en el reverso, y en varios tamaños. En función de la evaluación de riesgos, las diferentes versiones se colocarán en diversos tipos de SEMPs.

Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
1515	TopSheet (completo)	155 x 140 cm/ 61” x 55.1”, con ULF*	1 Ud
1510	TopSheet (completo)	200 x 160 cm/ 78.7” x 63”, con ULF*	1 Ud
1520	TopSheet (completo)	144 x 140 cm/ 56.7” x 55.1”	1 Ud

**) ULF: Ultra Low Friction*



TopSheet 1515

Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
1514	Parte baja del TopSheet 1515	85 x 140 cm/ 33.5” x 56.7”	1 Ud
1519	Parte baja del TopSheet 1520	80 x 140 cm/ 31.5” x 56.7”	1 Ud
1509	Parte baja del TopSheet 1510	140 x 160 cm/ 56.7” x 63”	1 Ud

Otras ayudas para el deslizamiento



AntiSlip

AntiSlip es una estera antideslizante que se utiliza como apoyo debajo de los pies o entre dos materiales deslizantes para crear una mayor fricción y evitar así el deslizamiento. AntiSlip está hecha de plástico celular. La superficie es fácil de limpiar con jabón o una solución de alcohol.



Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
8040	AntiSlip	45 x 38 cm	1 Ud
8045	AntiSlip	45 x 38 cm	10 Uds





FootStool 8090

FootStool 8095

FootStool

FootStool es un alza que se utiliza principalmente para elevar las rodillas del usuario, facilitando transferencias en posición sentada más fáciles y seguras. FootStool es también una herramienta muy útil que proporciona apoyo debajo de los pies al ir al baño o para el posicionamiento hacia atrás en una silla o silla de ruedas.



Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
8090	FootStool	32 x 38 x 10 cm	1 Ud
8095	FootStool	32 x 38 x 5 cm	1 Ud

Design protection: RCD-67533-1





FootStoolCover

FootStoolCover es una funda para las alzas FootStool limpiable, desinfectable y con asa.



Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
8091	FootStoolCover	Funda Lavable para FootStool Art. No. 8090	1 Ud
8096	FootStoolCover	Funda Lavable para FootStool Art. No. 8095	1 Ud

Design protection: RCD-67533-1





FlexiMove (mini) 3012

FlexiMove (mini)



FlexiMove tiene múltiples áreas de aplicación. Por ejemplo, como apoyo a la bipedestación, al moverse hacia el cabecero de la cama.
FlexiMove está disponible en dos versiones con diferentes materiales en el interior: uno con tejido poliéster de terciopelo suave y cómodo, mientras que la segunda variante tiene un interior de nylon que es repelente de la humedad, resistente a la suciedad y fácil de desinfectar.

Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
3012	FlexiMove	20 x 60 cm, nylon	1 Ud





Flexigrip

FlexiGrip



FlexiGrip es una solución adecuada para usuarios con dificultades al levantarse y salir de la cama. Paso a paso, el usuario se agarra a las diferentes asas, pasando de una posición supina a sentada.
Este ejercicio fortalece al mismo tiempo tanto los músculos abdominales como los de los brazos.

Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
6090	FlexiGrip	175 x 9 cm, 8 asas	1 Ud



Cinturones



FlexiBelt / EasyBelt



FlexiBelt y EasyBelt se utilizan para apoyar y ayudar al usuario a ponerse de pie, sentarse o moverse de la silla de ruedas a la cama, al inodoro o al coche. FlexiBelt también se puede utilizar para dar apoyo adicional a un usuario que está de pie o camina. El cinturón se coloca alrededor de la cintura o de las caderas del usuario, dispone de varias asas tanto verticales como horizontales, que permiten al cuidador tener a su alcance un agarre sólido en cualquier situación.

La hebilla es fuerte, segura y fácil de abrir, cerrar y apretar.
El ajuste de la correa es resistente y fácil de usar.
El borde robusto aumenta la durabilidad del producto.
Costuras reforzadas en las áreas expuestas.



FlexiBelt, hug



EasyBelt, hug

Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
6072	FlexiBelt, hug	XS, 45 - 70 cm, 3 + 2 asas móviles	1 Ud
6073	FlexiBelt, hug	S, 60 - 100 cm, 4 + 3 asas móviles	1 Ud
6074	FlexiBelt, hug	M, 70 - 120 cm, 5 + 4 asas móviles	1 Ud
6075	FlexiBelt, hug	L, 100 - 160 cm, 6 + 5 asas móviles	1 Ud
6076	FlexiBelt, hug	XL, 115 - 175 cm, 7 + 6 asas móviles	1 Ud
6023	FlexiBelt	S, 60 - 100 cm, 7 asas	1 Ud
6024	FlexiBelt	M, 70 - 120 cm, 9 asas	1 Ud
6025	FlexiBelt	L, 100 - 160 cm, 11 asas	1 Ud
6026	FlexiBelt	XL, 115 - 175 cm, 13 asas	1Ud
6002	EasyBelt, hug	XS, 45 - 70 cm, 3 + 2 asas móviles	1 Ud
6003	EasyBelt, hug	S, 60 - 100 cm, 4 + 3 asas móviles	1 Ud
6004	EasyBelt, hug	M, 70 - 120 cm, 5 + 4 asas móviles	1 Ud
6005	EasyBelt, hug	L, 100 - 160 cm, 6 + 5 asas móviles	1 Ud
6006	EasyBelt, hug	XL, 115 - 175 cm, 7 + 6 asas móviles	1 Ud
6013	EasyBelt	S, 45 - 70 cm, 7 asas	1 Ud
6014	EasyBelt	M, 70 - 120 cm, 9 asas	1 Ud
6015	EasyBelt	L, 100 - 160 cm, 11 asas	1 Ud
6016	EasyBelt	XL, 115 - 175 cm, 11 asas	1 Ud

Accesorios

6061	SupportStraps	Soportes Inguinales para cinturón (Marcha y Bipe)	1 Par

**) Patent: SE-536273, EP-2611409, Patent pending: JP-2013-527040*





ReadyBelt



ReadyBelt es un cinturón diseñado para proporcionar al usuario apoyo y asistencia durante el entrenamiento de movilidad en diferentes transferencias.

Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
16023	ReadyBelt	S, 105 x 10 cm, 7 asas	1 Ud
16024	ReadyBelt	M, 120 x 10 cm, 9 asas	1 Ud
16025	ReadyBelt	L, 140 x 10 cm, 11 asas	1 Ud



Cinturones



WalkingBelt

WalkingBelt proporciona apoyo alrededor del torso y se sujeta con un arnés de piernas acolchado. La longitud de las dos asas acolchadas se puede adaptar para ofrecer al cuidador una posición de trabajo cómoda cuando, con los brazos relativamente extendidos, camina cerca del niño y sostiene las asas para proporcionar un apoyo y estabilidad adicional durante el entrenamiento de la marcha.




Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
6041	WalkingBelt	XXS, 60 cm	1 Ud
6042	WalkingBelt	XS, 70 cm	1

Accesorios



SupportStraps

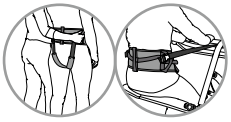

Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
6061	SupportStraps	Soporte inguinal para cinturones	1 Par

Ayudas a la marcha





OxygenTankHolder

RoWalker400

RoWalker400 ofrece un apoyo seguro en los entrenamientos de bipedestación y de marcha a los usuarios con la fuerza en las piernas y el equilibrio reducidos. RoWalker400 tiene una construcción sólida y lo pueden utilizar usuarios que pesen hasta 180 kg. Cuenta con un asiento doble, abatible y escamoteable, para facilitar que el usuario se siente y descanse durante el entrenamiento.
Dispone de un accesorio para acoplar bombonas de oxígeno.



Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
20101010	RoWalker400	Entrenamiento de marcha en movilización temprana	1 Ud
Accessories			
70200059	OxygenTankHolder	Derecha, Soporte de bombona	1 Ud
70200060	OxygenTankHolder	Izquierda, Soporte de bombona	1 Ud

Discos giratorios



TurnTable 5085

TurnTable

TurnTable es un disco giratorio con asas y un tamaño de 38 cm de diátemtro.
Fabricado en polietileno resistente, los discos giran suavemente uno sobre otro.
La superficie de apoyo es de goma antideslizante para proporcionar un buen agarre de los pies.



Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
5085	TurnTable	Ø 38 cm/, max 135 kg	1 Ud





TurnSafe2



TurnSafe2 activa y proporciona apoyo para transferencias de usuarios con equilibrio y fuerza reducidas en las piernas. Por ejemplo, de la cama a la silla de ruedas o de la silla de ruedas al inodoro. TurnSafe cuenta con un reposapiés grande con una superficie antideslizante, altura regulable y soporte para la parte inferior de las piernas ajustable en dirección horizontal y vertical. Estas características, junto con el manillar estable y de fácil de agarre, permiten al usuario participar activamente en el levantamiento y la transferencia.

Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
20201010	TurnSafe2	Max 150 kg	1 Ud
Accessorios			
7215	Padding for leg support	Para TurnSafe2 y ReTurn 7400, 7500, 7500i	1 Par





Padding for leg support
Acolchado Soporte de Piernas

Accesorios de Apoyo



PantLock



Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
8055	PantLock	Talla única	1 Ud

ReTurn



ReTurn es una plataforma de transferencia muy fácil de usar, eficaz para ponerse de pie y realizar una transferencia, pero también es un dispositivo de rehabilitación. Permite dar apoyo a la bipedestación y realizar transferencias seguras y activas hacia o desde la cama, la silla de ruedas o el inodoro. También se puede utilizar para facilitar el reposicionamiento hacia atrás en una silla o una silla de ruedas.

Dispone de una escalera de apoyo (pendiente de patente) apropiada para la mayoría de usuarios adultos y que ofrece muchas posibilidades de agarre.



ReTurn7400 *ReTurn7500i* *ReTurn7600*

Disponible en 3 modelos:

- **ReTurn7500i** max. 150 kg, dispone de una abertura para el enganche rápido de ReTurnBelt.
- **ReTurn7400** max. 150 kg, dispone de una escalera más baja para usuarios pediátricos.
- **ReTurn7600** max. 205 kg, b ase y escalera extra-ancha para usuarios más corpulentos.

El usuario también puede apoyarse en la escalera durante el entrenamiento de andada y la transferencia.

La altura y el ángulo de los soportes de piernas pueden ser fácilmente ajustados para adaptarlos a diferentes usuarios y están equipados con un acolchado adicional. ReTurn7500i y ReTurn7400 tienen la misma plataforma. Las diferentes alturas de sus respectivas escaleras, que se pueden adquirir por separado, ofrecen cobertura a un mayor número de usuarios y/o necesidades.

**) Patent: SE-0300528-7*

***) Patent pending: EP-12868688-8, US-14/378658*

Design protection: RCD-529631-1 (ReTurn7500/7500ii/7400/7600)

Ayudas a la bipedestación



ReTurnBelt



SupportStraps



HeelStrap



Padding for leg support



Bag

Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
7500i	ReTurn7500i	Plataforma de transferencias, altura estándar, apertura para anclaje de cinturón de ReturnBelt	1 Ud
7400	ReTurn7400	Plataforma de transferencias, altura pediátrica	1 Ud
7600	ReTurn7600	Plataforma de transferencias bariatría	1 Ud

Accesorios

6031--6038	ReTurnBelt***	Talla XXS-XXXL, para ReTurn con Art. Nº 7100****, 7500, 7500i, 7400, 7600	1 Ud
6061	SupportStraps	Accesorio para cinturones	1 Par
7250	HeelStrap	para ReTurn7500 con nº de serie desde 373317697500500001 y para ReTurn7400 con nº de serie desde 373317697400500001	1 Ud
7215	Padding for leg support	Acolchado de piernas para ReTurn con Art. Nº 7100****, 7500, 7500i, 7400 (incluido en 7500i)	1 Par
7216	Padding for leg support	Acolchado de piernas para ReTurn 7600	1 Par
954	Bag	Para ReTurn 7500, 7500i, 7400	1 Ud

****) Patent: SE-0401517-8*









QuickMove



Art. Nº.	Producto	Descripción	Unidades
400801334	QuickMove	Max 170 kg	1 Ud
Accesorios			
70200037	BackSupport	Cincha de seguridad	1 Ud





BackSupport







Sobre MediCauce

Technology for better care

En MediCauce nuestro objetivo último es facilitar la **vida diaria de cuidadores y pacientes**, aumentando la calidad de los cuidados, seguridad y la prevención, así como **optimizar los procedimientos** y recursos dentro de los sectores hospitalario, socio-sanitario y domiciliario.

En MediCauce somos más que un proveedor; queremos ser tu **partner**. Contamos con un equipo completo de personas con expericencia en areas asistenciales y clínicas, servicio técnico y expertos en procesos para compañarte en la gestión diaria de tu centro, dentro de las 3 áreas de especialización: **Menejo de Pacientes e Higiene, Úlceras por Presión y Rehabilitación**






FORMACIÓN

Ofrecemos un completo servicio formativo en distintas áreas: manejo seguro de pacientes e higiene, úlceras por presión y rehabilitación. Diseñadas e impartidas por profesionales sanitarios muy cualificados buscan como objetivo aumentar el conocimiento teórico y el desempeño práctico para mejorar la seguridad y la reducción de tiempos en el manejo de pacientes e higienes, fomentar la prevención de úlceras y optimizar los procesos implicados en los cuidados en general. El personal bien formado mejora los procedimientos y reduce costes.

SERVICIO TÉCNICO

Disponemos de una red de Servicios Técnicos Autorizados que cubren toda España (incluidas islas) ofreciendo una respuesta ágil en la resolución de cualquier incidencia. Además ofrecemos un servicio de mantenimiento preventivo y programado para que todos los equipos estén siempre en prefecto estado de uso. Trabajamos con un principio: ningún equipo parado.

AUDITORÍA

Nuestro servicio de auditoría es el primer paso para generar mejoras posteriores. Conocer el punto de partida tanto en materiales como en procesos permite una correcta planificación. Las auditorías de materiales permiten al cliente conocer el estado de su parque de ayudas técnicas, su funcionalidad, suficiencia y estado. Las auditorías de procesos nos ayudan a entender cómo mejorar, simplificar y agilizar esas actuaciones diarias que se realizan en un centro.

SISTEMA CHECK

En MediCauce disponemos de sistemas contrastados para valorar, medir y programar planes completos de mejora (por ejemplo en movilización y transferencia de pacientes y el Sistema Check) identificando y proveyendo las necesidades materiales, formando al personal en los nuevos procedimientos y acompañando al cliente en el proceso de implantación de Planes de Mejora.

MediCauce
Technology for better care

Medicauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo; España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Distribuidor: